



ICdoc pro

Installation und Bedienung 2015

ICdoc

Inhaltsübersicht der Hilfe



[Installation von ICdoc](#)

Schrittweise Anleitungen zur Installation von ICdoc.
Inkludiert Anweisungen zum ICdoc-Update bei Versionswechsel.



[Bedienungsanleitung ICdoc](#)

Arbeiten mit ICdoc:
Anleitungen zur Anmeldung am System, zum Umgang mit dem ICdoc-Manager, zur Benutzung der Datenerfassungsbildschirme und deren Schaltflächen, sowie Informationen zur Bettenliste und zur Stationskonfiguration.



[Datensicherung](#)

Anleitungen zur Datensicherung von ICdoc:
Hinweise zur Benutzung des Backup und Recovery Managers der Oracle-Datenbank, sowie Verweise auf allgemeine Informationsquellen zum Thema Datensicherung der zugrundeliegenden Datenbank.



[Der Datensatz](#)

Informationen über die Eingabefelder:
Beschreibung des spezifischen Datensätze und deren Felder. Für jedes Feld werden die Vollbezeichnung, der Langname, sämtliche Datenbank- und Eingabeparameter, die Wertebereiche, eine Eingabehilfe und eine Beschreibung mit Kommentar angeführt.



[Selektionskriterium \(Interpretation von Datumsgrenzen\)](#)

Speziell für Reports, Diagramme und im freien Export müssen für die Auswahl mehrerer Patienten einer Station zwei Datumsgrenzen angegeben werden. ICdoc kennt 11 Varianten der Interpretation dieser Datumsgrenzen.



[LKF Fehlerliste](#)

Hier finden Sie Informationen über die Anzeige der vom LKF-Subsystem zurückgelieferten Fehlermeldungen und deren Behandlung.



[Information](#)

Allgemeine Informationen zu ICdoc: Hotline Telefonnummern und Hinweise für den Support sowie technische Voraussetzungen der vorliegenden Version.



[Sponsoren](#)

ICdoc besitzt eine Reihe von Sondermodulen, die mit freundlicher Unterstützung der hier genannten Sponsoren entwickelt wurden.

Installation

Willkommen bei der Installation von ICdoc. Um eine reibungslose Installation zu gewährleisten, überprüfen Sie bitte ob Ihr Computersystem die notwendigen Voraussetzungen erfüllt (Technische Voraussetzungen).

Administrator Logon

Um ICdoc vollständig installieren zu können, müssen Sie für die Betriebssysteme Windows 2000, Windows XP oder Windows Vista als Benutzer mit Administrator-Rechten angemeldet sein. Ist dies nicht der Fall, so melden Sie sich bitte neu am System an. Besitzen Sie keine Benutzerkennung mit Administrator-Rechten für das Betriebssystem, so lassen Sie die Anwendung von Ihrem zuständigen Systembetreuer installieren.

Plattformspezifische Unterschiede bei der Installation

Für die Betriebssysteme Windows 2000, Windows XP und Windows Vista gilt nachfolgend beschriebene Vorgangsweise für das Starten der Setup-Anwendung.

Installationsreihenfolge

Die Installation von ICdoc gliedert sich in zwei Teilinstallationen. Zuerst müssen Sie die Oracle-Datenbank installieren. Derzeit werden zwei Oracle Datenbank Versionen unterstützt: siehe [Installationsanleitung zu Oracle V8i](#) oder [Installationsanleitung zu Oracle V10g](#). Ist die Installation der Datenbank erfolgreich abgeschlossen, so starten Sie die [ICdoc-Installation](#).

Upgrade

Wollen Sie eine neuere über eine ältere Version installieren, dann installieren Sie nur ICdoc neu. Das [Update der Datenbank](#) erfolgt beim darauffolgenden Starten von ICdoc mittels eines automatisch gestarteten Patchjob.

Starten der Installation

Stellen Sie sicher, daß sich die ICdoc-CD im CD-ROM Laufwerk befindet. Sofern das Installationsprogramm nicht nach Einlegen der CD automatisch startet, starten Sie das Programm INSTALL.EXE im Hauptverzeichnis der CD von Hand. Abhängig von der Datenbank Version, die sich auf der CD befindet, kann das angezeigte Layout leicht differieren:

Installations Bildschirm für Oracle V8i:



Schritt 1:

Starten Sie das Setup Programm für die Installation der Datenbank mit Click auf den Button "**Schritt 1: Datenbank installieren**". Bitte beachten Sie, dass der Start einer Applikation von der CD langsamer sein kann, als Sie es von Ihrem Rechner gewohnt sind!

Schritt 2:

Starten Sie das Setup Programm für ICdoc mit Click auf den Button "**Schritt 2: ICdoc installieren**". Bitte beachten Sie, dass der Start einer Applikation von der CD langsamer sein kann, als Sie es von Ihrem Rechner gewohnt sind!

Installations Bildschirm für Oracle V10g:



Schritt 1:

Starten Sie das Setup Programm für die Installation der Datenbank mit Click auf den Button "**Schritt 1: Datenbank installieren**". Bitte beachten Sie, dass der Start einer Applikation von der CD langsamer sein kann, als Sie es von Ihrem Rechner gewohnt sind!

Schritt 2:

Starten Sie das Programm zum initialisieren der Datenbank mit Click auf den Button "**Schritt 2: Datenbank initialisieren**". Bitte beachten Sie, dass der Start einer Applikation von der CD langsamer sein kann, als Sie es von Ihrem Rechner gewohnt sind!

Schritt 3:

Starten Sie das Setup Programm für ICdoc mit Click auf den Button "**Schritt 3: ICdoc installieren**". Bitte beachten Sie, dass der Start einer Applikation von der CD langsamer sein kann, als Sie es von Ihrem Rechner gewohnt sind!

Anmerkung: Der Button "Freigabeschlüssel" wird nur bei Auslieferung einer DEMO-CD von ICdoc angezeigt. Der dort angezeigte Freigabeschlüssel kann nach der Installation von ICdoc mit Copy/Paste in den Freigabeschirm von ICdoc kopiert werden. Zum Freigabeschirm in ICdoc gelangen Sie über das Menü: "Ansicht/Optionen/Module".

Über die Buttons "Installationsanleitung", "Dokumentation" und "Bedienungsanleitung" können jederzeit die einzelnen Dokumente angezeigt und ausgedruckt werden. Alle Dokumente sind auf der CD im Adobe Reader Format abgelegt. Sollte auf Ihrem Rechner noch kein Adobe Reader installiert sein, können Sie diesen mit dem Button "Adobe Reader" sofort installieren.

Detailbeschreibung der Installationen

[Oracle V8i für Windows installieren](#)

[Oracle V10g für Windows installieren](#)

[ICdoc für Windows](#)

[Versionskontrolle und Datenbankupdate](#)

Installation - Oracle V8i für Windows

Mit der Oracle Version 8 besteht die Möglichkeit, die Applikation von der Datenbank zu trennen und auf verschiedenen Rechnern zu installieren. Deshalb wird die Installation der Datenbank und die Installation des Datenbank-Clients (zuständig für den Zugriff auf eine Datenbank, die auf einem anderen Rechner installiert wurde) getrennt. Bei der Standalone-Variante von ICdoc (ICdoc und Datenbank befinden sich auf demselben Rechner) benötigen Sie nur die Installation der Datenbank.

Installation der Datenbankumgebung

Stellen Sie sicher, dass sich die ICdoc-CD im CD-ROM Laufwerk befindet. Starten Sie aus dem Installationsprogramm die Oracle-Installation über den Button "Datenbank installieren". Bei Installationen über das Netzwerk lässt sich das Installationsprogramm für die Datenbank auch direkt starten: Starten Sie dazu den Windows Explorer und wechseln Sie in das Stammverzeichnis der CD-ROM Laufwerks. Gehen Sie von dort in das Verzeichnis Ora817 und starten Sie dort das Programm Setup.exe. Nach dem Start erscheint der Oracle Installer auf dem Bildschirm (Bild 1).

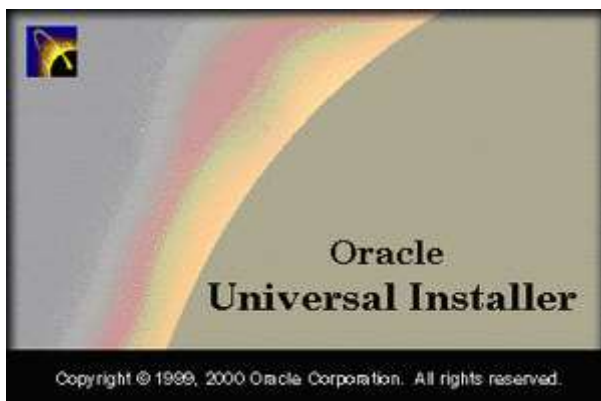


Bild 1: Oracle Installer; Startbildschirm

Achtung: Da es sich bei dem Installationsprogramm von Oracle um eine Java-Applikation handelt, kann es einige Zeit dauern, bis der erste Bildschirm des Installationsprogramms erscheint! Der Oracle Installer ist das Oracle Installationsprogramm für die Oracle Datenbank. Während des Ladens des Oracle Installers wird die Basis-Initialisierung für das Setup vorgenommen und am Bildschirm die Meldung 'Loading...' ausgegeben. Benötigen Sie während der Installation weitere Informationen, so aktivieren Sie die Oracle Hilfe durch Drücken des Hilfe-Buttons.



Bild 2: Oracle Installer; Willkommen

Nach dem Laden des Oracle Installer, wird der Hauptdialog angezeigt (Bild 2). Betätigen Sie den Weiter-Button um mit der Installation der Datenbank fortzufahren.



Bild 3: Oracle Installer; Dateiverzeichnisse

Im Bild 3 wird angezeigt (unter Ziel\Pfad), wohin die Datenbank und alle von Oracle benötigten Applikationen von der CD kopiert werden. Sie können das Laufwerk frei wählen. Als Root-Directory sollten Sie jedoch das Verzeichnis "Oracle\ora81" belassen, da dieser Name als Teil der für Oracle üblichen Namenskonventionen gilt. Drücken Sie den Weiter-Button um fortzufahren. Wichtig: Legen Sie die Datenbank auf eine lokale Platte mit den größten Speicherreserven. Legen Sie die Oracle-Installation auf keinen Fall unter "c:\Programme" oder "c:\program files"!

Sollten Sie im Zuge der Installation entdecken, dass auf diesem Rechner eine Oracle7 Version bereits installiert ist (dann steht im Feld Ziel/Name der Eintrag "OracleHome" und nicht "OracleHome81"), brechen Sie die Installation ab und entfernen Sie die Version 7 der Oracle Datenbank.
Hinweis: unsere Hotline kennt alle Tricks, wenn sich die Version gegen das Deinstallieren wehrt!

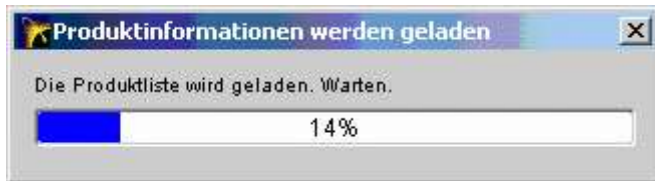


Bild 4: Oracle Installer; Produktinformationen werden geladen

Warten Sie ab, bis Oracle alle Produktinformationen geladen hat (Bild4).



Bild 5: Oracle Installer; Verfügbare Produkte

Wählen Sie den Punkt "Oracle8i 8.1.7.0.0" im Bild 5 und drücken Sie den Weiter-Button



Bild 6: Oracle Installer; Installationsarten

Wählen Sie den Punkt "Minimal (591 MB)" im Bild 6 und drücken Sie den Weiter-Button.



Bild 7: Oracle Installer; Start-Datenbank auswählen

Wählen Sie die Antwort "No" im Bild 7 und drücken Sie den Weiter-Button.

Anmerkung: Die für ICdoc notwendige Datenbank wird zu einem späteren Zeitpunkt angelegt. Mit der hier angegebenen Möglichkeit kann nur eine völlig leere Datenbank angelegt werden, die für ICdoc nicht tauglich ist!



Bild 8: Oracle Installer; Überblick

Drücken Sie den Installieren-Button, um mit der eigentlichen Installation zu beginnen.



Bild 9: Oracle Installer; Installieren

Der Fortschritt während der Installation wird in Prozenten angezeigt (Bild 9). Im Normalfall darf es hier zu keine weiteren Fehlermeldungen kommen, falls doch, wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Hotline.



Bild 10: Oracle Installer; Konfigurationswerkzeug

Von diesem Bildschirm (Bild 10) aus wird automatisch der Net8 Konfigurations-Assistent gestartet. Da der Startprozess im allgemeinen einiges an Zeit benötigt, bitten wir Sie um etwas Geduld.

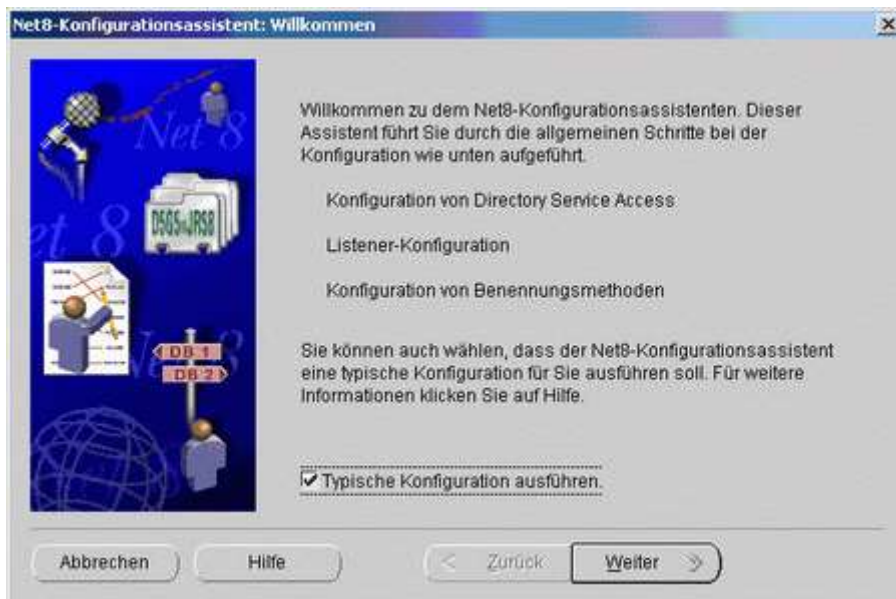


Bild 11: Net8-Konfigurationsassistent; Willkommen

Kreuzen Sie das Feld "Typische Konfiguration" (Bild 11) an und drücken Sie den Weiter-Button. Anmerkung: Während Sie sich im Net8-Konfigurationsassistenten befinden, wird im Hintergrund immer noch der Oracle-Installer (Bild 10) angezeigt. Da dieser Bildschirm etwas größer als der Net8-Konfigurationsassistent ist, kann es vorkommen, dass dieser während der Ausführung in den Hintergrund rutscht. Durch Verschieben des Oracle-Assistenten kann diese Panne behoben werden.



Bild 12: Oracle Installer; Ende der Installation

Nachdem die Net8-Konfiguration erfolgreich durchgeführt wurde, erscheint der Oracle-Installer wieder im Vordergrund (Bild 12). Beenden Sie die Installation durch Drücken des Beenden-Buttons. Quittieren Sie das Nachfragen, ob Sie den Oracle-Installer wirklich verlassen wollen, mit "Ja".

Installation der ICdoc-Datenbank

Die Datenbank für ICdoc wird nach der Installation des Oracle Datenbankumgebung durchgeführt. Starten Sie dazu den Datenbank Konfigurations-Assistenten unter "Start/Programme/Oracle – OracleHome81/Database Administration/Database Configuration Assistant".



Bild 1: Datenbank-Konfigurationsassistent; Willkommen

Wählen Sie die Option "Erstellen einer Datenbank" (Bild 1) und drücken Sie den Weiter-Button um fortzufahren.

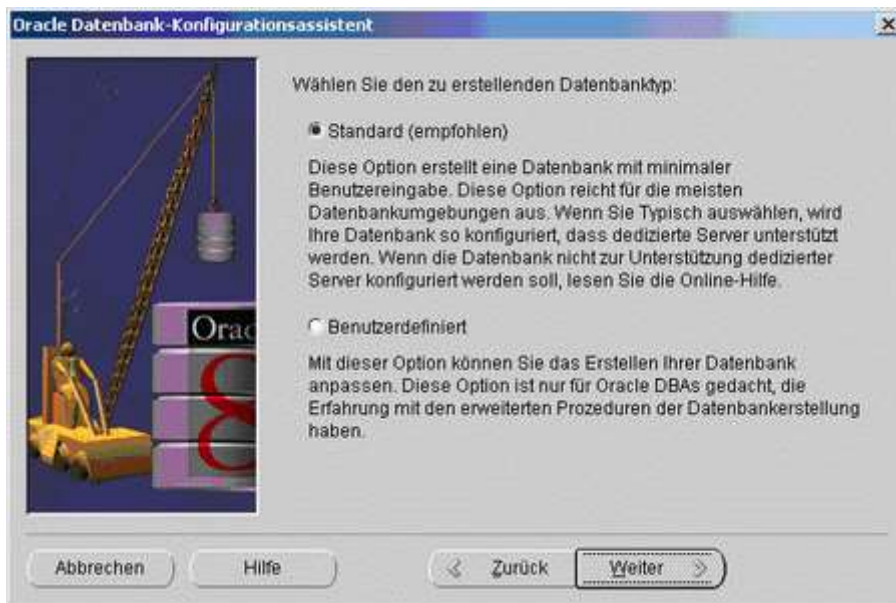


Bild 2: Datenbank-Konfigurationsassistent; Wählen des Datenbanktyps

Sie haben jetzt das ORACLE Datenbanksystem erfolgreich installiert und können nun das Dokumentationssystem *ICdoc* aufsetzen. Dazu starten Sie wie beschrieben Schritt 2, das *ICdoc* Setup.

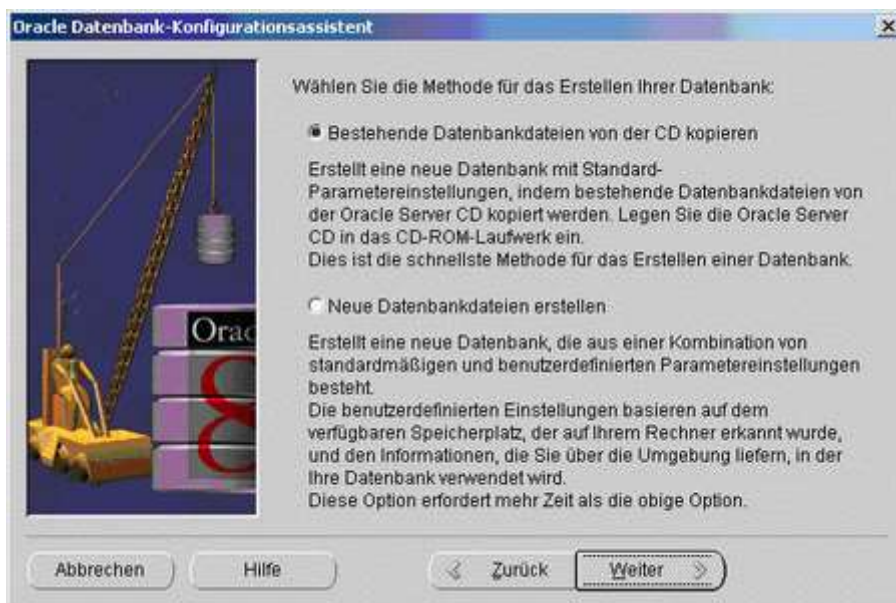


Bild 3: Datenbank-Konfigurationsassistent; Wählen der Erstellungsmethode

Wählen Sie die Option "Bestehende Datenbankdateien von der CD kopieren" (Bild 3) und drücken Sie den Weiter-Button um fortzufahren.

Anmerkung: Die Vorlage für die Datenbank befindet sich in Wirklichkeit bereits auf Ihrer Platte. Eine CD ist tatsächlich nicht mehr erforderlich!



Bild 4: Datenbank-Konfigurationsassistent; Namenswahl der Datenbank

Tragen Sie jetzt den Datenbankname im Feld "Globaler Datenbankname" (Bild 4) ein. Halten Sie sich dabei bitte an folgende Namenskonvention: Der Buchstabe "i" gefolgt von der ICdoc Stations-ID (z.B. 1000). Der System-Identifizier (SID) wird automatisch gleich ausgefüllt.



Bild 5: Datenbank-Konfigurationsassistent; Fortfahren?

Bestätigen Sie die Frage in Bild 5 mit "Ja".



Bild 6: Datenbank-Konfigurationsassistent; Installationshinweis

Das hier nicht angeführte Passwort für den INTERNAL-Account lautet "Oracle". Die Passwörter für SYS und SYSTEM wurden aus Sicherheitsgründen bereits verändert. Für den laufenden Betrieb werden diese beiden Accounts nicht benötigt!



Bild 7: Datenbank-Konfigurationsassistent; Fortschritt

Während des Anlegens der Datenbank wird der Fortschritt (Bild 6) laufend aktualisiert.

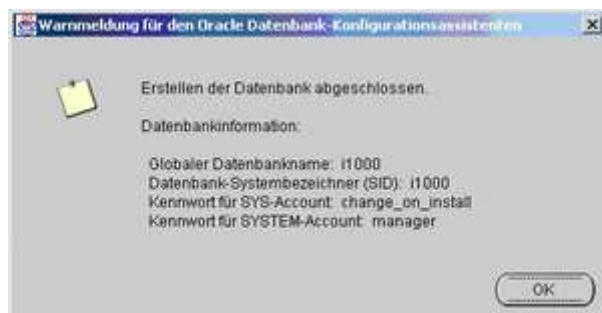


Bild 8: Datenbank-Konfigurationsassistent; Erstellung beendet

Quittieren Sie die Anzeige mit dem OK-Button um fortzufahren.

Reduktion der Hintergrund Services für Oracle

Oracle legt eine Reihe von Services an, die für den Betrieb von ICdoc nicht benötigt werden und deshalb aus Performance-Gründen deaktiviert werden müssen.

Starten Sie die Übersicht über die am Rechner installierten Services mit "Start/Programme/Verwaltung/Dienste".

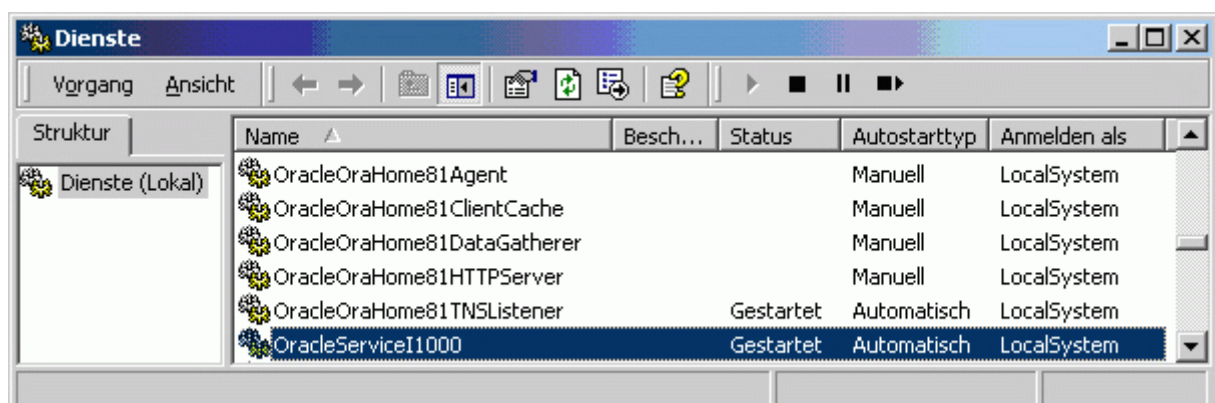


Bild 1: Dienste

Im Bild 1 sind alle Oracle betreffenden Dienste angezeigt. Das hier angeführte Service "OracleService1000" entspricht dem Verweis auf die eigentliche ICdoc-Datenbank und kann deshalb auf Grund unterschiedlicher ICdoc Stations-ID's vom angezeigten Beispiel abweichen. Bei der mandantenfähigen Version von ICdoc können mehrere dieser Services angezeigt werden. Für jede verwaltete Intensivstation wird eine Datenbank und entsprechend ein Oracle Service eingerichtet.

Setzen Sie den Status und den Autostarttyp wie in Bild 1 angezeigt.

Nach der Installation der Oracle Datenbankumgebung und der Datenbank sollte der Rechner in jedem Fall neu gebootet werden!

Installation - Oracle V10g für Windows

Die Installation von Oracle V10g muss in zwei Teilschritten durchgeführt werden. Im ersten Schritt wird die Oracle-Umgebung und eine leere Standard Datenbank erzeugt. Im zweiten Schritt wird die Datenbank für ICdoc befüllt und vorbereitet.

Schritt 1: Installation der Datenbankumgebung mit leerer Datenbank

Stellen Sie sicher, dass sich die ICdoc-CD im CD-ROM Laufwerk befindet. Starten Sie aus dem Installationsprogramm die Oracle-Installation über den Button "Schritt 1: Datenbank installieren". Bei Installationen über das Netzwerk lässt sich das Installationsprogramm für die Datenbank auch direkt starten: Starten Sie dazu den Windows Explorer und wechseln Sie in das Stammverzeichnis der CD-ROM Laufwerks. Gehen Sie von dort in das Verzeichnis Ora10XE und starten Sie dort das Programm OracleXEUniv.exe. Warten Sie, bis der Installations-Assistent entpackt ist und gestartet hat (Bild 1).

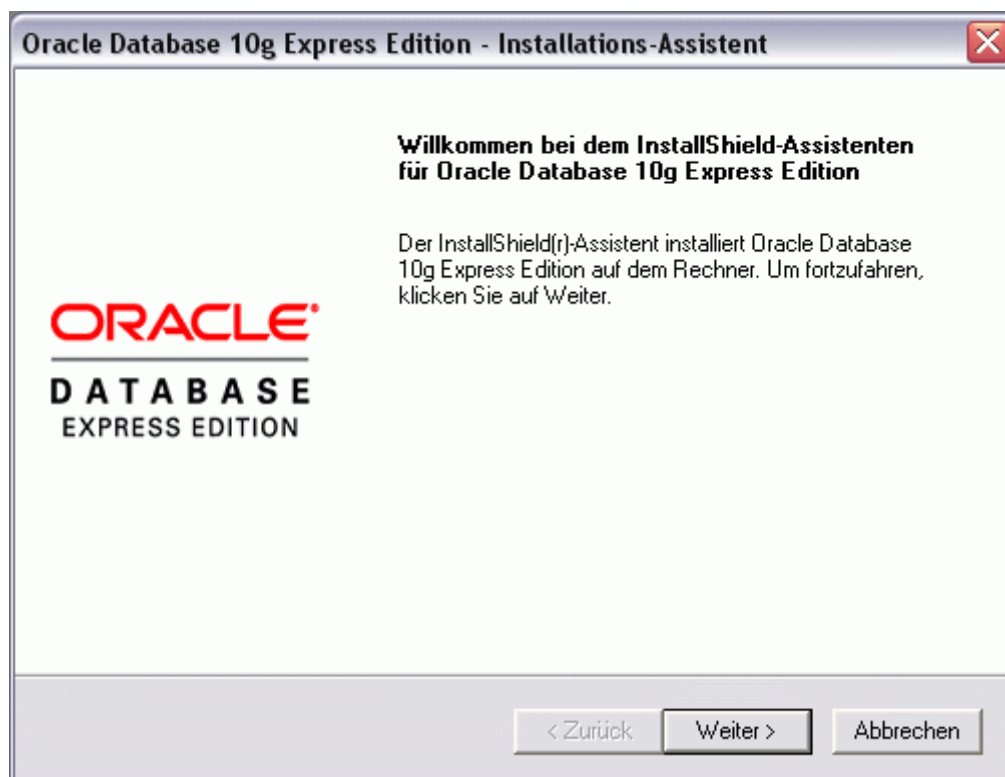


Bild 1: Oracle Installer; Installations-Assistent

Drücken Sie "Weiter" um mit der Installation fortzufahren.

Akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen von Oracle, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

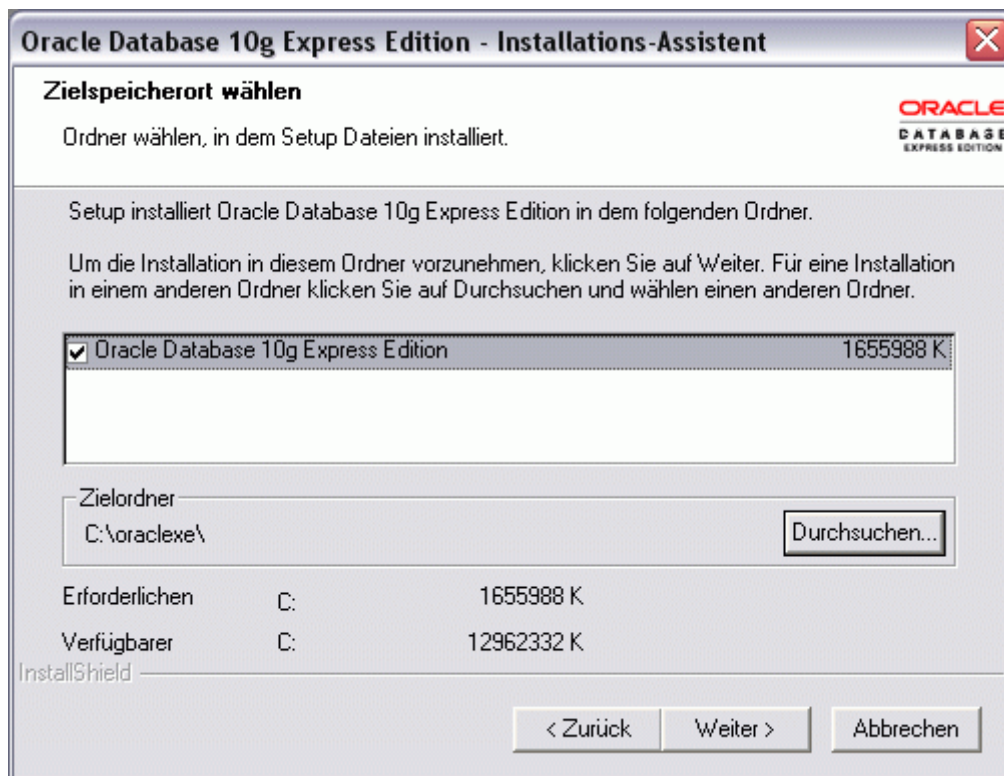


Bild 2: Oracle Installer; Zielspeicherort wählen

Sie können selbst bestimmen, in welchem Ordner auf Ihrem Rechner die Dateien für die Oracle-Installation abgelegt werden sollen. Bitte beachten Sie, dass sich der Zielordner auf einer lokalen Festplatte befinden muss und dass dieses Verzeichnis nicht komprimiert sein darf!

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, eine Port Nummer einzugeben, dann folgen Sie den Anweisungen:

Folgende Port Nummern werden von Oracle als Standard verwendet:

- **1521**: Oracle Datenbank Listener
- **2030**: Oracle Services für den Microsoft Transaction Server
- **8080**: HTTP Port für das Oracle XE grafische User Interface

Wenn diese Port Nummern in Ihrem System nicht verwendet werden, werden diese Nummern automatisch verwendet. Andernfalls werden Sie nach alternativen Port Nummern gefragt.



Bild 3: Oracle Installer; Datenbankkennwörter eingeben

Der Installer möchte von Ihnen ein System Passwort wissen. Da ICdoc mit eigenen Datenbank-Usern arbeitet, wird dieses System Passwort in weiterer Folge nicht mehr benötigt!



Bild 4: Oracle Installer; Zusammenfassung

Drücken Sie "Installieren", um mit der Installation fortzufahren.

Beobachten Sie den Fortschritt des Installationsprozesses und notieren Sie sich gegebenenfalls angezeigte Fehler. Bei Schwierigkeiten während der Installation hilft Ihnen unsere Technische Hotline gerne weiter.

Die Option "Datenbank-Homepage starten" ist auf der letzten Seite standardmäßig angekreuzt. Da die ICdoc-Installation in weiterer Folge diese Homepage nicht benötigt, deaktivieren Sie bitte das entsprechende Kästchen. Sollte diese Option angekreuzt bleiben, sollten Sie die angezeigte Homepage gleich wieder schließen, bevor Sie mit der Initialisierung der Datenbank fortfahren.

Schritt 2: Initialisieren der Datenbank

Stellen Sie sicher, dass sich die ICdoc-CD im CD-ROM Laufwerk befindet. Starten Sie aus dem Installationsprogramm die Initialisierung der Datenbank über den Button "Schritt 2: Datenbank initialisieren". Für die Initialisierung der Datenbank können Sie zwischen einer leeren ICdoc-Datenbank und einer ICdoc-Datenbank mit Testdaten wählen (Bild 5).



Bild 5: Datenbank Initialisierung

Nachdem Sie eine Datenbankvariante ausgewählt haben, beginnt die eigentliche Initialisierung der Datenbank. Während der Initialisierung wird ein DOS-Fenster angezeigt. Warten Sie bitte, bis sich das DOS-Fenster selbständig geschlossen hat. Danach ist die Datenbank für den Betrieb von ICdoc verwendbar.

Wichtig: Der für ICdoc eingerichtete Standard-User (icdoc) hat das Password: pleasechange.

Installation - ICdoc

Stellen Sie sicher, dass sich die ICdoc-CD im CD-ROM Laufwerk befindet. Bei Installationen über das Netzwerk lässt sich das Installationsprogramm für ICdoc auch direkt starten: Starten Sie dazu den Windows Explorer und wechseln Sie in das Stammverzeichnis der CD-ROM Laufwerks. Gehen Sie von dort in das Verzeichnis ICdoc und starten Sie dort das Programm Setup.exe. Während des Startvorgangs des Setup-Programms können Sie gegebenenfalls die Sprache ändern.



Sprachwahl

Nach dem Start erscheint das Installationsprogramm, der Setup-Assistent für ICdoc auf dem Bildschirm (Bild 1) und der untenstehende Willkommens-Bildschirm erscheint. Es wird empfohlen, dass alle anderen laufenden Programme für die Dauer der Installation beendet werden. Lesen Sie die Anweisungen am Bildschirm und drücken Sie dann den 'Weiter'-Button um mit der Installation fortzufahren.

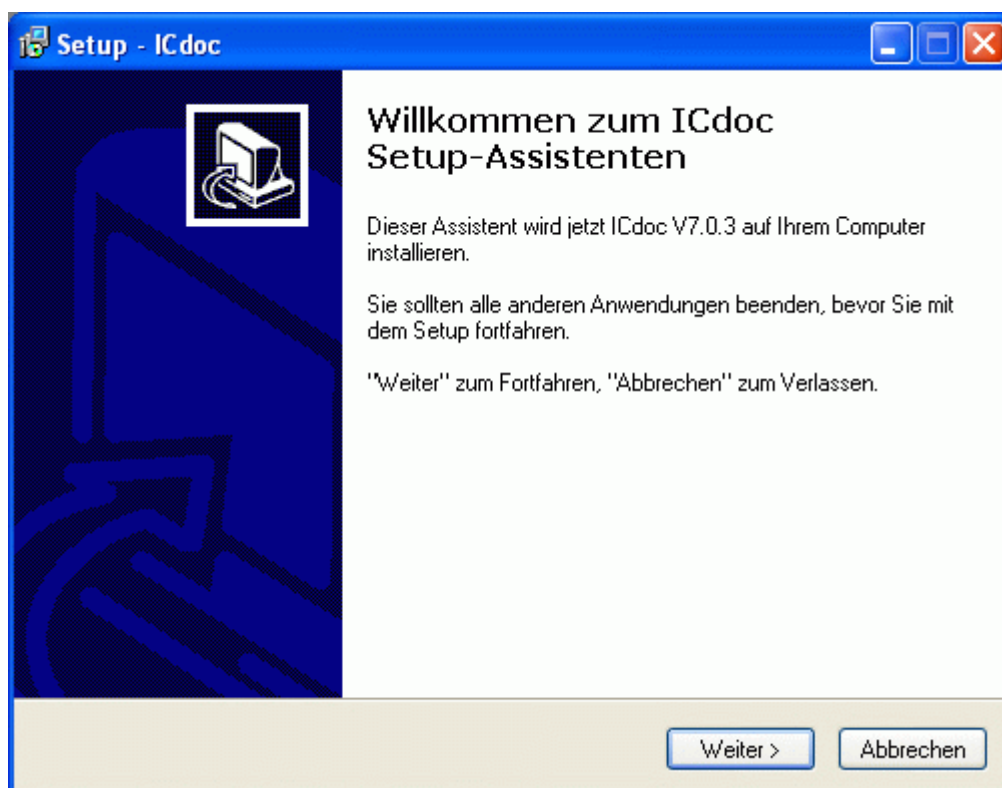


Bild1: Willkommen

Drücken Sie den Weiter-Button (Bild 1) um mit der Installation zu beginnen.

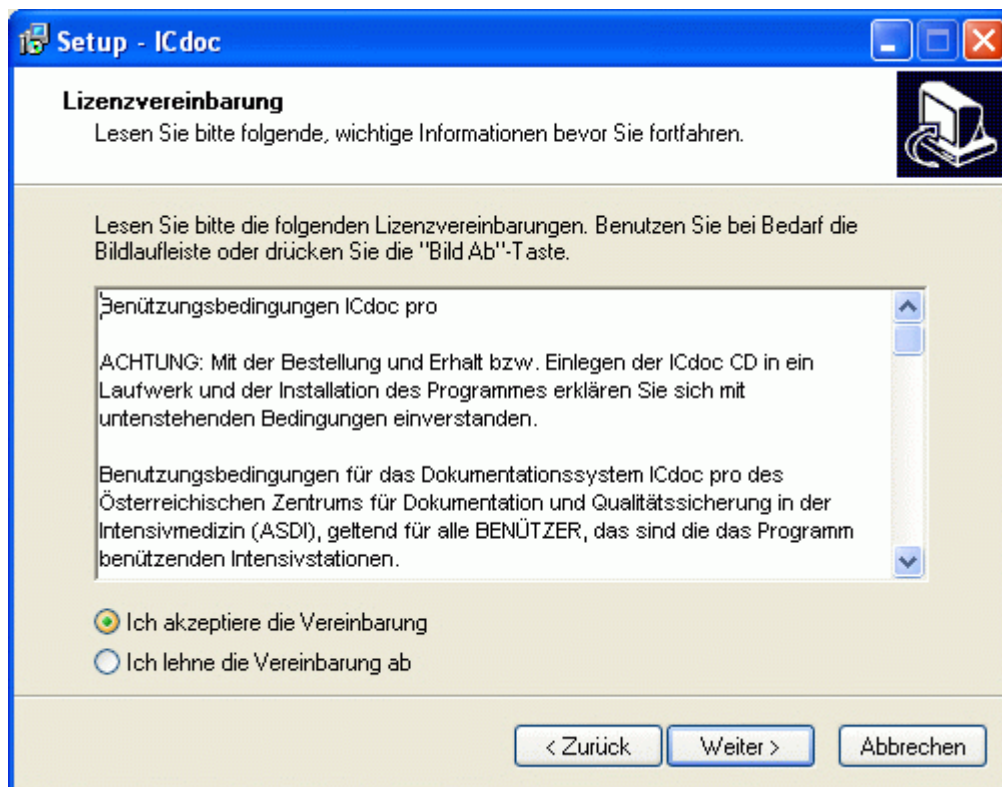


Bild2: Lizenzvereinbarung

Quittieren Sie die Lizenzbedingungen (Bild 2) der Österreichischen Gesellschaft für Dokumentation und Qualitätssicherung (ASDI) mit dem Button „Ich akzeptiere die Vereinbarung“ und drücken Sie „Weiter“ um fortzufahren.



Bild3: Ziel-Ordner wählen

Wollen Sie die Anwendung in ein anderes Verzeichnis installieren, so drücken Sie den 'Durchsuchen'-Button und folgen den Anweisungen im Dialog. Bestätigen Sie das Verzeichnis in

dem die ICdoc-Anwendung installiert werden soll und drücken Sie den 'Weiter'-Button um mit der Installation fortzufahren.

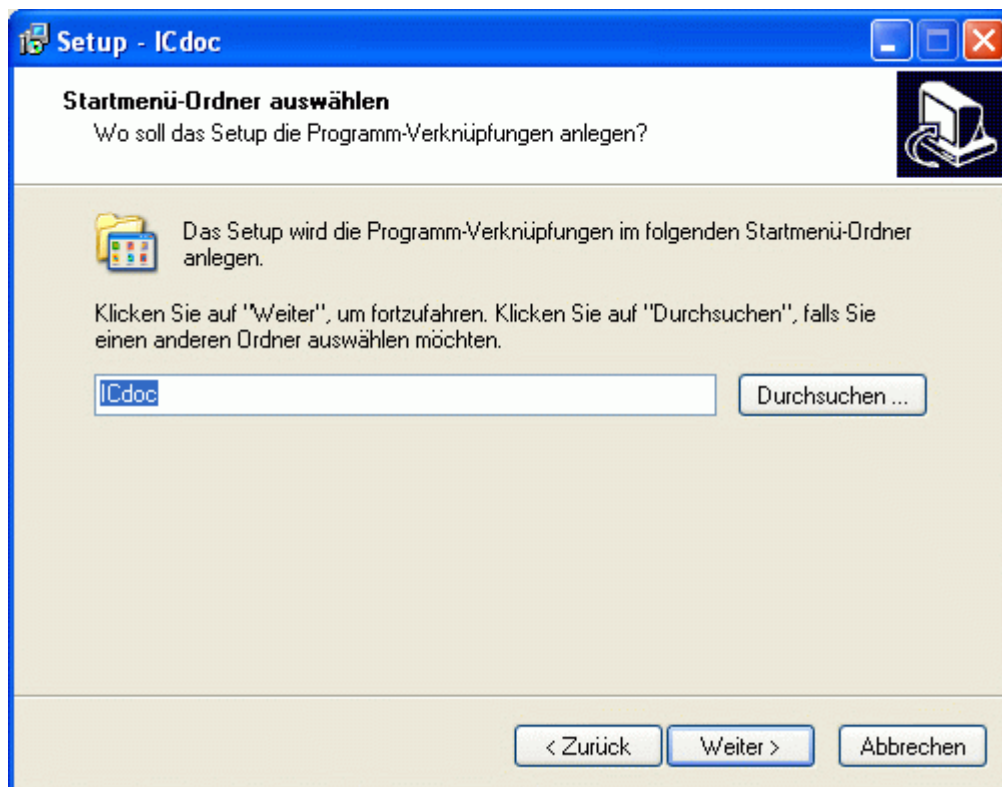


Bild4: Startmenü-Ordner auswählen

Das Setup Programm fügt Programm-Symbole in eine von Ihnen gewählte Programmgruppe hinzu. Standardmäßig wird die Programmgruppe 'ICdoc' vorgeschlagen. Wollen Sie eine andere Programmgruppe auswählen, so geben Sie entweder einen neuen Namen ein. Drücken Sie dann den „Weiter“-Button um mit der Installation fortzufahren.



Bild5: Installation durchführen

Das Setup Programm verfügt nun über genügend Informationen um mit der Installationen der ICdoc-Anwendung zu beginnen. Wollen Sie einige Optionen ändern, so betätigen Sie den 'Zurück'-Button. Drücken Sie dann den 'Weiter'-Button um mit der Installation der Dateien zu beginnen.

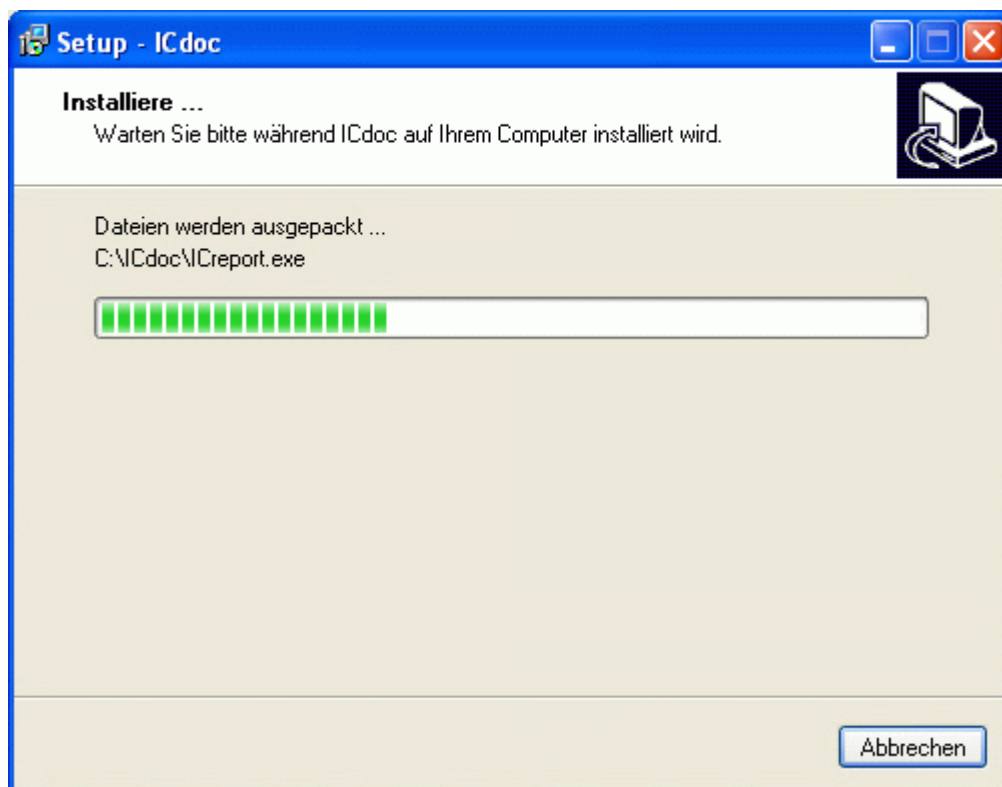


Bild6: Setup - ICdoc

Während ICdoc auf Ihrem Rechner installiert wird, zeigt der Balken am unteren Bildschirmrand den aktuellen Status der Installation an.

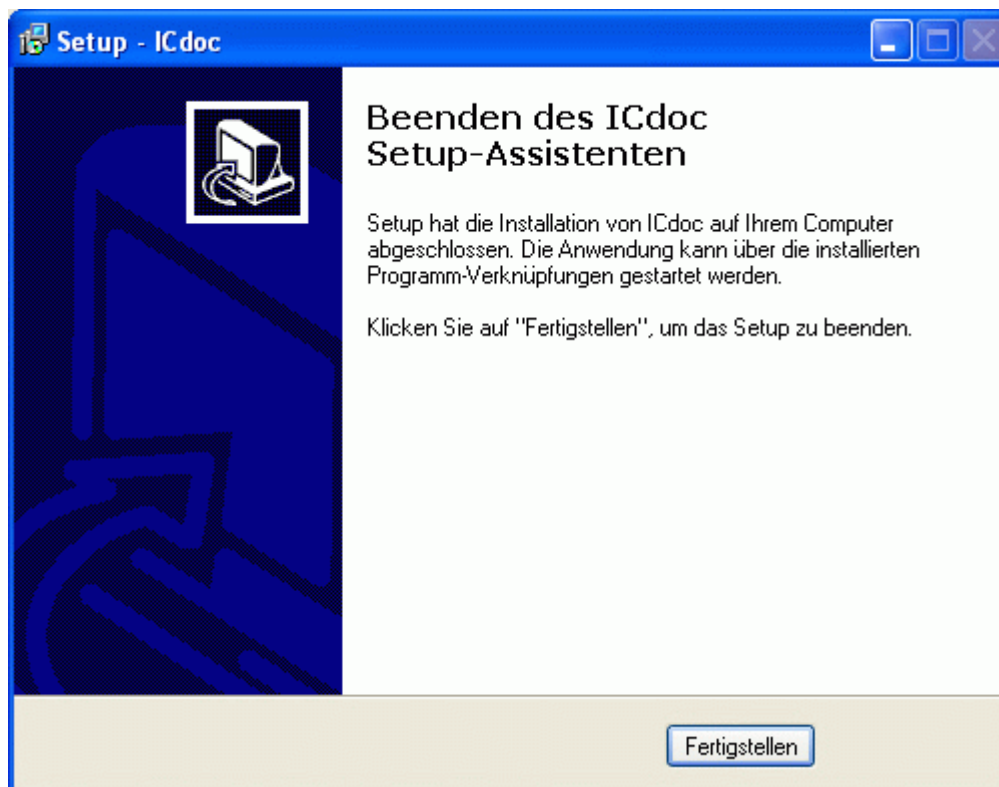


Bild7: Setup – ICdoc beendet

Nach der Installation der ICdoc-Dateien, erscheint der Abschlußdialog des Install Shield Wizards (Bild 8). Drücken Sie den 'Fertigstellen'-Button um die Installation abzuschließen.

Sie haben nun die Installation erfolgreich beendet und können ICdoc oder ICVerChk (nur zur Versionskontrolle von ICdoc) starten. Nach dem Start erscheint der [Anmeldeschirm](#), dessen Bedienungsanleitung Sie im [allgemeinen Bedienungsteil](#) finden. ICVerChk benötigt kein Passwort, um die Versionskontrolle durchzuführen.


Versionskontrolle und Datenbankupdate

Haben Sie ein Upgrade von ICdoc vorgenommen, oder ein ICdoc-Servicepack eingespielt (Installation einer neueren Version von ICdoc über eine ältere Version), muß auch ein Update der Datenbank durchgeführt werden.

Die Realisierung des Updates erfolgt mit Hilfe einer Patchdatei (z.B. patch200.bat). Die Versionskontrolle (Vergleich der Versionen von ICdoc und Datenbank) wird **automatisch nach dem Starten von ICdoc** durchgeführt. Anstelle von ICdoc kann für die Versionskontrolle auch die Applikation **ICVerChk** verwendet werden. Diese Applikation verlangt im Gegensatz zu ICdoc nicht nach einem Paßwort und wurde für das unterstützende EDV-Personal zur Wartung und Pflege von ICdoc eingerichtet. Wenn Sie mit Administrator-Rechten auf Ihrem System angemeldet sind, sucht ICdoc die aktuelle Patchdatei. Aktivieren Sie das Patchprogramm mit dem **OK**-Button und warten Sie, bis der Patchjob beendet ist. Starten Sie ICdoc erneut, um fortzufahren.

Automatische Versionskontrolle beim Start von ICdoc

Nachdem ICdoc gestartet wurde, wird jedesmal die zugehörige Version der Datenbank überprüft. Wird eine Versionsdifferenz festgestellt, erscheint folgendes Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, die Datenbank auf den Versionsstand von ICdoc zu bringen:

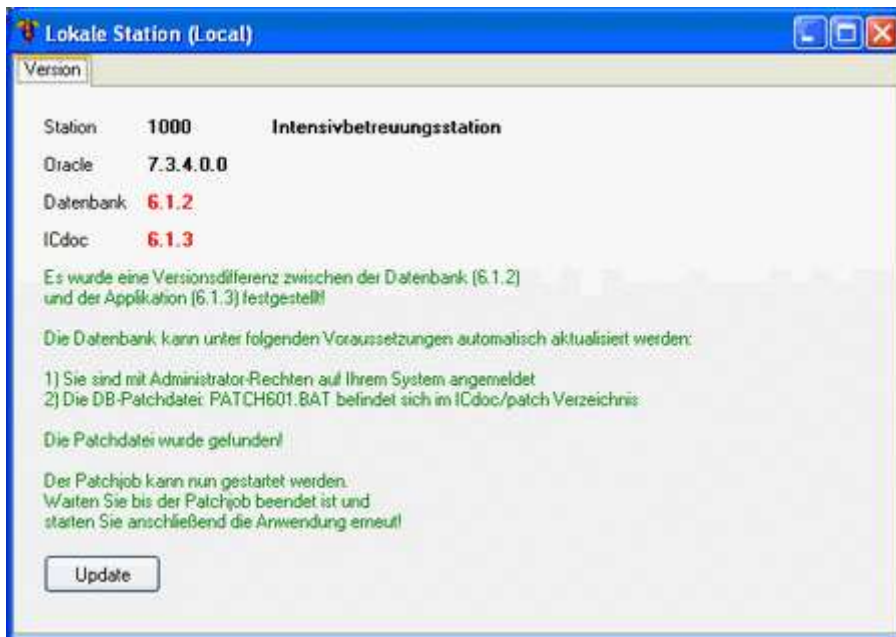


Achtung: Die Aktualisierung der Datenbank kann nur unter der Voraussetzung erfolgen, daß die neue ICdoc Version eine Folgeversion der Alten ist. Wurden eine oder mehrere Versionen übersprungen oder ist die Version der Datenbank neuer als die von ICdoc kann die Datenbank nicht automatisch aktualisiert werden. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreuer oder die Technische Hotline von ICdoc.

Bedienungsanleitung

Formulare und Dialoge:

- ◆ [A.I.S. Auswahl](#)
- ◆ [Anmelden](#)
- ◆ [ASDI Aufnahmegründe](#)
- ◆ [LKF Export](#)
- ◆ [Berichte](#)
- ◆ [Betten/Zeit Übersicht](#)
- ◆ [Bettenwechsel](#)
- ◆ [Diagramm](#)
- ◆ [Eingabeelemente](#)
- ◆ [Eingabeschirme](#)
- ◆ [Ernährung](#)
- ◆ [Externe Patientenliste](#)
- ◆ [Freier Export](#)
- ◆ [Gelöschte Patienten wieder herstellen](#)
- ◆ [ICD9 Katalog](#)
- ◆ [ICD10 Katalog](#)
- ◆ [ICdoc Manager](#)
- ◆ [Infektionen](#)
- ◆ [ASDI Benchmarking Export](#)
- ◆ [MEL Katalog](#)
- ◆ [Neuaufnahme](#)
- ◆ [Optionen](#)
- ◆ [Passwort ändern](#)
- ◆ [Sondermodule](#)
- ◆ [Stationskonfiguration](#)
- ◆ [Suche Diagnosen](#)
- ◆ [Suche Leistungen](#)
- ◆ [Suche Patienten](#)
- ◆ [Vollständiger Export](#)

A.I.S. Auswahl

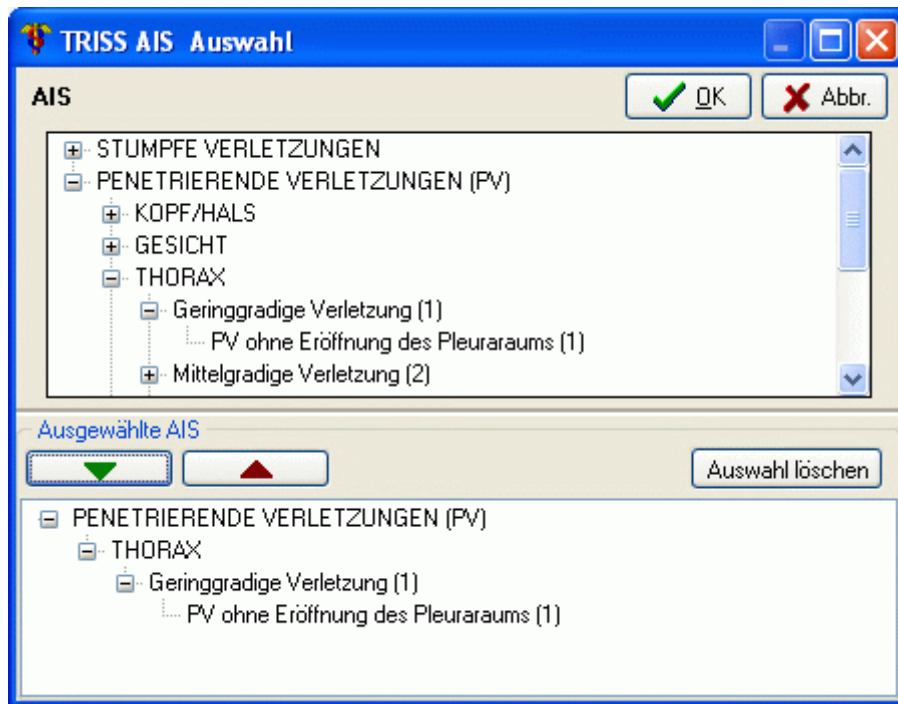

Dieser Schirm dient zur A.I.S.-Auswahl (Abbreviated Injury Scale). Er wird geöffnet, wenn Sie im TRISS-Schirm (Scores) den Button "A.I.S." drücken. Im oberen Fenster befindet sich die Liste der möglichen A.I.S. Einträge. Unten wird Ihre Auswahl angezeigt. Bei erstmaligem Zugriff auf diese Auswahl nach Neustart der Applikation *ICdoc* wird die Auswahlliste neu in den Speicher geladen. Dies kann je nach eingesetzter Hardware einige Sekunden dauern. Bei mehrfachem Aufruf dieser Auswahl entfällt die Wartezeit.

A.I.S. auswählen

Um einen Eintrag aus der A.I.S.-Liste auszuwählen, selektieren Sie einen Eintrag im oberen Fenster und drücken den Button mit dem roten, nach unten zeigenden Dreieck oberhalb des unteren Fensters. Sie können auch durch Doppelklicken einen Eintrag der untersten Ebene auswählen.

A.I.S. entfernen

Eine Auswahl kann folgendermaßen entfernt werden. Selektieren Sie den Eintrag im unteren Fenster, den Sie aus der Auswahl löschen wollen und drücken Sie den Button mit dem grünen, nach oben zeigenden Dreieck.

Alles löschen

Diesen Button drücken Sie, wenn Sie die gesamte Auswahl löschen wollen.

OK

Der OK Button übernimmt Ihre A.I.S.-Auswahl in das Feld *A.I.S.* im TRISS-Schirm und berechnet die Felder *Trauma*, *AIS maximum injury* und *ISS* neu.

Auswahlfenster der Bildschirmgröße anpassen

Das Auswahlfenster kann bei höherer Bildschirmauflösung der eingesetzten Hardware angepasst werden. Ziehen Sie dazu das rechte untere Eck des Fensters so lange nach außen, bis die von Ihnen gewünschte Größe erreicht ist.

Am unteren Ende der oberen Auswahlliste befindet sich eine Trennlinie (Horizontale Linie mit verstärkter Schattenzeichnung) Diese Linie kann mit der Maus angeklickt und nach oben oder unten verschoben werden.

Die Modifikationen am Erscheinungsbild des Auswahlfensters werden bei Verlassen des Fensters gespeichert. Bei mehrmaligem Aufruf dieses Auswahlfensters werden die Position und Größe beibehalten.

Anmelden



Mit Hilfe dieser Dialogbox melden Sie sich bei der ICdoc Datenbank an. Geben Sie bitte den Benutzernamen (Username) und Passwort (Password) ein. Der Standardbenutzername für ICdoc ist **"ICdoc"**. Dieser kann in dieser Version nicht geändert werden. Zur Änderung des Passwortes benutzen Sie bitte das Kommando "Passwort ändern" im Menü "System". Nach Eingabe des Passwortes drücken Sie auf den **OK**-Button.


Die Auswahl der Datenbank (Database) verweist nach durchgeführter Standardinstallation auf die lokal installierte Datenbank (Station). Bei Installationen, in denen die Datenbank auf einen anderen Rechner gelegt wurde (Serverinstallation) kann die Datenbankauswahl nachträglich angepaßt werden. Dazu muß die Datei **/ICdoc/DBalias.ini** auf **/ICdoc/UsrDBalias.ini** kopiert werden. Die Datei **/ICdoc/UsrDBalias.ini** wird in weiterer Folge an die Netzwerkinstallation angepaßt. Diese Anpassung ist gemeinsam mit unserer telefonischen Hotline durchzuführen und zu überprüfen.

Windows NT

Unter Windows NT wird die Oracle-Datenbank bereits beim Hochfahren des Rechners als Hintergrundprozeß gestartet.

Zum Zeitpunkt des Applikationsstarts von ICdoc müssen alle Oracle-spezifischen Hintergrundprozesse bereits gestartet sein. Da Windows NT die Anmeldung eines Users bereits wesentlich früher zuläßt, kann der automatische Start von ICdoc (über Eintrag eines Verweises auf ICdoc.exe im Autostart-Verzeichnis) nicht empfohlen werden. Starten Sie bitte ICdoc nach dem Anmelden Ihres NT-Users von Hand.

ASDI Aufnahmegründe

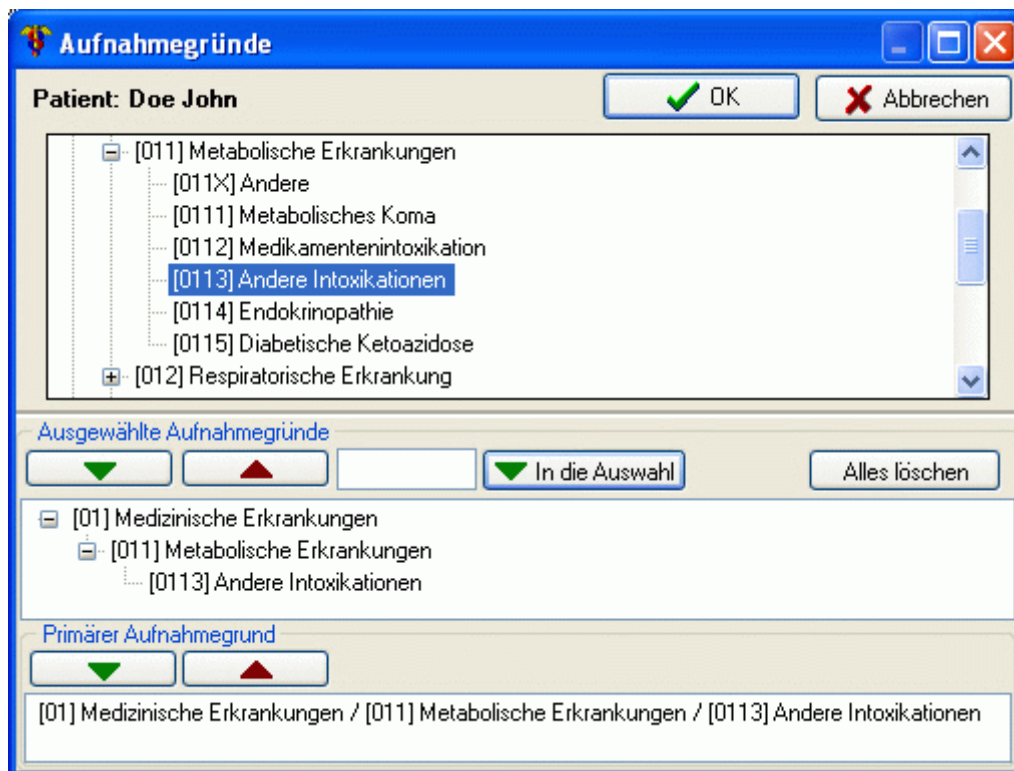

Dieser Schirm dient zur Auswahl der ASDI Aufnahmegründe. Er wird geöffnet, wenn Sie im Aufnahmeschirm den Button "Aufnahmegründe modifizieren" drücken. Im obersten Fenster befinden sich alle auswählbaren Aufnahmegründe. Das mittlere Fenster beinhaltet die ausgewählten Aufnahmegründe und das unterste Fenster den primären Aufnahmegrund. Bei erstmaligem Zugriff auf diese Auswahl nach Neustart der Applikation ICdoc wird die Auswahlliste neu in den Speicher geladen. Dies kann je nach eingesetzter Hardware einige Sekunden dauern. Bei mehrfachem Aufruf dieser Auswahl entfällt die Wartezeit.

Aufnahmegründe auswählen

Um einen Aufnahmegrund auszuwählen, selektieren Sie einen ASDI Aufnahmegrund im obersten Fenster und drücken Sie den Button mit dem roten, nach unten zeigenden Dreieck oberhalb des mittleren Fensters. Die Auswahl des primären Aufnahmegrundes erfolgt nach dem selben Prinzip mit dem Unterschied, daß ein Aufnahmegrund im mittleren Fenster ausgewählt wird und der Button oberhalb des untersten Fensters gedrückt wird. Auf unterster Ebene der hierarchischen Darstellung der Aufnahmegründe ist die Übernahme des Aufnahmegrundes auch durch Doppelklick möglich.

In die Auswahl

Eine weitere Möglichkeit einen Aufnahmegrund in die Auswahl zu übernehmen besteht darin, die Zahl, die vor dem Aufnahmegrund steht, in das Editierfeld in der Mitte des Schirms einzugeben und den Button "In die Auswahl" zu drücken.

Aufnahmegründe entfernen

Eine Auswahl kann folgendermaßen entfernt werden. Selektieren Sie den Aufnahmegrund im mittleren Fenster, die Sie aus der Auswahl löschen wollen und drücken Sie den Button mit dem grünen, nach oben zeigenden Dreieck. Das Entfernen des primären Aufnahmegrundes erfolgt analog.

Alles löschen

Diesen Button drücken Sie, wenn Sie die gesamte Auswahl und den primären Aufnahmegrund löschen wollen.

OK

Der OK Button übernimmt die ausgewählten Aufnahmegründe in das Feld Aufnahmegründe im Aufnahmeschirm und kennzeichnet den primären Aufnahmegrund durch fette Schrift.

Auswahlfenster der Bildschirmgröße anpassen

Das Auswahlfenster kann bei höherer Bildschirmauflösung der eingesetzten Hardware angepaßt werden. Ziehen Sie dazu das rechte untere Eck des Fensters so lange nach außen, bis die von Ihnen gewünschte Größe erreicht ist.

Am unteren Ende der oberen Auswahlliste befindet sich eine Trennlinie (horizontale Linie mit verstärkter Schattenzeichnung). Diese Linie kann mit der Maus angeklickt und nach oben oder unten verschoben werden.

Die Modifikationen am Erscheinungsbild des Auswahlfensters werden bei Verlassen des Fensters gespeichert. Bei mehrmaligem Aufruf dieses Auswahlfensters werden die Position und Größe beibehalten.

LKF Export

Der LKF Export erstellt Exportdateien für das **Bundesministerium für Gesundheit**.

Für Patienten, die im Jahr 1998 aus der Station entlassen wurden, gilt das Modell: "Datensatz intensiv BMAGS 1998" mit spezifischer Stationsauswertung bezüglich neonatologisch ausgerichteter Stationen. Für alle Patienten, die nach dem 31.12.1998 entlassen wurden, gilt das Modell: "BMGF 2003". Für alle Patienten, die nach dem 31.12.2003 entlassen wurden, gilt das Modell: "BMGF 2004+". Für alle Patienten, die nach dem 31.12.2011 entlassen wurden, gilt das Modell: "LKF 2012". Ab dieser Version werden in Abhängigkeit des **Patiententypus** die spezifischen Patientenparameter übertragen. Das Modell wird automatisch aufgrund der Datumsgrenzen ausgewählt.

Aufrufsperrung bei fehlender Krankenhausidentifikation

Der LKF-Export kann nur gestartet werden, wenn die Krankenhausidentifikation vollständig in der [Stationskonfiguration](#) eingetragen wurde. Die Krankenhausidentifikation besteht aus den Feldern *KA-Nummer*, *Funktionscode: Intensivstation* und *Funktionscode: Subcode*.

Aktuelles Monat inkludieren

Sofern das aktuelle Monat im gewählten Zeitraum vorkommt, kann auch dieses bei der Erstellung des Exports inkludiert werden. Normalerweise werden nur bereits abgeschlossene Monate exportiert.

Datumsgrenzen

Das Zeitintervall kann nur über die Zeit-Shortcuts ausgewählt werden. Nicht abgeschlossene Intervalle (z.B. laufendes Monat) können nicht ausgewählt werden.

Auswahl

Sie können wählen, ob nur die im ausgewählten Zeitraum aus der Station entlassenen Patienten erportiert werden sollen, oder ob zusätzlich noch Patienten mit einem Spitalsentlassungsdatum im ausgewählten Zeitraum ebenfalls exportiert werden sollen.

Datei

Der Dateiname wird automatisch aufgrund der Datumsgrenzen erstellt.

Pfad

Geben Sie den Pfad an wohin ICdoc die Exportdatei speichern soll. Der Browser hilft Ihnen dabei.

Export

Der Button **Export** startet den BMGF-Export.

Auswahlbereich der zu exportierenden Patientendaten

Die Datumsgrenzen definieren den Zeitraum, im dem die zu exportierenden Patienten das Krankenhaus verlassen haben. Für diese Patienten werden sämtliche für das Bundesministerium relevanten Daten exportiert. Bei Mehrfachaufnahmen in der Station werden sämtliche Aufenthalte protokolliert.

Zu diesem Zweck muß das Entlassungsdatum aus dem Spital nach Verfügbarkeit im Entlassungsschirm nachgetragen werden.

Berichte

Mit diesem Dialog erstellen Sie druckbare Berichte.

Patient

Hier finden Sie Berichte, die sich auf einen Stationsaufenthalt beziehen. Wenn Sie gerade einen Patienten bearbeiten, dessen Daten Sie drucken wollen, so drücken Sie den Knopf: **aktuellen Patienten übernehmen**. Wollen Sie die Daten eines anderen Patienten drucken, so drücken Sie den **Suchen**-Button. Nachdem Sie einen Patienten gewählt haben, müssen Sie einen Bericht aus der Liste der verfügbaren Berichte auswählen. Anschließend drücken Sie den Button **Bericht erstellen**. Es wird der Report Manager gestartet und der Bericht erstellt. Das kann - je nach Rechner und Bericht - bis zu einigen Minuten dauern.

In Abhängigkeit vom Patiententypus (Kinder, Erwachsene,...) kann die Auswahl der zur Verfügung stehenden Berichte variieren.

Station

Hier finden Sie Stations-bezogenen Auswertungen. Anstatt eines Patienten müssen Sie nun einen Zeitraum eingeben, anschließend wählen Sie einen Bericht aus der Liste und drücken **Bericht erstellen**.

Patientenzuordnung

Bei ausgewählten Berichten besteht die Möglichkeit, das Kollektiv der ausgewählten Patienten/Stationsaufenthalte auf bestimmte Patientengruppen zu beschränken. Dazu ist es

erforderlich, dass jeder Patient bei der Stationsaufnahme einer Gruppe zugeordnet wird. Zu diesem Zweck gibt es ein Eingabefeld gleichen Namens im Aufnahmeschirm.

Bettenliste



Graphische Darstellung der vorhandenen Betten und der aktuell aufgenommenen Patienten. Pro Bett finden Sie den Namen des Patienten, die Bettenbezeichnung und den Pflegetag (Beginnend bei 0). Achtung: Da an einem Tag pro Bett mehrere Patienten aufgenommen und entlassen werden können, kann ein Bett mehrmals angezeigt werden!

Um das Datum zu wechseln, können Sie

- das Datum in das Editierfeld eingeben,
- mit den Pfeilen einen Tag vor oder zurückspringen,
- einen Tag mit Hilfe der Kalenderbuttons auswählen oder
- durch Doppelklicken des Editierfeldes auf das aktuelle Datum springen.

Um die Daten eines bestimmten Patienten bearbeiten zu können, wählen Sie den entsprechenden Patienten auf der Bettenliste aus und

- drücken Sie auf den Daten - Button,
- doppelklicken Sie auf den Patientennamen oder
- siehe *rechte Maustaste*

Schließen

Schließt die Bettenliste.

Alle Betten

Zeigt alle Betten (inklusive Reservebetten) an.

Mit Patientenkartei verknüpfen

Ist diese Option ausgewählt, dann wird das Datum bei Änderung in der Patientenkartei auch in die Bettenliste übernommen. Für ein schnelleres Arbeiten in der Patientenkartei schalten Sie diese Option aus.

Mit Aufnahme/Entlassung

Ist diese Option gewählt, wird am Aufnahme-/Entlassungstag der jeweilige Text anstelle des Pflegetags angezeigt.

Auffrischen

Das Aktualisieren der Anzeige erfolgt durch Drücken des Buttons links neben dem Datum. ICdoc frisst die Bettenliste bei jeder, den angezeigten Tag betreffenden Modifikation selbständig auf. Dieser Button findet nur in der Client-Server Variante von ICdoc Anwendung und kann im Normalfall ignoriert werden.

Rechte Maustaste

Doe2 John
Aufnahme
Physiologie
Dekurs
MEL Intensiv
Ernährung
Infektion Übersicht
Infektion
Drainagen
Katheter
Scores Übersicht
Score: TRISS
Score: SAPS II
Score: SAPS 3
Score: APACHE II
Score: LOD
Score: TISS-28
Entlassung
ICD10 Katalog
MEL Katalog
Leistung kum.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Patientennamen. Es erscheint ein Menü, mit dem Sie bestimmen können, welcher Schirm geöffnet werden soll.

Betten/Zeit Übersicht



Die Betten/Zeit Übersicht dient zur überblicksmäßigen Darstellung der Bettenbelegung. Das Fenster ist in zwei Teile gegliedert. Im oberen Teil befindet sich ein Betten/Zeit Raster. Die Belegung der Betten wird durch Balken symbolisiert. Der untere Teil beinhaltet eine Kurzinformation über den einem Balken zugeordneten Patienten.

Betten/Zeit Raster

Der dargestellte Zeitraum läßt sich mit den Pfeilen und der Kalenderfunktion oben rechts verändern. Es ist nur möglich den Zeitraum bis zum aktuellen Datum (rot) zu wählen.

Alle Betten

Zeigt alle Betten (inklusive Reservebetten) an.

Raster

Hier wird bestimmt, welcher Zeitraum (*Tag*, *Woche* oder *Monat*) einer Spalte im Betten/Zeit Raster zugeordnet werden soll.

Balken

Ein Balken stellt die Belegung eines Bettes dar. Wird ein Balken ausgewählt (anklicken mit der Maus), so erscheint im unteren Teil des Fensters eine Kurzinformation über den Patienten, der diesem Balken zugeordnet ist. Es werden weiters alle anderen Balken markiert, die im Zusammenhang mit diesem Patienten stehen. Wechselt ein Patient das Bett, so sind das Ende des Balken im alten Bett und der Anfang des Balken im neuen Bett mit einem *w* gekennzeichnet. Ein kleines Dreieck am Beginn bzw. am Ende eines Balken bedeutet, daß dieser über den sichtbaren Zeitraum hinausgeht. Existiert eine Überlappung von Balken (Fehlerfall bei mehrfacher Bettenbelegung im gleichen Zeitintervall), so werden die Balken vertikal versetzt dargestellt. Wird die Anzahl von drei überlappenden Balken überschritten, dann nehmen die weiteren Balken die vertikale Position des dritten Balken ein.

Kurzinformation

Hier werden *Aufnahmezeitpunkt*, *Entlassungszeitpunkt*, *Tage*, der *Name*, *Patient ID* und *KH-Aufnahmezahl* des Patienten angezeigt, der dem markierten Balken zugeordnet ist.


Neu Zeichnen

Aktualisiert das Fenster. Diese Funktion ist notwendig, um Änderungen in der Datenbank, die die Betten/Zeit Übersicht betreffen, sichtbar zu machen.

Auswahl übernehmen

Diese Funktion öffnet die Aufnahme in der Patientenverwaltung mit dem Patienten, dessen Balken im Betten/Zeit Raster markiert sind. Ausgelöst werden kann diese Funktion entweder durch den Button oder durch Doppelklicken auf einen Balken.

Rechte Maustaste

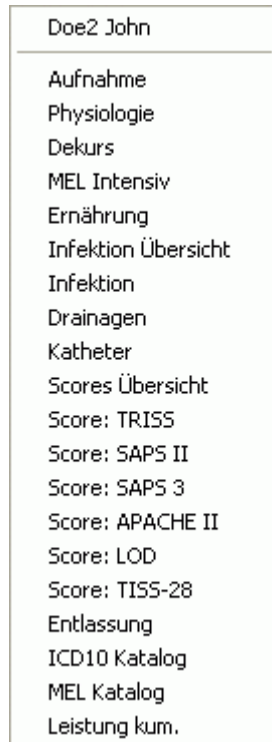

Klicken Sie zuerst mit der linken dann mit der rechten Maustaste auf einen Balken. Es erscheint ein Menü mit dem Sie bestimmen können zu welchem Schirm der Patientenverwaltung gewechselt werden soll.

Fenster der Bildschirmgröße anpassen

Das Fenster der Betten-/Zeitübersicht kann bei höherer Bildschirmauflösung der eingesetzten Hardware angepaßt werden. Ziehen Sie dazu das rechte untere Eck des Fensters so lange nach aussen, bis die von Ihnen gewünschte Größe erreicht ist.

Am unteren Ende des grafischen Anzeigebereiches befindet sich eine Trennlinie (Horizontale Linie mit verstärkter Schattenzeichnung) Diese Linie kann mit der Maus angeklickt und nach oben oder unten verschoben werden.

Die Modifikationen am Erscheinungsbild des Fensters werden bei Verlassen des Fensters gespeichert. Bei mehrmaligem Aufruf dieses Fensters werden die Position und Größe beibehalten.

Schließen

Schließt die Betten/Zeit Übersicht.

Bettenwechsel

Bettentransfer

Patient

Familienname: Doe2

Vorname: John

Patienten ID:

KH-Aufnahmezahl: 0755015931

Transfer

Datum: 16.03.2007

von Bett: Bett4 in Bett: Bett5

Bett (ganztägig) belegt von

Familienname:

Vorname:

Patienten ID:

KH-Aufnahmezahl:

Dieser Schirm dient zum Wechseln des Bettes eines Patienten.

Patient

Familienname, Vorname, Patient ID und KH-Aufnahmezahl des Patienten für den ein Bettenwechsel vorgenommen werden soll. Diese Felder sind nicht editierbar. Beim Öffnen dieses Dialoges wird automatisch der Patient übernommen, der gerade bearbeitet wird.

Wechsel

Parameter für den Bettenwechsel. Das Datum wird von der Patientenbearbeitung übernommen und ist nicht editierbar. Weiters wird das Bett angezeigt, in dem sich der Patient vor dem Wechsel befindet. In dem Feld *in Bett* kann ein Bett für den Wechsel ausgewählt werden.

Bett belegt von

Daten des Patienten, der sich in dem Bett befindet, das für den Bettenwechsel bestimmt wurde (Feld *in Bett*). Sind diese Felder leer, so ist zum Zeitpunkt des Wechsels kein Patient in diesem Bett. Ein Bett gilt auch als leer für den Wechsel, wenn am angegebenen Tag aus diesem Bett ein Patient entlassen wurde und noch keine Neuaufnahme bzw. Wechsel aus einem anderen Bett stattgefunden hat.

Tauschen von Patienten

Ist das für den Bettenwechsel bestimmte Bett zum Zeitpunkt des Wechsels belegt, so werden die Patienten getauscht. Das heißt, der Patient der das Bett belegt, wird in das frei werdende Bett verlegt.

Diagramm

[Auswahl](#)

[Ansicht](#)

[Optionen](#)

Diagramm (Auswahl)

Diagramme

Patient Station

Von 01.01.2014 Bis 31.10.2014

Monat -

Quartal -

Halbjahr -

Jahr 2014 (akt.)

Diagramm

- Scores
 - SAPS II: pred. v. obs. hosp. mort. (Risikogr.)
 - SAPS II: pred. v. obs. hosp. mort. (Kategorien)
 - SAPS II vs. APACHE II (pred. mort.)
 - SOFA: pred. v. obs. ICU mort. (Risikogr.)
 - SOFA: pred. v. obs. ICU mort. (Kategorien)
 - TISS 28 tägl. (Durchschn. pro Pat.) m. Standardabw.
 - TISS 28 kumulativ / Tag
 - Pflegetage vs. SAPS II (nach 24h)
 - Pflegetage vs. SAPS II (pred. mort.)

Auswahl SAPS II: pred. v. obs. hosp. mort. (Risikogr.)

Diagramm erstellen

Patientenzuordnung

Alle ☐

- ☒ Postoperativ
- ☒ Medizinisch
- ☒ ICU
- ☐ AWR (ohne LKF Abrechnung)
- ☐ Alternative 1
- ☐ Alternative 2
- ☐ Alternative 3
- ☐ Alternative 4
- ☐ Alternative 5

Mit diesem Dialog erstellen Sie konfigurierbare, druckbare Diagramme.

Patient

Hier finden Sie Patienten-bezogene Diagramme. Wenn Sie gerade einen Patienten bearbeiten, dessen Daten Sie auswerten wollen, so drücken Sie den Knopf: **aktuellen Patienten übernehmen**. Wollen Sie die Daten eines anderen Patienten darstellen, so drücken Sie den **Suchen**-Button. Nachdem Sie einen Patienten gewählt haben, müssen Sie ein Diagramm aus der Liste der verfügbaren Diagramme auswählen (anklicken). Anschließend drücken Sie den Button **Diagramm erstellen**. Sie können ein Diagramm auch durch Doppelklicken einer Diagrammform aus der Liste erstellen.

In Abhängigkeit vom Patiententypus kann die Auswahl der zur Verfügung stehenden Diagramme variieren.

Station


Hier finden Sie Stations-bezogene Auswertungen. Anstatt eines Patienten müssen Sie nun einen Zeitraum eingeben, anschließend wählen Sie eine Diagramm aus der Liste und drücken **Diagramm erstellen**.

Patientenzuordnung

Bei ausgewählten Diagrammen besteht die Möglichkeit, das Kollektiv der ausgewählten Patienten/Stationsaufenthalte auf bestimmte Patientengruppen zu beschränken. Dazu ist es

erforderlich, dass jeder Patient bei der Stationsaufnahme einer Gruppe zugeordnet wird. Zu diesem Zweck gibt es ein Eingabefeld gleichen Namens im Aufnahmeschirm.

Diagramm (Ansicht)

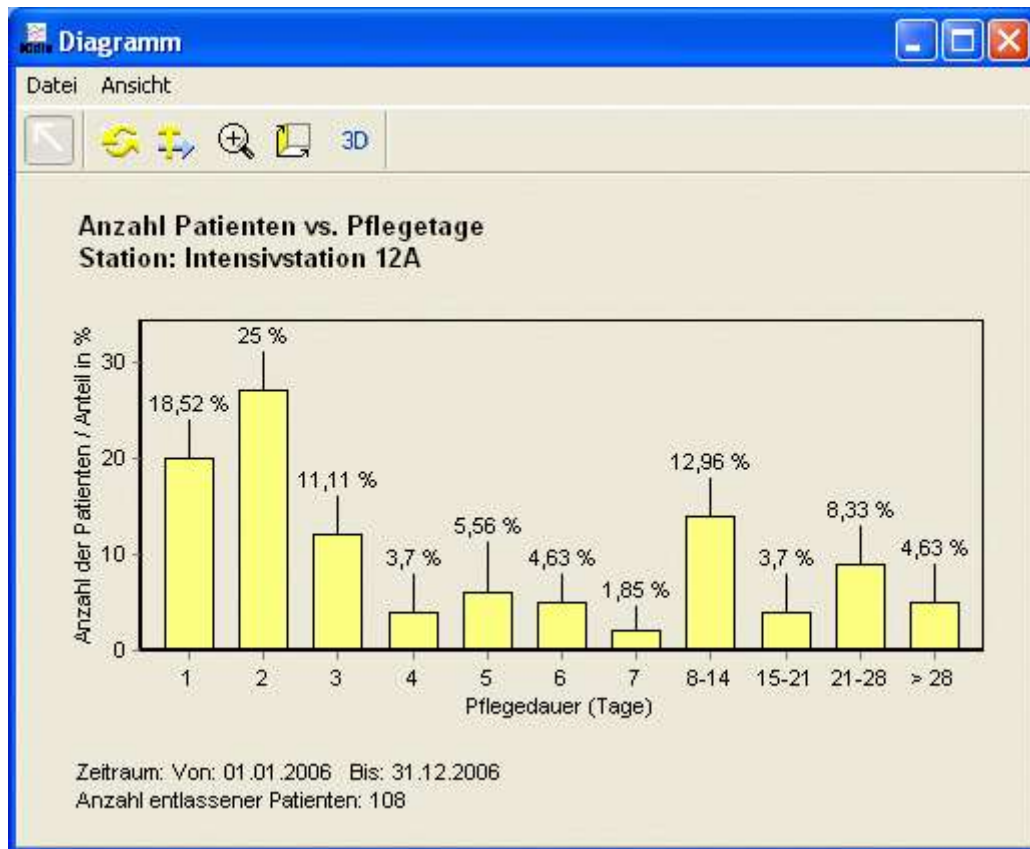

Dieser Schirm dient zur Darstellung von Diagrammen. Innerhalb eines Diagramms können entweder ein oder mehrere Graphen verschiedenster Art vorhanden sein.

Zoomen

Sie können einen Ausschnitt des Diagramms **vergrößern** indem Sie mit der Maus einen Positionsrahmen über den gewünschten Bereich ziehen. Positionieren Sie den Mauscursor auf dem linken oberen Eck des gewünschten Ausschnittes und drücken Sie die linke Maustaste (Taste in unterer Stellung lassen). Bewegen Sie die Maus zum rechten unteren Eck des Bereiches und lassen Sie die linke Maustaste wieder los. Der so definierte Rahmen wird nun formatfüllend dargestellt.

Verschieben

Um den sichtbaren Ausschnitt des Diagramms zu verschieben, positionieren Sie den Mauscursor (Schwarzer Pfeil) über der Darstellung, drücken die rechte Maustaste (Taste in unterer Stellung lassen), bewegen die Maus bis der gewünschte Bereich sichtbar ist und lassen die Taste wieder los.

Originalansicht herstellen

Wollen Sie nach einem Zoomvorgang oder Verschieben die Ansicht wieder in den Anfangszustand bringen, drücken Sie die linke Maustaste, nachdem Sie die Maus über der Diagrammdarstellung positioniert haben, bewegen die Maus ein Stück nach links oben und lassen die Taste wieder los.

Datei

Einstellungen speichern

Speichert die für diese Diagrammart eingestellten Optionen.

Originale Einstellungen herstellen

Stellt das Diagramm in den vom Hersteller ausgelieferten Optionen dar.

Seite einrichten

Öffnet einen Dialog zum Einrichten der Seite für den Druck. Stellen Sie in diesem Dialog die Breite der Ränder, die frei bleiben sollen, ein. Wählen Sie für die Kopf- und Fußzeile allfällige Zusatzinformationen aus und bestimmen Sie, ob im Hoch- oder Querformat gedruckt werden soll.

Drucken

Es erscheint ein Dialog für das Einrichten des Druckers. Der *Ok*-Button startet das Drucken des Diagramms.

Schließen

Schließt das Fenster.


Ansicht

Optionen

Öffnet den für die Einstellung des Diagramms bestimmten Dialog.

Ein Dialog zum Einstellen der Optionen für das **Diagramm** kann entweder durch den Menüpunkt *Ansicht/Optionen* oder durch Doppelklicken des Diagramms geöffnet werden. Um Änderungen in der Darstellung der einzelnen **Graphen** durchzuführen, doppelklicken Sie den Graphen, den Sie bearbeiten wollen.


Farblegende

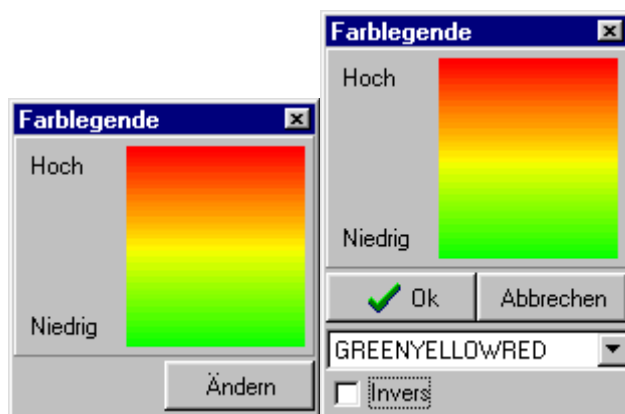

Sind Graphen farbkodiert, erscheint beim Öffnen des Diagramms ein weiteres Fenster (die *Farblegende*). Darin sind die Farben für den Verlauf von niedrigen bis zu hohen Werten dargestellt. Der Button "*Ändern*", vergrößert die Farblegende und es erscheint ein Feld in dem Sie die Farbpalette auswählen können. Sie können weiters bestimmen welche Farben einer Palette für hohe und welche für niedrige Werte stehen (Checkbox *Invers*). Um die Farblegende mit dem Diagramm zu drucken, wählen Sie den Menüpunkt *Datei/Seite einrichten* und selektieren Sie Farblegende in einer der vier Positionen für die Kopf- oder Fußzeile.

Farbkodierte Graphen sollten nur auf Bildschirmen mit einer Farbkodierung von mehr als 256 Farben (Highcolor oder Truecolor) verwendet werden, da die Anzahl der darstellbaren Farben die Auflösung der farbcodierten Werte bestimmt.

Diagramm (Optionen)

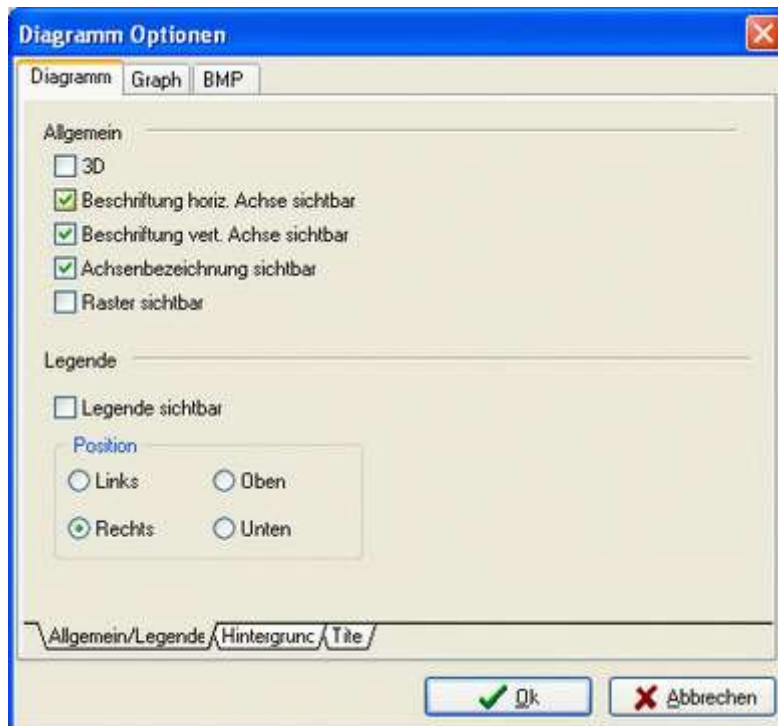

Dieser Schirm dient zum Einstellen von Optionen für ein Diagramm.

Allgemein/Legende


Hier können Sie das Erscheinungsbild der Achsen, 3D-Darstellung und Position und Sichtbarkeit der Legende einstellen.

Hintergrund

Dieser Schirm bietet Ihnen die Möglichkeit das Aussehen des Hintergrundes zu verändern. Sie können ihn einfarbig oder mit einem Farbverlauf gestalten. Weiters besteht die Option ein Hintergrundbild einzufügen. In der Auswahl der Hintergrundbilder erscheinen die Namen aller Bitmaps (.bmp Files) die sich im Verzeichnis von *ICdoc* befinden. Wollen Sie ein eigenes Bild als Hintergrund verwenden, so kopieren Sie es (nur in Form eines Bitmapfiles) vor dem Öffnen dieses Dialoges in Ihren *ICdoc*-Ordner.

Titel

Für das Editieren und das Formatieren der Texte des Diagramms wählen Sie diesen Schirm.

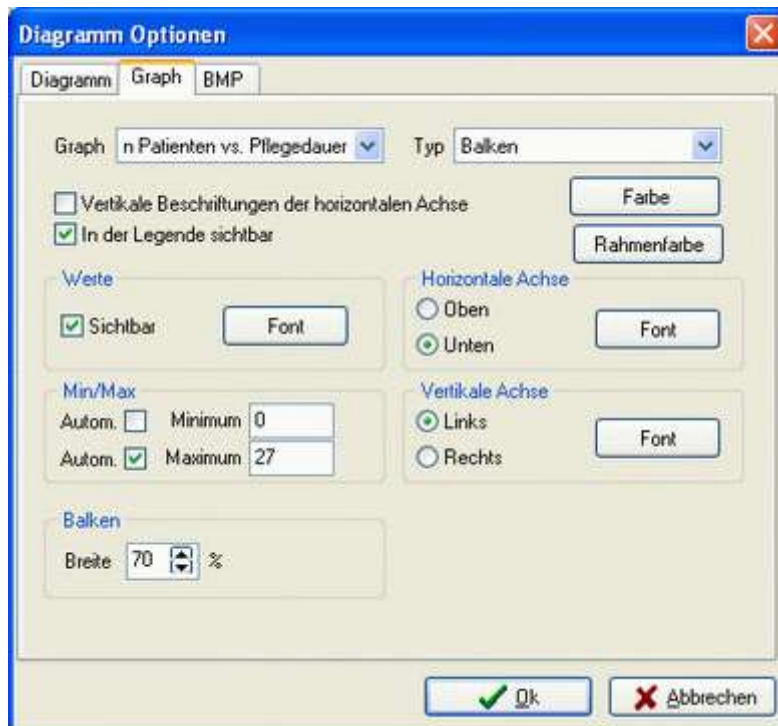

Dieser Schirm dient zum Einstellen von Optionen für einzelne Graphen.

Graph

Wählen Sie in dieser Liste den zu bearbeitenden Graphen aus.

Typ

Sie können den Darstellungstyp nur ändern, wenn es sich um Punkt- Linien oder Balkengraphen handelt. Weiters können Sie als neuen Typ nur wieder einen dieser Typen wählen.

Eingabeelemente

Eingabeelemente

[Textfeld](#)

[Numerisches Eingabefeld](#)

[Datumsfeld](#)

[Datum-Zeitfeld](#)

[Combobox; Einfache Auswahl](#)

[Checkbox](#)

[Mehrfach-Checkbox; Mehrfache Auswahl](#)

[Hierarchische Auswahlliste](#)

Aktivieren

Siehe Einzelbeschreibungen der Eingabeelemente.

Es kann immer nur ein Element aktiv sein.

Tabreihenfolge

Eine Möglichkeit ein Eingabeelement zu aktivieren besteht darin, mit der Maus auf das gewünschte Element zu klicken. Weiters können Sie mit der Tabulatortaste von einem Eingabeelement zum nächsten springen. Welches Element dabei wann aktiviert wird bestimmt die Tabreihenfolge.

Die Tasten <Tab> bzw. <Bild hinauf> aktivieren das Eingabeelement, das in der Tabreihenfolge nach dem aktiven Feld liegt.

Die Tastenkombination <Shift>-<Tab> oder die Taste <Bild hinunter> aktiviert das Eingabeelement, das in der Tabreihenfolge vor dem aktiven Feld liegt.

Nur Anzeige

Wird ein Eingabeelement nur zum Anzeigen von Werten verwendet, so wird die Schrift mit einem grauen Hintergrund versehen. Es kann bei diesen Feldern der angezeigte Wert nicht verändert werden.

Hilfe

Drücken Sie die Taste F1 und Sie erhalten die Hilfe des aktiven Eingabeelementes.

Textfeld

Beispiel

Vorname

Das Textfeld dient zur Eingabe von Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen.

Bedienung

Aktivieren Sie das Feld und geben Sie den gewünschten Text ein.

Aktivieren

Das Textfeld ist aktiviert, wenn sich der Eingabecursor im umrahmten Teil des Feldes befindet oder der Inhalt markiert ist.

Numerisches Eingabefeld

Beispiel

Bilirubin mg/dL

Das numerische Eingabefeld dient zur Eingabe von ganzen Zahlen oder Zahlen mit Nachkommastellen.

Bedienung

Aktivieren Sie das Feld und geben Sie die gewünschte Zahl ein.

Aktivieren

Das numerische Eingabefeld ist aktiviert, wenn sich der Eingabecursor im umrahmten Teil des Feldes befindet oder der Inhalt markiert ist.

Datumsfeld

Beispiel

Geburtsdatum

Das Datumsfeld dient zur Eingabe von einem Datum.

Bedienung

Aktivieren Sie das Feld und geben Sie das gewünschte Datum ein.
Durch Doppelklicken auf ein Datumsfeld erscheint das aktuelle Datum.

Aktivieren

Das Datumsfeld ist aktiviert, wenn sich der Eingabecursor im umrahmten Teil des Feldes befindet oder der Inhalt markiert ist.

Format

TT.MM.JJJJ (Tag, Monat, Jahr)

Datum-Zeitfeld

Beispiel

Entlassungszeitpunkt

Das Datum-Zeitfeld dient zur Eingabe eines Zeitpunktes.

Bedienung

Aktivieren Sie das Feld und geben Sie den gewünschten Zeitpunkt ein.
Durch Doppelklicken auf ein Datum-Zeitfeld erscheint der aktuelle Zeitpunkt.

Aktivieren

Das Datum-Zeitfeld ist aktiviert, wenn sich der Eingabecursor im umrahmten Teil des Feldes befindet oder der Inhalt markiert ist.

Format

TT.MM.JJJJ HH:MI (Tag, Monat, Jahr, Stunde, Minute)

Combobox; Einfache Auswahl

Beispiel

Atemwegszugang

- Kein Zugang
- O2Maske od. Brille
- Strenge Maske
- Tubus**
- Kanüle

Die Combobox dient zur einfachen Auswahl eines Textes einer vorgefertigten Liste.

Bedienung

Klicken Sie mit der Maus auf den Button mit dem Dreieck. Es erscheint eine Liste von Auswahlmöglichkeiten. Klicken Sie auf den gewünschten Text. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Combobox zu aktivieren und dann mit den Cursortasten mit den Pfeilen nach unten bzw. nach rechts zum nächsten Text in der Liste zu springen oder mit den Cursortasten mit den Pfeilen nach oben bzw. nach links zum vorhergehenden Text zu wechseln.

Aktivieren

Die Combobox ist aktiviert, wenn der Inhalt markiert ist.

Checkbox

Beispiel

☒ Reanimation

Die Checkbox dient zur Eingabe von Ja/Nein-Werten.

Bedienung

Klicken Sie mit der Maus auf das Feld um dessen Wert zu ändern. Ein weiterer Weg um den Wert einer Checkbox zu ändern ist sie zu aktivieren und dann die Leertaste zu drücken.


Aktivieren

Die Checkbox ist aktiviert, wenn der Text durch Punkte eingerahmt ist (siehe Beispiel).

Mehrfach-Checkbox; Mehrfache Auswahl

Beispiel

Coexistierende Erkrankungen

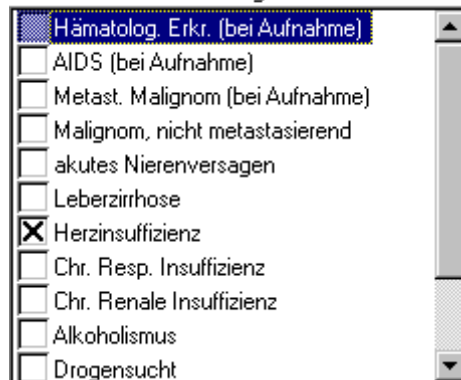

A screenshot of a software window titled 'Coexistierende Erkrankungen'. It contains a list of medical conditions, each preceded by a checkbox. The first item, 'Hämatolog. Erkr. (bei Aufnahme)', is selected and highlighted in blue. The other items are: 'AIDS (bei Aufnahme)', 'Metast. Malignom (bei Aufnahme)', 'Malignom, nicht metastasierend', 'akutes Nierenversagen', 'Leberzirrhose', 'Herzinsuffizienz' (which has an 'X' in its checkbox), 'Chr. Resp. Insuffizienz', 'Chr. Renale Insuffizienz', 'Alkoholismus', and 'Drogensucht'. A vertical scrollbar is on the right side of the list.

- ☒ Hämatolog. Erkr. (bei Aufnahme)
- ☐ AIDS (bei Aufnahme)
- ☐ Metast. Malignom (bei Aufnahme)
- ☐ Malignom, nicht metastasierend
- ☐ akutes Nierenversagen
- ☐ Leberzirrhose
- ☒ Herzinsuffizienz
- ☐ Chr. Resp. Insuffizienz
- ☐ Chr. Renale Insuffizienz
- ☐ Alkoholismus
- ☐ Drogensucht

Die Mehrfach-Checkbox dient zur mehrfachen Auswahl von Texten einer vorgefertigten Liste.

Bedienung

Klicken Sie mit der Maus auf einen Text um ihn in die Auswahl aufzunehmen bzw. aus der Auswahl zu entfernen. Verwenden Sie den Scrollbalken am rechten Rand der Mehrfach-Checkbox, wenn der gewünschte Text nicht sichtbar ist. Ein weiterer Weg um Texte einer Mehrfach-Checkbox auszuwählen ist diese zuerst zu aktivieren, den gewünschten Text mit Hilfe der Cursortasten (nach oben und nach unten) zu selektieren und ihn mit der Leertaste in die Auswahl aufnehmen bzw. aus der Auswahl zu entfernen.


Aktivieren

Die Mehrfach-Checkbox ist aktiviert, wenn ein Text selektiert ist.

Hierarchische Auswahlliste

Hierarchische Auswahllisten bestehen aus einer nicht editierbaren Anzeige der Auswahl und einem Button, der einen Schirm für das Editieren öffnet.

Beispiel

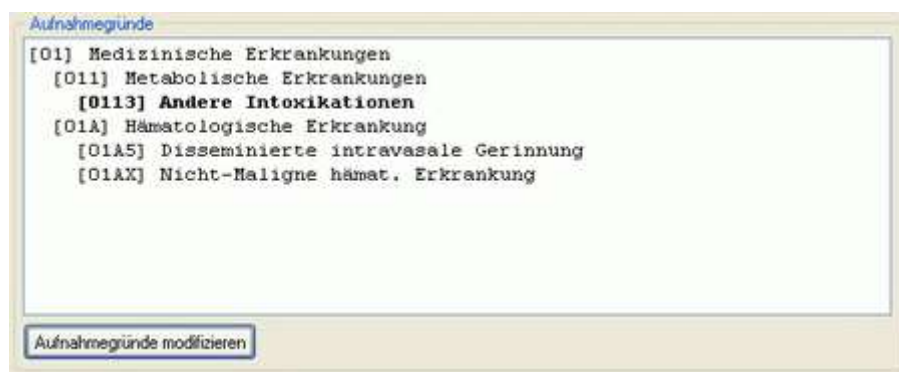

A screenshot of a software window titled 'Aufnahmegründe'. It displays a hierarchical list of medical reasons for admission. The list is structured with brackets indicating levels: '[01] Medizinische Erkrankungen', '[011] Metabolische Erkrankungen', '[0113] Andere Intoxikationen', '[01A] Hämatologische Erkrankung', '[01A5] Disseminierte intravasale Gerinnung', and '[01AX] Nicht-Maligne hämat. Erkrankung'. At the bottom of the window is a button labeled 'Aufnahmegründe modifizieren'.

- [01] Medizinische Erkrankungen
 - [011] Metabolische Erkrankungen
 - [0113] Andere Intoxikationen
 - [01A] Hämatologische Erkrankung
 - [01A5] Disseminierte intravasale Gerinnung
 - [01AX] Nicht-Maligne hämat. Erkrankung

Aufnahmegründe modifizieren

Hierarchische Auswahllisten

[A.I.S. Auswahl](#)

[ASDI Aufnahmegründe](#)

[Diagnosen ICD9](#)

[Diagnosen ICD10](#)

[Katalogisierte Leistungen](#)

Eingabeschirme

Icdoc Manager (Test i1050.pc1a) Benutzer: icdoc

Patientenverwaltung Ansicht Schnittstellen Auswertungen System Fenster Hilfe

31.10.2014 14093394 Doe10381 John Bett Bett1 Tag 31.10.2014 X Schließen

Aufnahme

Patienten-Identifikation

Stationsaufnahme 23.10.2014 14:45 Spitalsaufnahme 23.10.2014

Familienname Doe10381 KH-Aufnahmezahl 14093

Vorname John Generierter Patiententypus Erwac

Geburtsdatum 19.01.1967 Patiententypus Erwac

Patienten ID (Station) Patientenzuordnung Mediz

Patienten ID (KIS)

Allgemein

Geschlecht männlich

Alter 47 Jahre

Größe 175 cm

Gewicht 112 kg KOF 2,26 m²

Aufnahme: Typ Medizinisch

Co-Existierende Erkrank:

☐ Hämatologische

☐ HIV positiv (kein

☐ AIDS

☐ Metastasierende

☐ Malignom, nicht t

☐ Leberzirrhose

☐ Herzinsuffizienz t

Identifikation Allgemein Aufnahmegründe Infektionsüberwachung

Neuaufnahme Speichern Zurücksetzen Löschen

Erwachsener Pat. (>=16j)

Für eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Datenfelder gehen Sie folgendermaßen vor: Wählen Sie im Hauptmenü der Hilfe den Punkt "Der Datensatz" aus, oder stellen den Eingabecursor in das fragliche Feld und drücken die Taste F1.

Zusätzlich zu den einzelnen Eingabefeldern befinden sich am oberen und unteren Bildschirmrand folgende Funktionsbuttons:

Schließen

Schließt den Eingabeschirm und speichert alle Einträge.

Datum

Hier können Sie innerhalb eines Bettes auf jedes beliebige Datum innerhalb der Liegezeit des Patienten wechseln. Doppelklick auf das Datumsfeld setzt das aktuelle Datum (sofern sich der ausgewählte Patient am aktuellen Tag noch in der Station befindet).

Bett

Hier können Sie innerhalb des im Feld **Datum** festgelegten Datums durch Wechseln der Bettennummer die Daten der aktuellen Patienten bearbeiten.

Speichern oder Speichern und neu berechnen

Speichert die Änderungen, die seit Aufruf des Eingabeschirms (bzw. nach dem letzten *Speichern*) durchgeführt wurden. In den Score-Eingabeschirmen wird zusätzlich der erfaßte Score neu berechnet und am unteren Bildschirmrand eingeblendet.

Löschen

Dieser Button befindet sich nur im Aufnahmeschirm. Mit diesem Button werden alle Daten des ausgewählten Patienten gelöscht! Für die Entlassung des Patienten aus der Station muß lediglich der Entlassungszeitpunkt aus der Station im Entlassungsschirm eingetragen werden.

Zurücksetzen

Macht die Änderungen rückgängig, die seit dem Aufruf des Eingabeschirms (bzw. nach dem letzten *Speichern*) durchgeführt wurden.

Sprungmarken

Diese bringen Sie zu den jeweiligen Eingabegruppen. Der Eingabecursor wird automatisch in das erste Feld der gewählten Eingabegruppe gesetzt.

Vortagswerte übernehmen

In einigen der Score-Schirme (TISS-28, NeoTISS, PedTISS und NWS) steht diese Funktion zur Verfügung, um die Werte des Vortages (sofern sie am Vortag erfaßt wurden) zu übernehmen. Die manuelle Tätigkeit reduziert sich damit auf die Bearbeitung der tatsächlichen Änderungen zum Vortag.

In den beiden Eingabeschirmen **Katheter** und **Drainagen** finden Sie noch folgende Zusatzbuttons:

Anlegen

Legt einen Katheter oder eine Drainage mit dem aktuellen Datum an. Dieses Datum kann überschrieben werden. Anschließend wählen Sie in den entsprechenden Feldern aus den vorhandenen Listen: Kathetertyp (Drainagentyp) und Lokalisation.

Sie können einen neuen Katheter oder eine neue Drainage auch anlegen, indem Sie den Eingabecursor in der Tabelle einfach mit den Cursortasten nach unten über die bereits eingetragenen Zeilen bewegen. Die Funktion Anlegen wurde auch auf die Taste <Einf.> bzw. <Ins.> (Tastenblock oberhalb der Cursortasten) der erweiterten Microsoft-Tastatur gelegt.

Wechseln

Wählen Sie einen Katheter oder eine Drainage aus und drücken Sie Auf Wechseln. Der ausgewählte Katheter oder die Drainage wird mit dem aktuellen Tagesdatum entfernt (abgeschlossen) und ein gleichartiger mit dem aktuellen Datum angelegt.

Löschen

Löscht einen Katheter oder eine Drainage aus der Datenbank.

Auswahl aus den Selektionslisten

Die Auswahl von Typ und Lokalisation erfolgt wie gewohnt mit der Maus.

Zusätzlich kann das entsprechende Auswahlmenü auch durch die Funktionstaste <Alt> und die Cursortaste <Down> (gleichzeitig drücken) aufgeklappt werden. Die Auswahl erfolgt mit Hilfe der Cursortasten <up> und <down>. Nach der Auswahl wird die Eingabe mit der Taste <Enter> (<Eingabe>) abgeschlossen.

Datumseingabe bei Kathetern und Drainagen

Die Datumseingabe kann spezifisch für jedes Datum (innerhalb des Aufenthaltszeitraums +/- 30 Tagen) erfolgen.

Zusätzlich existiert eine Eingabehilfe für die Eingabe des aktuellen Datums: Doppelklick mit der Maus oder mit der Leertaste, wenn der Eingabecursor bereits in einem Datumsfeld steht. Das eingegebene Datum kann ganz leicht um einen Tag in die Zukunft oder Vergangenheit korrigiert werden: Die Cursortaste <up> geht in die Zukunft, die Cursortaste <down> in die Vergangenheit.

Achten Sie bei der Datumseingabe darauf, daß bei einem eventuellen Wechsel eines Katheters oder einer Drainage das Entfernungsdatum des gewechselten Katheters oder der Drainage mit dem neuen Anlegedatum übereinstimmt.

Folgende Eingabeschirme stehen für den Patiententyp **Erwachsener Pat. (>=16J)** zur Verfügung:

- ◆ Aufnahme
- ◆ Physiologie
- ◆ Dekurs
- ◆ MEL Intensiv
- ◆ Ernährung
- ◆ Infektionen
- ◆ Drainagen
- ◆ Katheter
- ◆ Scores Übersicht
- ◆ Score: TRISS
- ◆ Score: SAPS II
- ◆ Score: SAPS 3
- ◆ Score: APACHE II

- ◆ Score: SOFA
- ◆ Score: TISS-28
- ◆ Entlassung
- ◆ ICD9/ICD10 Katalog
- ◆ MEL Katalog
- ◆ Leistung kum.

Folgende Eingabeschirme stehen für den Patiententyp **Pädiatrischer Pat. (>28T,<16J)** zur Verfügung:

- ◆ Aufnahme
- ◆ Dekurs
- ◆ MEL Intensiv
- ◆ Ernährung
- ◆ Infektionen
- ◆ Drainagen
- ◆ Katheter
- ◆ Scores Übersicht
- ◆ Score: PRISM III (24h)
- ◆ Score: PedTISS
- ◆ Entlassung
- ◆ ICD9/ICD10 Katalog
- ◆ MEL Katalog

Folgende Eingabeschirme stehen für den Patiententyp **Neonat. Pat. (<=1500g)** zur Verfügung:

- ◆ Aufnahme
- ◆ Physiologie
- ◆ Dekurs
- ◆ Scores Übersicht
- ◆ Score: NWS
- ◆ Score: CRIB (12h)
- ◆ Score: NTISS
- ◆ Entlassung
- ◆ ICD9/ICD10 Katalog
- ◆ MEL Katalog

Folgende Eingabeschirme stehen für den Patiententyp **Neonat. Pat. (>1500g)** zur Verfügung:

- ◆ Aufnahme
- ◆ Physiologie
- ◆ Dekurs
- ◆ Scores Übersicht
- ◆ Score: NWS
- ◆ Score: SNAP (24h)
- ◆ Score: NTISS
- ◆ Entlassung
- ◆ ICD9/ICD10 Katalog
- ◆ MEL Katalog



Ernährung

Dieses Erfassungs- und Auswertungsmodul wurde mit freundlicher Unterstützung von [Fresenius Kabi](#) entwickelt.

Der [Begleittext](#) zu diesem Erfassungsmodul wurde von Prof. Dr. Wilfred Druml (AKH Wien) verfasst.

Der Ernährungsschirm kann für Erwachsene und pädiatrische Patienten im [Optionenschirm](#) unter "[Eingabeschirme](#)" aktiviert und deaktiviert werden. Bei Auslieferung ist der Ernährungsschirm aktiv. Der Ernährungsschirm ist in den Konfigurationsgruppen "Maximal" und "Dokumentation" enthalten.

Aufnahme Geschlecht: männlich Alter: 71 Jahre Größe: cm Gewicht: kg BMI: (Aufnahmeparameter bitte im Aufnahmeschirm modifizieren) BEE n. Harris-Benedict: kcal/d					
Parenterale Ernährung					
Alin-one	Aminonix 1	Menge (mL)	Kalorien (kcal)	Lipide (g)	Proteine (g)
		1000	1000		50
Lipide					
Proteine					
KH					
Zusatz 1	Carnitin	10			
Zusatz 2					
Zusatz 3					
Zusatz 4					
Grundmenge		1010	1000		50
					200
		Menge	Kalorien (kcal/d)	Lipide (g/d)	Proteine (g/d)
Infusionsgeschw.		40 mL/h			
Vorgeschrieben		960 mL/d	950,5		47,5
Verabreicht		910 mL/d	901		45
Propofol					180,2
Enterale Ernährung					
1) Alitraq		Menge (mL/d)	Kalorien (kcal/d)	Lipide (g/d)	Proteine (g/d)
		600	600	9,6	31,8
Vorgeschrieben		600			99
Verabreicht		600	600	9,6	31,8
2)					
Vorgeschrieben					
Verabreicht					
Parenterale/Enterale Ernährung					
Vorgeschrieben		Kalorien (kcal/d)	Lipide (g/d)	Proteine (g/d)	KH (g/d)
		1550,5	9,6	79,3	289,1
Verabreicht in %		Kalorien (%)	Lipide (%)	Proteine (%)	KH (%)
		96,8	100	96,8	96,6
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentation abgeschlossen					
<input type="button" value="Vortagswerte übernehmen"/> <input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/> <input type="button" value="Optionen"/>					

Zusätzlich zur Erfassung der Ernährungsparameter wurde ICdoc um zwei zusätzliche Scores erweitert: "BEE nach Harris Benedict" und "Body Mass Index". Diese Scores werden im Hintergrund bei Modifikationen im Aufnahmeschirm berechnet und im Ernährungsschirm angezeigt. Da es sich um Datenbank-Scores handelt, werden diese Werte bei Einspielen des Updates automatisch für alle bereits erfassten Patienten berechnet (sofern Geschlecht, Alter, Größe und Gewicht erfasst wurden). Die Parenterale Ernährung wird entweder über fertige Produkte oder freie Zusammenstellung aus Lipide, Proteine und Kohlenhydraten erfasst. Zusätzlich können bis zu vier Zusätze ausgewählt werden. Von dieser Grundmenge kann wahlweise über "Infusionsgeschwindigkeit" oder "Vorgeschriebene Menge" gewählt werden. Diese beiden Eingabeparameter berechnen sich wechselseitig. Die Enterale Ernährung wird ebenfalls über Fertigprodukte und Menge ausgewählt. Um einen Produktwechsel im Laufe eines Tages dokumentieren zu können, darf auch ein zweites Produkt gewählt werden. Sämtliche Referenzwerte (Menge, Kalorien, Lipide, Proteine und Kohlenhydrate) werden dynamisch während der Eingabe berechnet. Das Feld "Dokumentation abgeschlossen" ist manuell nach abgeschlossener Dokumentation zu setzen. Diese Feld dient zur Überprüfung der Dokumentationstätigkeit und kann im entsprechenden Bericht (Infektionen, fehlende Werte) überprüft werden. Bei Änderungen in diesem Bildschirm wird vor

dem Speichern nachgefragt, ob die Dokumentation für diesen Tag und diesen Patienten bereits abgeschlossen ist.

Abhängig vom Zustand dieses Feldes, erfolgt auch der Abgleich mit dem TISS28-Eingabeschirm.

In der Zusammenfassung (Parenterale/Enterale Ernährung) am unteren Bildschirmrand werden kumulative Werte für den Eingabeschirm angezeigt. Diese Zusammenfassung besteht aus einer Fixen Anzeige (Vorgeschrieben) und einer variablen Anzeige, die vom Benutzer gewählt werden kann. Zu Auswahl stehen:

- Vorgeschrieben je kg Körpergewicht,
- Verabreicht,
- Verabreicht je kg Körpergewicht,
- Verabreicht in %,
- BEE nach Harris Benedict,
- BEE nach Harris Benedict * 1,3

Die jeweilige Einstellung wird gespeichert und bleibt auch bei Neustart von ICdoc erhalten.


Zur Eingabehilfe steht die Funktion "Vortagswerte übernehmen" zur Verfügung, die alle Einstellungen des Vortags übernimmt. Die tatsächlich verabreichten Mengen werden dabei nicht übernommen!

Hinweise zu den einzelnen Parametern bekommen Sie wie gewohnt mit der F1-Taste. Stellen Sie dazu den Eingabe-Cursor in das entsprechende Feld in der Eingabemaske und drücken Sie F1.

Über den Button "[Optionen](#)" im Ernährungsschirm rechts unten wird ein Dialogfenster eingeblendet, in dem die verfügbaren Produkte gereicht, aktiviert und deaktiviert werden können. Weitere Hinweise dazu finden sie in der Beschreibung des [Optionenschirms für Ernährungserfassung](#).



Ernährung (Optionen)

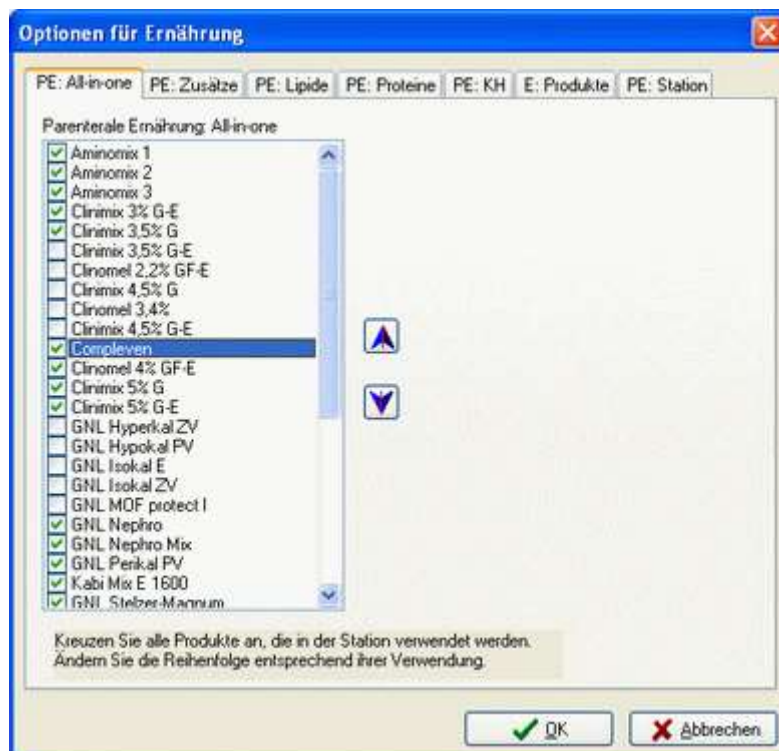

Die Abbildung zeigt die All-in-one Produkte für die parenterale Ernährung.

Nicht aktive Produkte werden in der Auswahlbox im Ernährungsschirm ausgeblendet. Durch die reduzierte Anzahl der mögliche Produkte lässt sich die Eingabegeschwindigkeit und Übersichtlichkeit erhöhen. Sollte ein bereits verabreichtes Produkt deaktiviert werden, wird dieses Produkt nur für neue Erfassungen ausgeblendet. Für bereits erfasste Patienten mit diesem Produkt wird die Anzeige automatisch wieder ergänzt! Durch die beiden Pfeile auf der rechten Seite lassen sich die Produkte in Ihrer Position verschieben. Damit können oftmals verwendete Produkte an den Anfang geschoben werden.

Die Optionenschirme "PE:Zusätze", "PE:Lipide", "PE:Proteine", "PE:KH" und "E:Produkte" sind gleich aufgebaut wie "PE:All-in-one".

Bei Produkten, die mit einem "*" gekennzeichnet sind, handelt es sich um krankenhaus- bzw. stationsspezifische Produkte, die gesondert erfasst werden können. Auch diese Produkte lassen sich wie die Standardprodukte aktivieren und deaktivieren, sowie in Ihrer Position verändern.

Optionen für Ernährung

PE: All-in-one PE: Zusätze PE: Lipide PE: Proteine PE: KH E: Produkte PE: Station

Parenterale Ernährung:
Stationseigene All-in-one Produkte

Eigene 1

Neu Löschen

All-in-one Produkt

Name Eigene 1

Menge 1000 mL

Lipide 50 g

Proteine 40 g

KH 120 g

Kalorien 1140 kcal

Zurücksetzen Speichern

Geben Sie hier Produkte ein, die speziell für Ihre Station gemischt wurden.
ACHTUNG: Handelsübliche Produkte werden laufend mit den Updates von ICdoc ergänzt.

OK Abbrechen

Mit diesem Schirm lassen sich spezielle, für die Station gemischte All-in-one Produkte erfassen, ändern und begrenzt löschen (bereits verabreichte Produkte dürfen nicht mehr gelöscht werden, allerdings können diese im Schirm "PE:All-in-one" deaktiviert werden).

Die Kalorien berechnen sich aus der Nahrungsformel: $(\text{Lipide} \cdot 10) + (\text{Proteine} \cdot 4) + (\text{KH} \cdot 4)$.

Alle mit diesem Schirm zusätzlich erfassten Produkte werden mit einem vorangestellten Stern (*) in den Auswahllisten gekennzeichnet. Neu hinzugekommene Produkte werden in der Liste der verfügbaren Produkte ans Ende gestellt.

Ernährung, Begleittext von Prof. Dr. Wilfred Druml (AKH Wien)

Das ICdoc Ernährungsfenster dient einerseits der Dokumentation durchgeführter ernährungstherapeutischer Interventionen (parenteral - enteral), soll aber auch Denkanstöße für die Optimierung der Nährstoffzufuhr liefern und durch den Soll-Ist Vergleich (wieviel von dem, was verordnet wurde, hat der Patient tatsächlich erhalten ?) eine Tag-zu-Tag Qualitätskontrolle der vorgenommenen Maßnahmen gestatten.

Als Basis für die Berechnung der Soll-Energiezufuhr wird der basale Energieumsatz nach der Formel von Harris-Benedict herangezogen. Zu diesem Basic Energy Expenditure (BEE), der bei Gesunden etwa 25 kcal/kgKG/Tag ausmacht, kommt noch ein Krankheitsfaktor. Aber auch bei schwerstkranken Patienten (mit Ausnahmen) ist der Energieumsatz kaum über 130% des BEE erhöht, daher soll die Energiezufuhr 30 kcal/kgKG/Tag in der Regel nicht überschreiten.

CAVE: Eine überhöhte Energiezufuhr ist mit schwerwiegenden Nebenwirkung verbunden und daher strikte zu vermeiden !!

MERKE: Auch eine (selbst kurzfristige) Hyperglykämie führt zu Komplikationen, insbesondere Störung der Immunkompetenz und Verstärkung der Gewebsschädigung und ist daher ebenfalls zu vermeiden (bei Patienten mit hochgradiger Insulinresistenz muß daher häufig die Nährstoffzufuhr gesenkt werden - weniger ist dann besser als zuviel)

Die Aminosäuren- bzw. Proteinzufuhr der Intensivpatienten sollte zwischen 1,2 bis 1,5 g/kgKG/Tag betragen.

Fett sollte - wenn immer möglich - bei Intensivpatienten verabreicht werden. Beachte, daß unter einer Propofol-Sedierung beträchtliche Fett-Mengen verabfolgt werden (diese muß daher dokumentiert werden!). Die Serum-Triglyceride sollen unter der Ernährung nicht über 400 mg/dl ansteigen.

Eine künstliche Ernährung ist nur dann vollständig, wenn alle notwendigen Nahrungsbestandteile, und damit auch Vitamine und Spurenelemente zugeführt werden.

MERKE: Patienten unter Nierenersatztherapie haben einen erhöhten Vitaminbedarf.

Die Ernährung (parenteral - enteral) sollte nicht sofort mit der geplanten Soll-Infusionsrate begonnen werden, sondern innerhalb 2 bis 3 Tagen schrittweise aufgebaut werden, um die Verwertung der zugeführten Nährstoffe sicherstellen zu können und die Ausbildung metabolischer Entgleisungen zu verhindern.

Dies sind nur allgemeine Angaben und Richtwerte. Die Arbeitsgemeinschaft für klinische Ernährung (AKE) hat in einer Konsensus-Konferenz Ernährungsempfehlungen erarbeitet, die weiterführende Informationen bieten (Sie können über www.ake-nutrition.at oder der e-mail ake@chello.at abgefragt werden).

Zurück zur [Ernährung](#).

Frei konfigurierbarer Datenexport

Der frei konfigurierbare Datenexport dient dem Export von Daten für die Weiterverarbeitung (z.B. mit MS EXCEL, MS ACCESS usw.). Dem Anwender wird ein Wizard zur Verfügung gestellt mit dem Konfigurationsdateien erstellt werden. Eine Konfigurationsdatei enthält Informationen über die zu exportierenden Daten wie z.B. Bezeichnung der Datenbankfelder, Formate usw.

[Konfigurationsdatei erstellen](#)

ICdoc-Manager Menü **Schnittstellen/Freier Export/konfigurieren/...**

[Freier Export](#)

ICdoc-Manager Menü **Schnittstellen/Freier Export/ausführen**

Konfigurationsdatei erstellen (Export Wizard)



Konfigurationsdatei erstellen

[Auswahl der Felder](#) (2. Feldauswahl)
[Reihenfolge festlegen](#) (3. Feldreihenfolge)
[Formate festlegen](#) (4. Felddarstellung)
[Sortierkriterien festlegen](#) (5. Sortierung)
[Auswahl von Exportkriterien](#) (6. Auswahl)
[Globale Einstellungen](#) (7. Formatoptionen)
[Speichern der Konfigurationsdatei](#) (8. Speichern)

<Zurück und Weiter>

Um nach Beendigung eines Schrittes zum nächsten zu springen drücken Sie den Button **Weiter>**. Wenn Sie zum vorhergehenden Punkt springen wollen drücken Sie **<Zurück**. Sie können aber auch direkt am oberen Schirmrand zu den einzelnen Kapiteln springen.


Abbrechen

Drücken Sie den **Abbrechen**-Button wird der Export Wizard beendet ohne die Änderungen zu speichern.

Beenden

Beendet den Export Wizard und speichert die Änderungen.

Auswahl der Felder

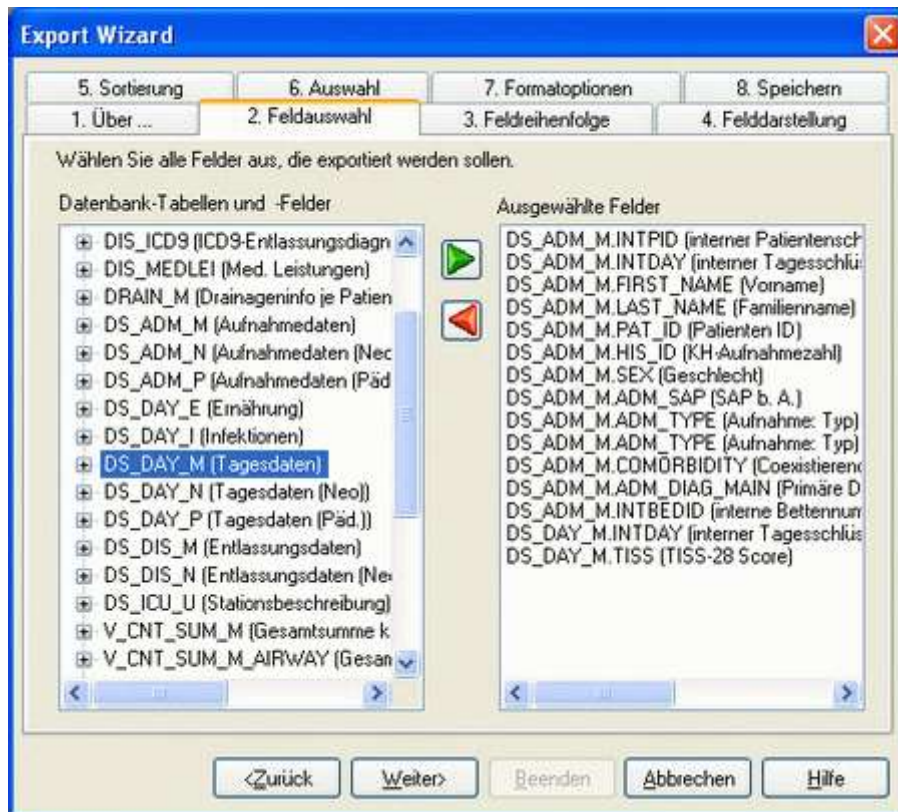

Die linke Liste enthält alle Datenbanktabellen mit deren Feldern. In der rechten Liste erscheinen die ausgewählten Felder. Die Einträge bestehen aus Tabellen- bzw. Feldnamen und einer Kurzbeschreibung.


Datenbankfeld auswählen

Sie können ein Feld entweder durch Doppelklicken auswählen oder durch Drücken des Buttons mit dem Pfeil nach rechts, nachdem Sie das Feld selektiert haben. Sie können ein bestimmtes Feld auch mehrfach in die Auswahl übernehmen, beispielsweise um dieses Feld gleichzeitig in mehreren verschiedenen Darstellungen zu exportieren.

Datenbankfeld aus der Auswahl löschen

Doppelklicken Sie das Feld in der rechten Liste oder selektieren Sie das Feld und drücken den Button mit dem Pfeil nach links.

Reihenfolge festlegen

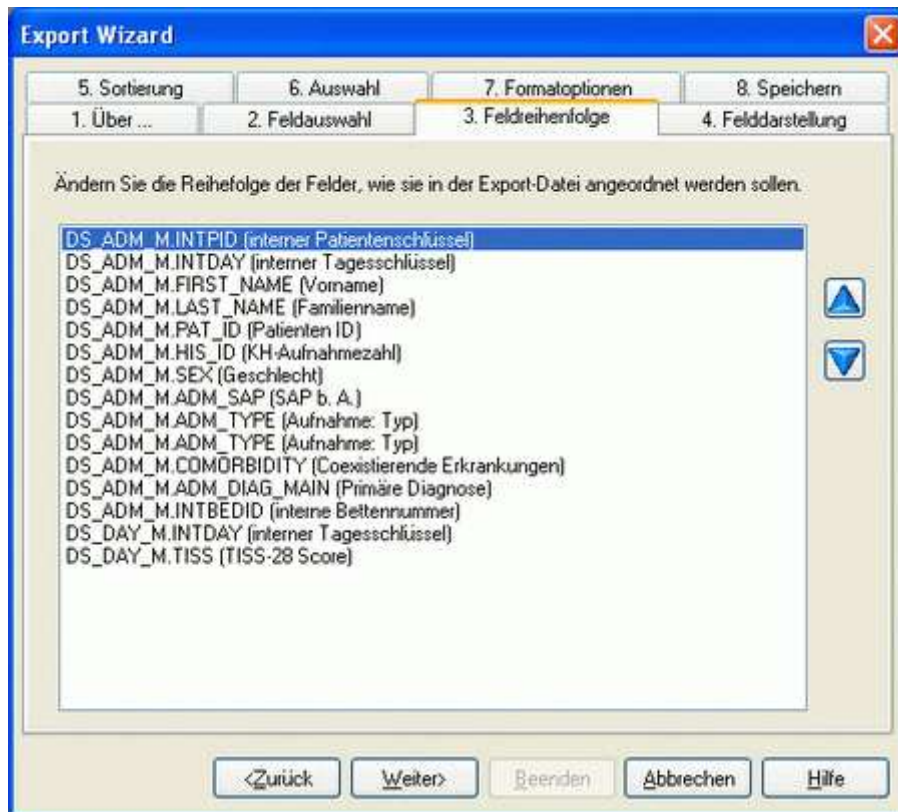

Reihenfolge der Datenbankfelder

Die Felder erscheinen in der Reihenfolge, in der sie in der Feldauswahl ausgewählt wurden. Selektieren Sie ein Feld und drücken Sie die Buttons mit den Pfeilen nach oben oder unten um die Reihenfolge zu verändern.

Formate festlegen

In diesem Schirm besteht die Möglichkeit, für jedes ausgewählte Feld ein Format festzulegen. Selektieren Sie ein Feld in der Liste und bestimmen Sie dann auf der rechten Seite das Format. Dabei sind verschiedene Datentypen zu unterscheiden.

Ganzzahlige Werte

Keine Formatoptionen.

Datum und Zeit

Datum- und Zeitwerte werden global für alle Felder bestimmt (siehe **7.Formatoptionen**). Es gibt daher für diesen Typ hier keine Formatoptionen.

Text

Export Wizard

5. Sortierung 6. Auswahl 7. Formatoptionen 8. Speichern
1. Über ... 2. Feldauswahl 3. Feldreihenfolge 4. Felddarstellung

Ändern Sie die Darstellung der Feldinhalte, wie sie in die Export-Datei ausgegeben werden sollen.

DS_ADM_M.INTPID (interner Patientenschlüssel)
DS_ADM_M.INTDAY (interner Tagesschlüssel)
DS_ADM_M.FIRST_NAME (Vorname)
DS_ADM_M.LAST_NAME (Familienname)
DS_ADM_M.PAT_ID (Patienten ID)
DS_ADM_M.HIS_ID (KH-Aufnahmezahl)
DS_ADM_M.SEX (Geschlecht)
DS_ADM_M.ADM_SAP (SAP b. A.)
DS_ADM_M.ADM_TYPE (Aufnahme: Typ)
DS_ADM_M.ADM_TYPE (Aufnahme: Typ)
DS_ADM_M.COMORBIDITY (Coexistierende Diagnosen)
DS_ADM_M.ADM_DIAG_MAIN (Primäre Diagnose)
DS_ADM_M.INTBEDID (interne Bettennummer)
DS_DAY_M.INTDAY (interner Tagesschlüssel)
DS_DAY_M.TISS (TISS-28 Score)
DS_DAY_M.T28_B_ACT (Standard-Monitoring)

Textfeld

Darstellung

☐ Original (wie in der Datenbank)
☐ Großbuchstaben
☐ Kleinbuchstaben
☒ Anfangsbuchstabe großgeschrieben

Beispiel:

Müller
Hugo

< Zurück Weiter > Beenden Abbrechen Hilfe

Original (wie in Datenbank) ... Das Format wird von der Datenbank übernommen.

Großbuchstaben ... Alle Buchstaben werden in Großbuchstaben umgewandelt.

Kleinbuchstaben ... Alle Buchstaben werden in Kleinbuchstaben umgewandelt.

Anfangsbuchstaben großgeschrieben ... Die Anfangsbuchstaben werden großgeschrieben, der Rest klein.

Dezimalwerte

Export Wizard

5. Sortierung 6. Auswahl 7. Formatoptionen 8. Speichern
1. Über ... 2. Feldauswahl 3. Feldreihenfolge 4. Felddarstellung

Ändern Sie die Darstellung der Feldinhalte, wie sie in die Export-Datei ausgegeben werden sollen.

DS_ADM_M.INTPID (interner Patientenschlüssel)
DS_ADM_M.INTDAY (interner Tagesschlüssel)
DS_ADM_M.FIRST_NAME (Vorname)
DS_ADM_M.LAST_NAME (Familienname)
DS_ADM_M.PAT_ID (Patienten ID)
DS_ADM_M.HIS_ID (KH-Aufnahmezahl)
DS_ADM_M.SEX (Geschlecht)
DS_ADM_M.ADM_SAP (SAP b. A.)
DS_ADM_M.ADM_TYPE (Aufnahme: Typ)
DS_ADM_M.ADM_TYPE (Aufnahme: Typ)
DS_ADM_M.COMORBIDITY (Coexistierende Diagnosen)
DS_ADM_M.ADM_DIAG_MAIN (Primäre Diagnose)
DS_ADM_M.INTBEDID (interne Bettennummer)
DS_DAY_M.INTDAY (interner Tagesschlüssel)
DS_DAY_M.TISS (TISS-28 Score)
DS_DAY_M.T28_B_ACT (Standard-Monitoring)

Dezimalwert

Optionen:

☒ Zwingende Null vor Dezimalpunkt
☒ Zwingende Null nach Dezimalpunkt

Beispiel:

0.123
1.23
123.0

< Zurück Weiter > Beenden Abbrechen Hilfe

Zwingende Null vor Dezimalpunkt ... Bestimmt, ob bei Werten ≥ -1 und ≤ 1 vor dem Dezimalpunkt eine Null steht.

Zwingende Null nach Dezimalpunkt ... Bestimmt, ob bei Werten ohne Nachkommastellen eine Null hinter dem Dezimalpunkt steht.

Boolesche Werte

Export Wizard

5. Sortierung 6. Auswahl 7. Formatoptionen 8. Speichern

1. Über ... 2. Felddarstellung 3. Feldreihenfolge 4. Felddarstellung

Ändern Sie die Darstellung der Feldinhalte, wie sie in die Export-Datei ausgegeben werden sollen.

DS_ADM_M.INTPID (interner Patientenschlüssel)
DS_ADM_M.INTDAY (interner Tagesschlüssel)
DS_ADM_M.FIRST_NAME (Vorname)
DS_ADM_M.LAST_NAME (Familienname)
DS_ADM_M.PAT_ID (Patienten ID)
DS_ADM_M.HIS_ID (KH-Aufnahmezahl)
DS_ADM_M.SEX (Geschlecht)
DS_ADM_M.ADM_SAP (SAP b. A.)
DS_ADM_M.ADM_TYPE (Aufnahme: Typ)
DS_ADM_M.ADM_TYPE (Aufnahme: Typ)
DS_ADM_M.COMORBIDITY (Coexistierende Diagnosen)
DS_ADM_M.ADM_DIAG_MAIN (Primäre Diagnose)
DS_ADM_M.INTBEDID (interne Bettennummer)
DS_DAY_M.INTDAY (interner Tagesschlüssel)
DS_DAY_M.TISS (TISS-28 Score)
DS_DAY_M.T28_B_ACT (Standard-Monitoring)

JA/NEIN Auswahl

Darstellung

☐ als Zahl (0..Nein, 1..Ja)
☒ als Text

JA/NEIN Texte

☒ JA/NEIN ☐ J/N
☐ WAHR/FALSCH ☐ W/F

< Zurück Weiter > Beenden Abbrechen Hilfe

Als Zahl ... 0 steht für FALSE und 1 für TRUE.

Als Text ... Es stehen Ihnen folgende Formate zur Verfügung: JA/NEIN, J/N, WAHR/FALSCH, W/F. Dabei steht jeweils der Text vor dem "/" für TRUE und der Text nach dem "/" für FALSE.

Hierarchische Auswahlliste

Export Wizard

5. Sortierung 6. Auswahl 7. Formatoptionen 8. Speichern
 1. Über ... 2. Feldauswahl 3. Feldreihenfolge 4. Felddarstellung

Ändern Sie die Darstellung der Feldinhalte, wie sie in die Export-Datei ausgegeben werden sollen.

DS_ADM_M.INTPID (interner Patientenschlüssel)
 DS_ADM_M.INTDAY (interner Tagesschlüssel)
 DS_ADM_M.FIRST_NAME (Vorname)
 DS_ADM_M.LAST_NAME (Familienname)
 DS_ADM_M.PAT_ID (Patienten ID)
 DS_ADM_M.HIS_ID (KH-Aufnahmezahl)
 DS_ADM_M.SEX (Geschlecht)
 DS_ADM_M.ADM_SAP (SAP b. A.)
 DS_ADM_M.ADM_TYPE (Aufnahme: Typ)
 DS_ADM_M.ADM_TYPE (Aufnahme: Typ)
 DS_ADM_M.COMORBIDITY (Coexistierende Diagnosen)
 DS_ADM_M.ADM_DIAG_MAIN (Primäre Diagnose)
 DS_ADM_M.INTBEDID (interne Bettennummer)
 DS_DAY_M.INTDAY (interner Tagesschlüssel)
 DS_DAY_M.TISS (TISS-28 Score)
 DS_DAY_M.T28_B_ACT (Standard-Monitoring)

Diagnosen

Optionen:

☐ Original (wie in der Datenbank)

☒ Text

Beispiel:

Text zu Diagnose

< Zurück Weiter > Beenden Abbrechen Hilfe

Original (wie in Datenbank) ... Numerische Darstellung.
 Text ... Textuelle Darstellung.

Betten

Export Wizard

5. Sortierung 6. Auswahl 7. Formatoptionen 8. Speichern
 1. Über ... 2. Feldauswahl 3. Feldreihenfolge 4. Felddarstellung

Ändern Sie die Darstellung der Feldinhalte, wie sie in die Export-Datei ausgegeben werden sollen.

DS_ADM_M.INTPID (interner Patientenschlüssel)
 DS_ADM_M.INTDAY (interner Tagesschlüssel)
 DS_ADM_M.FIRST_NAME (Vorname)
 DS_ADM_M.LAST_NAME (Familienname)
 DS_ADM_M.PAT_ID (Patienten ID)
 DS_ADM_M.HIS_ID (KH-Aufnahmezahl)
 DS_ADM_M.SEX (Geschlecht)
 DS_ADM_M.ADM_SAP (SAP b. A.)
 DS_ADM_M.ADM_TYPE (Aufnahme: Typ)
 DS_ADM_M.ADM_TYPE (Aufnahme: Typ)
 DS_ADM_M.COMORBIDITY (Coexistierende Diagnosen)
 DS_ADM_M.ADM_DIAG_MAIN (Primäre Diagnose)
 DS_ADM_M.INTBEDID (interne Bettennummer)
 DS_DAY_M.INTDAY (interner Tagesschlüssel)
 DS_DAY_M.TISS (TISS-28 Score)
 DS_DAY_M.T28_B_ACT (Standard-Monitoring)

Betten

Optionen:

☐ Original (wie in der Datenbank)

☒ Text


Beispiel:

Auswahl 1

< Zurück Weiter > Beenden Abbrechen Hilfe

Original (wie in Datenbank) ... Numerische Darstellung.
 Text ... Textuelle Darstellung.

Einfache Auswahl

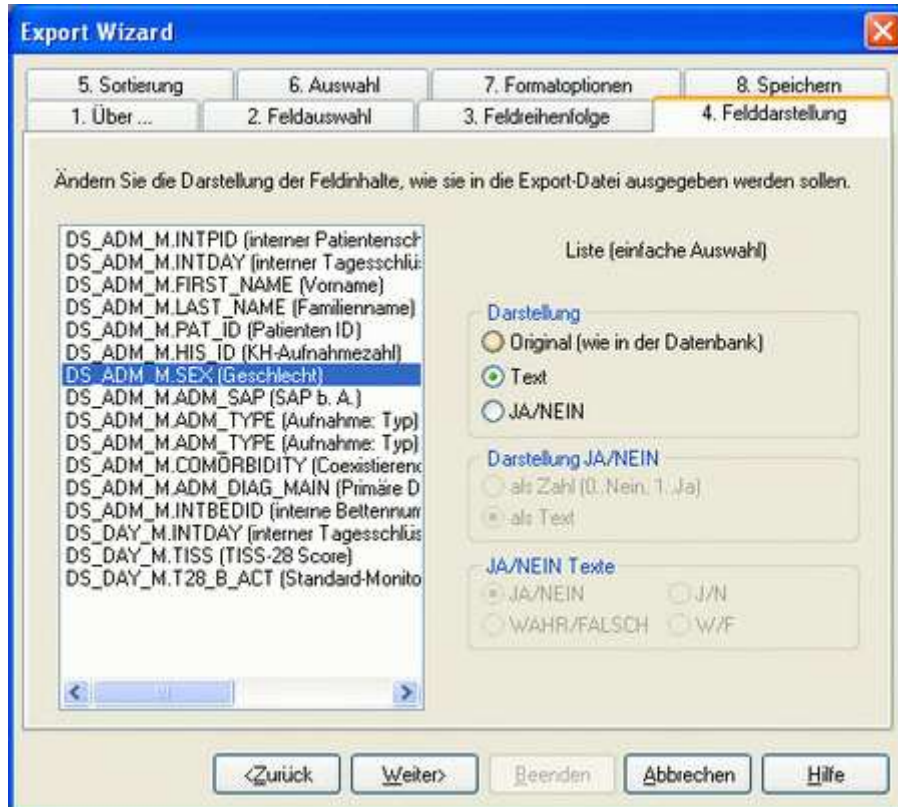

Original (wie in Datenbank) ... Numerische Darstellung der Feldwerte wie sie in der Datenbank gespeichert werden.

Text ... Textuelle Darstellung.

JA/NEIN ... Darstellung in booleschen Werten.

Als Zahl ... 0 steht für FALSE und 1 für TRUE.

Als Text ... Es stehen Ihnen folgende Formate zur Verfügung: JA/NEIN, J/N, WAHR/FALSCH, W/F. Dabei steht jeweils der Text vor dem "/" für TRUE und der Text nach dem "/" für FALSE.

Die Texte hängen weiters von der Sprachauswahl ([7. Formatoptionen](#)) ab. Zur Zeit kann zwischen Englisch und Deutsch gewählt werden.

Mehrfache Auswahl

Siehe **Einfache Auswahl**.

Sortierkriterien festlegen

Export Wizard

1. Über ... 2. Feldauswahl 3. Feldreihenfolge 4. Felddarstellung
5. Sortierung 6. Auswahl 7. Formatoptionen 8. Speichern

Wählen Sie die Schlüsselfelder, nach denen die Ausgabe in der Export-Datei zeilenweise sortiert werden soll.


	Feld	Sortierung
1	DS_ADM_M.INTPID	Aufsteigend
2	DS_ADM_M.INTDAY	Aufsteigend
3	DS_ADM_M.LAST_NAME	Aufsteigend
4	DS_DAY_M.INTDAY	Aufsteigend
5		Aufsteigend
6		Aufsteigend
7		Aufsteigend
8		Aufsteigend
9		Aufsteigend
10		Aufsteigend
11		Aufsteigend
12		Aufsteigend

<Zurück Weiter Beenden Abbrechen Hilfe

Es besteht die Möglichkeit die Ausgabe der Daten zeilenweise zu sortieren. In diesem Schirm werden die Schlüsselfelder und das Suchkriterium ausgewählt. Wird kein Suchkriterium benötigt bleibt die Auswahl der Felder leer.

ACHTUNG: Ohne Anwahl eines Sortierkriteriums bleibt die Reihenfolge der exportierten Zeilen unbestimmt!

Auswahl von Exportkriterien

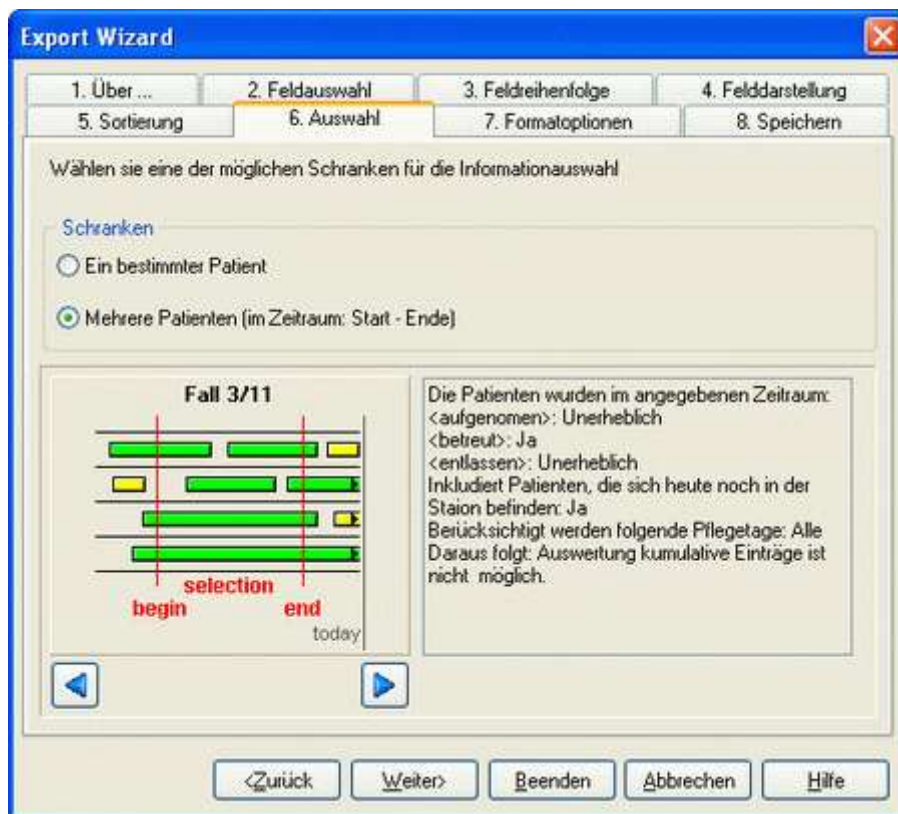

Ein bestimmter Patient

Für den Export der Daten eines Patienten über dessen gesamte Pflegetage.

Mehrere Patienten (im Zeitraum: Start - Ende)

Für den Export der Daten aller Patienten innerhalb eines Zeitraumes. Wenn Sie diese Auswahl treffen, müssen Sie die [Interpretation der Datumsgrenzen](#) bestimmen, nach der später während des Exports, die Daten ausgewählt werden sollen.

Globale Einstellungen

Dieser Schirm bestimmt das Format der Exportdatei.

Erste Zeile beinhaltet Feldnamen

Wählen Sie diese Checkbox, wenn in der ersten Zeile die Datenbankfeldnamen angeführt werden sollen.

Feldnamen mit Tabellennamen anzeigen

Wurde die erste Checkbox angekreuzt, besteht die Möglichkeit, in der ersten Zeile vor den Feldnamen auch die Tabellennamen auszugeben.

Auch Pflegetage inkludieren, an denen keine Tageswerte erfaßt wurden

Export auch jener Pflegetage möglich, an denen keine Daten für diesen Patienten eingegeben wurden. Diese Option erzeugt für jeden fehlenden Tag zumindest eine Leerzeile, um speziell bei grafischen Auswertungen den zeitlichen Bezug der Daten durch fehlende Zeilen nicht zu verfälschen.

Überschrift

Bestimmt, ob die Feldnamen wie in der Datenbank lauten oder die *ICdoc*-Bezeichnungen verwendet werden.

Gruppieren

Je Patient ... Stehen in der Exportdatei mehrere Datensätze eines Patienten untereinander, so werden Daten die in jeder Zeile gleich sind (z.B. der Name) nur in der ersten Zeile angeführt. Diese Funktion ist nur sinnvoll, wenn bereits bei der Sortierreihenfolge ([5. Sortierung](#)) darauf geachtet wurde, dass die Ausgabe sortiert nach Patienten erfolgen soll.

Texte

HTML - kodiert ... verwendet Standards des HTML-Formates um Umlaute und Sonderzeichen nach internationalem Standard zu kodieren.

Sonderzeichenunterdrückung ... Auslassen aller Sonderzeichen (z.B. RETURN). Diese Option ist gerade für tabellarische Auswertungen interessant, da spezielle Sonderzeichen die Formatierung zerstören und die gesamte exportierte Datei damit unbrauchbar machen würden.

CSV Format

Es stehen Ihnen zwei vorgefertigte Formate zu Verfügung: *CSV-Auswahl Deutsch* und *CSV-Auswahl Englisch*.

Wenn Sie in der Combobox *CSV-Auswahl* eines der beiden auswählen brauchen Sie nur noch die Dateierweiterung angeben. Wählen Sie hingegen *Eigene* dann können Sie *Trennzeichen*, *Textmarker*, *Datumsformat*, *Datum-Zeit Format*, *Dezimalpunkt* und *Ja/Nein Auswahl* selber bestimmen.

Speichern der Konfigurationsdatei



In der Liste stehen bereits vorhandene Konfigurationsdateien. Es besteht die Möglichkeit eine bereits vorhandene Datei zu überschreiben, oder die Konfiguration unter einem neuen Namen zu speichern.

Löschen einer Konfigurationsdatei

Selektieren Sie die zu löschende Datei und drücken Sie den Button **löschen**.

Beenden

Der Button **Beenden** speichert die Konfiguration und schließt den Export Wizard.

Freier Export

Sie können im freien Export entweder die Daten eines Patienten über dessen gesamte Pflegetage exportieren oder die Daten aller Patienten innerhalb eines Zeitraumes.

Ein Patient alle Pflegetage

Export ausführen

Patient **Intervall**

Patientenübersicht
Doe John
 Geschlecht: männlich
 Geburtsdatum: 09.12.1935
 Patienten ID:
 KH-Aufnahmezahl: 0755019163
 Stationsaufnahme: 12.02.2007 06:29

Exportdatei
 Datei: c:\temp\pat_adm.csv

Exportkonfiguration
 pat_adm

Zuerst wählen Sie einen Patienten aus. Wollen Sie die Daten des Patienten der gerade bearbeitet wird exportieren, dann drücken Sie **Akt. Patient übernehmen**. Sie können auch nach beliebigen Patienten suchen. Dazu drücken Sie den **Suchen**-Button. Geben Sie den Dateinamen und den Pfad für die Exportdatei ein. Sie können dafür den Windows-Browser verwenden. Wählen Sie eine Konfigurationsdatei aus und klicken Sie auf den **Export**-Button um den Export zu starten.

Patienten innerhalb eines Zeitraumes

Export ausführen

Patient **Intervall**

von 01.01.2007 bis 16.03.2007

Schnellauswahl
 Monat -
 Quartal -
 Halbjahr -
 Jahr **2007 (akt.)**

Exportdatei
 Datei: c:\temp\test

Exportkonfiguration
 test

Wählen Sie zuerst ein Zeitintervall aus. Die Interpretation der Datumsgrenzen erfolgt den Einstellungen der Konfigurationsdatei entsprechend (Export Wizard Kapitel [6.Auswahl](#)). Geben Sie

den Dateinamen und den Pfad für die Exportdatei ein. Sie können dafür auch den Browser verwenden. Wählen Sie eine Konfigurationsdatei aus und klicken Sie auf den **Export**-Button um den Export zu starten.

Gelöschte Patienten wieder herstellen



Mit Hilfe dieses Bildschirms kann ein bereits gelöschter Patient wieder hergestellt werden.

Liste wieder herstellbarer Patienten

In dieser Liste werden alle Patienten aufgelistet, die in der Vergangenheit (Ab ICdoc V6.1.4) gelöscht wurden. Der Lösch-Button befindet sich im Aufnahmeschirm!


Die Sortierung dieser Liste kann durch Klick auf eine Spalte in der Überschrift geändert werden.

Button: "wieder herstellen"

Nachdem Sie einen Patienten aus der Liste ausgewählt haben, wird durch Drücken dieses Buttons die Wiederherstellungsprozedur ausgelöst.

Nach dem erfolgreichen Wiederherstellen springt die Applikation automatisch in den Aufnahmeschirm dieses Patienten.

Diagnosen ICD9

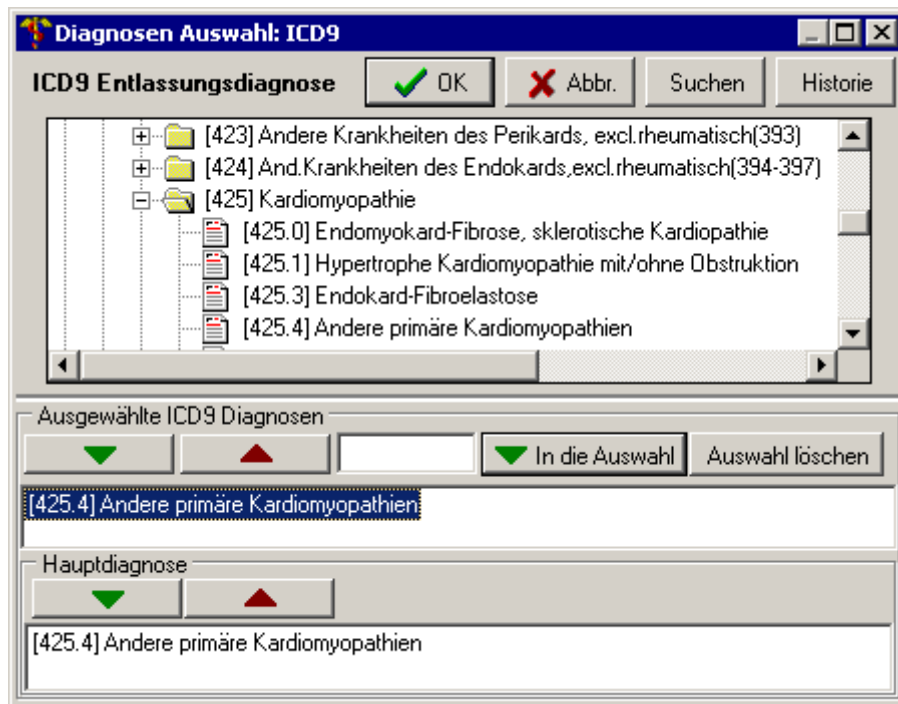

Dieser Schirm dient zur Auswahl der ICD9-Diagnosen. Er wird geöffnet, wenn Sie im "ICD9 Katalog" Schirm den Button "ICD9 modifizieren" drücken. Im obersten Fenster befinden sich alle auswählbaren Diagnosen. Das mittlere Fenster beinhaltet die ausgewählten Diagnosen und das unterste Fenster die Hauptdiagnose.

Diagnosen auswählen

Um eine Diagnose auszuwählen, selektieren Sie eine ICD9 Diagnose im obersten Fenster und drücken Sie den Button mit dem roten, nach unten zeigenden Dreieck oberhalb des mittleren Fensters. Die Auswahl der Hauptdiagnose erfolgt nach dem selben Prinzip mit dem Unterschied, daß eine Diagnose im mittleren Fenster ausgewählt wird und der Button oberhalb des untersten Fensters gedrückt wird. Auf unterster Ebene der hierarchischen Darstellung der Diagnosen ist die Übernahme der Diagnose auch durch Doppelklick möglich.

In die Auswahl

Eine weitere Möglichkeit eine Diagnose in die Auswahl zu übernehmen besteht darin, die Zahl, die vor der Diagnose steht, in das Editierfeld in der Mitte des Schirms einzugeben und den Button "In die Auswahl" zu drücken.

Suchen

Dieser Button öffnet einen Dialog zum Suchen von Diagnosen.

Historie

Dieser Button öffnet einen Dialog mit einer Liste von den letzten 40 ausgewählten Diagnosen. Damit können Sie rasch und einfach oft verwendete Diagnosen auswählen.

Diagnosen entfernen

Eine Auswahl kann folgendermaßen entfernt werden. Selektieren Sie jene Diagnose im mittleren Fenster, die Sie aus der Auswahl löschen wollen und drücken Sie den Button mit dem grünen, nach oben zeigenden Dreieck. Das Entfernen der Hauptdiagnose erfolgt analog.

Alles löschen

Diesen Button drücken Sie, wenn Sie die gesamte Auswahl und die Hauptdiagnose löschen wollen.

OK

Der OK Button übernimmt die ausgewählten Diagnosen in das Feld "ICD9" im "ICD9 Katalog" Schirm und kennzeichnet die Hauptdiagnose durch fette Schrift.


Auswahlfenster der Bildschirmgröße anpassen

Das Auswahlfenster kann bei höherer Bildschirmauflösung (größer als 640x480) der eingesetzten Hardware angepaßt werden. Ziehen Sie dazu das rechte untere Eck des Fensters so lange nach außen, bis die von Ihnen gewünschte Größe erreicht ist.

An unteren Ende der oberen Auswahlliste befindet sich eine Trennlinie (Horizontale Linie mit verstärkter Schattenzeichnung) Diese Linie kann mit der Maus angeklickt und nach oben oder unten verschoben werden.

Die Modifikationen am Erscheinungsbild des Auswahlfensters werden bei Verlassen des Fensters gespeichert. Bei mehrmaligem Aufruf dieses Auswahlfensters werden die Position und Größe beibehalten.

Diagnosen ICD10

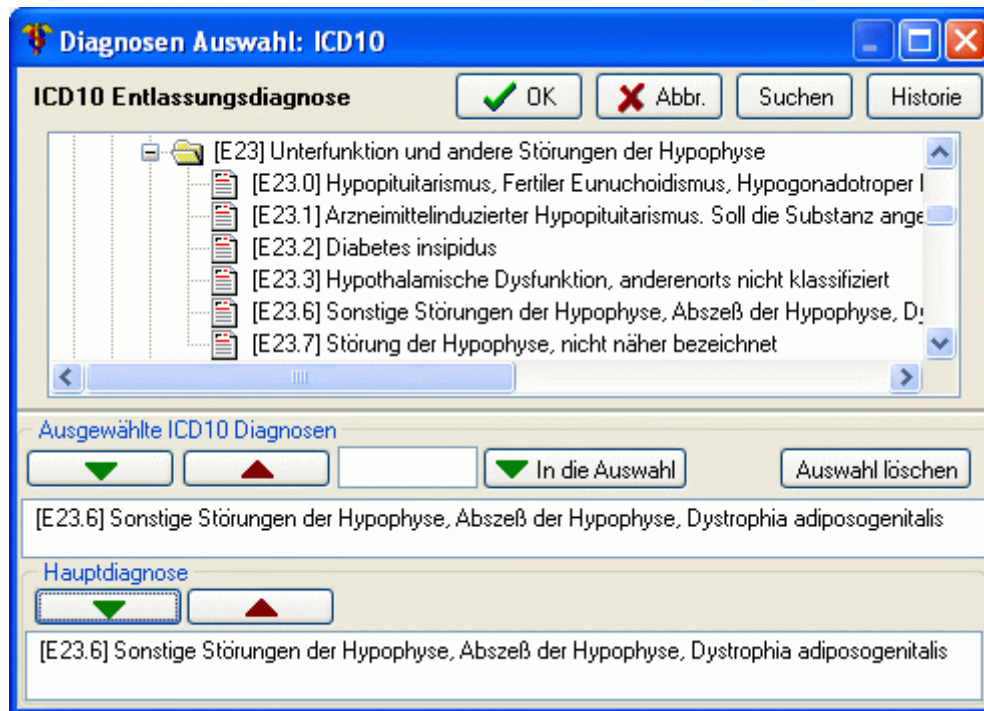

Dieser Schirm dient zur Auswahl der ICD10-Diagnosen. Er wird geöffnet, wenn Sie im "ICD10 Katalog" Schirm den Button "ICD10 modifizieren" drücken. Im obersten Fenster befinden sich alle auswählbaren Diagnosen. Das mittlere Fenster beinhaltet die ausgewählten Diagnosen und das unterste Fenster die Hauptdiagnose.

Diagnosen auswählen

Um eine Diagnose auszuwählen, selektieren Sie eine ICD10 Diagnose im obersten Fenster und drücken Sie den Button mit dem roten, nach unten zeigenden Dreieck oberhalb des mittleren Fensters. Die Auswahl der Hauptdiagnose erfolgt nach dem selben Prinzip mit dem Unterschied, daß eine Diagnose im mittleren Fenster ausgewählt wird und der Button oberhalb des untersten Fensters gedrückt wird. Auf unterster Ebene der hierarchischen Darstellung der Diagnosen ist die Übernahme der Diagnose auch durch Doppelklick möglich.

Im Unterschied zum ICD9 wird die Auswahl der ICD10 Diagnose auf Alter und Geschlecht des Patienten validiert. Sollte eine für den Patienten nicht zulässige Diagnose ausgewählt werden, wird dies durch eine Fehlermeldung angezeigt und die Diagnose nicht übernommen.

In die Auswahl

Eine weitere Möglichkeit, eine Diagnose in die Auswahl zu übernehmen, besteht darin, die Zahl, die vor der Diagnose steht, in das Editierfeld in der Mitte des Schirms einzugeben und den Button "In die Auswahl" zu drücken. Auch bei dieser Funktion wird die Diagnose auf Alter und Geschlecht des Patienten validiert.

Hauptdiagnose

Mit dem roten bzw. grünen Button kann eine der ausgewählten Diagnosen als Hauptdiagnose ausgewählt werden. Eine spezielle Prüfung verhindert, dass eine Diagnose, die nur als Nebendiagnose ausgewählt werden darf, als Hauptdiagnose übernommen wird. Die hier ausgewählte Hauptdiagnose wird für spätere Auswertung in ICdoc auch als ICD9 Hauptdiagnose gespeichert. Damit lassen sich vergleichende Berichte mit gemischtem Patientenkollektiv (vor- und nach 01.01.2001) über die ICD9-Hauptdiagnose erstellen.

Suchen

Dieser Button öffnet einen Dialog zum Suchen von Diagnosen.

Historie

Dieser Button öffnet einen Dialog mit einer Liste von den letzten 40 ausgewählten Diagnosen. Damit können Sie rasch und einfach oft verwendete Diagnosen auswählen.

Diagnosen entfernen

Eine Auswahl kann folgendermaßen entfernt werden. Selektieren Sie jene Diagnose im mittleren Fenster, die Sie aus der Auswahl löschen wollen und drücken Sie den Button mit dem grünen, nach oben zeigenden Dreieck. Das Entfernen der Hauptdiagnose erfolgt analog.

Alles löschen

Diesen Button drücken Sie, wenn Sie die gesamte Auswahl und die Hauptdiagnose löschen wollen.

OK

Der OK Button übernimmt die ausgewählten Diagnosen in das Feld "ICD10" im "ICD10 Katalog" Schirm und kennzeichnet die Hauptdiagnose durch fette Schrift.

Auswahlfenster der Bildschirmgröße anpassen

Das Auswahlfenster kann bei höherer Bildschirmauflösung (größer als 640x480) der eingesetzten Hardware angepaßt werden. Ziehen Sie dazu das rechte untere Eck des Fensters so lange nach außen, bis die von Ihnen gewünschte Größe erreicht ist.

An unteren Ende der oberen Auswahlliste befindet sich eine Trennlinie (Horizontale Linie mit verstärkter Schattenzeichnung) Diese Linie kann mit der Maus angeklickt und nach oben oder unten verschoben werden.

Die Modifikationen am Erscheinungsbild des Auswahlfensters werden bei Verlassen des Fensters gespeichert. Bei mehrmaligem Aufruf dieses Auswahlfensters werden die Position und Größe beibehalten.

ICdoc Manager

ICdoc Manager (Test i1050.pc1a) Benutzer: icdoc

Patientenverwaltung Ansicht Schnittstellen Auswertungen System Fenster Hilfe

← → ↺ ↻

31.10.2014

14093394 Doe10381 John Bett **Bett1** Tag **31.10.2014**

Bett	Patient	Tag
Bett1	Doe10381 John	Tag 8
Bett2	Doe10387 John	Tag 6
Bett3	Doe10396 Jane	Tag 4
Bett4	Doe10379 John	Tag 11
Bett5	Doe10406 John	Tag 1
Bett6	Doe10336 John	Tag 43
Bett8	Doe10335 John	Tag 45
Copra	Doe10407 John	Aufnahme

☐ alle Betten
☒ Mit Patientenkartei verknüpft
☒ Mit Aufnahme/Entlassung

Erwachsener Pat. (>=16J)

Aufnahme

Verbrennung
 Physiologie
 Dekurs
 MEL Intensiv
 Ernährung
 Infektion Übersicht
 Infektion
 Drainagen
 Katheter
 Scores Übersicht
 Score: TRISS
 Score: SAPS II
 Score: SAPS 3

Patienten-Identifikation

Stationsaufnahme 23.10.2014 14:45
 Familienname Doe10381
 Vorname John
 Geburtsdatum 19.01.1967
 Patienten ID (Station)
 Patienten ID (KIS)

Allgemein

Geschlecht männlich
 Alter 47 Jahre
 Größe 175 cm
 Gewicht 112 kg KOF 2,26 m²
 Aufnahme: Typ Medizinisch

Identifikation Allgemein Aufnahmegründe Infektionsüberwachung

Neuaufnahme Speichern Zurück

Dies ist das Kontrollzentrum der Applikation. Von hier aus können alle Aktionen gestartet werden.

Auf der linken Seite finden Sie die Bettenliste. Pro Bett finden Sie den Namen des Patienten, die Bettenbezeichnung und den Pflegetag (Beginnend bei 0).

Achtung: Da an einem Tag pro Bett mehrere Patienten aufgenommen und entlassen werden können, kann ein Bett mehrmals angezeigt werden!

Um das Datum zu wechseln, können Sie

- das Datum in das Editierfeld eingeben,
- mit den Pfeilen einen Tag vor oder zurückspringen,
- einen Tag mit Hilfe der Kalenderbuttons auswählen oder
- durch Doppelklicken des Editierfeldes auf das aktuelle Datum springen.

Um die Daten eines bestimmten Patienten bearbeiten zu können, wählen Sie den entsprechenden Patienten auf der Bettenliste aus und

- drücken Sie auf den Daten - Button,
- doppelklicken Sie auf den Patientennamen oder
- siehe *rechte Maustaste*

Schließen

Schließt die Bettenliste.

Alle Betten

Zeigt alle Betten (inklusive Reservebetten) an.

Mit Patientenkartei verknüpfen

Ist diese Option ausgewählt, dann wird das Datum bei Änderung in der Patientenkartei auch in die Bettenliste übernommen. Für ein schnelleres Arbeiten in der Patientenkartei schalten Sie diese Option aus.


Mit Aufnahme/Entlassung

Ist diese Option gewählt, wird am Aufnahme-/Entlassungstag der jeweilige Text anstelle des Pflegetags angezeigt.

Auffrischen

Das Aktualisieren der Anzeige erfolgt durch Drücken des Buttons links neben dem Datum. ICdoc frisst die Bettenliste bei jeder, den angezeigten Tag betreffenden Modifikation selbständig auf. Dieser Button findet nur in der Client-Server Variante von ICdoc Anwendung und kann im Normalfall ignoriert werden.

Rechte Maustaste

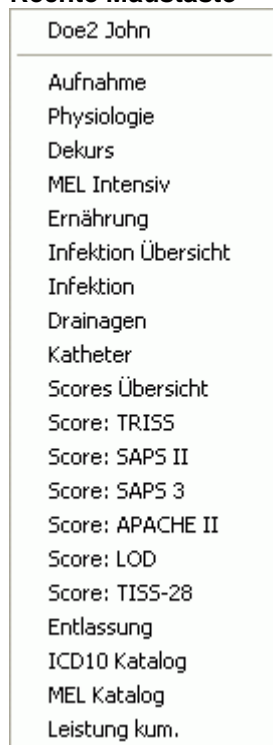

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Patientennamen. Es erscheint ein Menü, mit dem Sie bestimmen können, welcher Schirm geöffnet werden soll.

Patientenverwaltung

Startet ein Dialogfenster: *Patientensuche, Neuaufnahme, Bettenwechsel und Betten/Zeit Übersicht*. Für Anweisung zu den einzelnen Kommandos sehen Sie unter den entsprechenden Hilfethemen nach.

Mit *Beenden* schließen Sie die Applikation.

Ansicht

Symbolleiste anzeigen

Blendet die Symbolleiste ein und aus.

Optionen

Öffnet Optionendialog.

Schnittstellen

LKF Export

Datenbank-Export

Datenbank-Import

Freier Export

Vollständiger Export

ASDI Benchmarking Export

Auswertung

Bericht

Diagramme

System

Stationskonfiguration

Passwort ändern

Gelöschte Patienten wieder herstellen

Fenster

Dient zum Wechseln zwischen Fenstern. Zeigt immer alle gerade offenen Fenster.

Hilfe

Inhalt

Startet das Hilfeprogramm.

Hotline

Sie Erhalten Informationen über Hotline und Support.Berechtigungen

Berechtigungen

Hier werden die Einzelberechtigungen für Ihren Datenbank-User aufgelistet. Diese können vom Systemadministrator bei Bedarf geändert werden. Nähere Auskünfte dazu erteilt unsere Technische Hotline.

Release Notes

Die Release Notes informieren über alle Änderungen und Ergänzungen in ICdoc, die im Zuge eines Versionswechsels durchgeführt wurden.

Über...

Öffnet Fenster mit Informationen über *ICdoc*.

PDF-Dateien

Hier finden Sie die Hilfe und die Parameterbeschreibung als PDF-Dateien.



Infektionen

Dieses Erfassungs- und Auswertungsmodul wurde mit freundlicher Unterstützung von [Roche](#) entwickelt.

Der [Begleittext](#) zu diesem Erfassungsmodul wurde von Prof. M. Hiesmayr und H. Burgmann (AKH Wien) verfasst.

Die Dokumentation der nosokomialen Infektionen in ICdoc betrifft drei Eingabeschirme: Die Stationskonfiguration, den Aufnahmeschirm und den zusätzlich integrierten Schirm zur täglichen Erfassung der Infektionen.

Stationskonfiguration:

Infektionen - Erhebungsmethoden

Art der Intensivstation: Gemischt

Mikrobiologische Verfahren

Erhebung mikrobiologischer Befunde: Regelmäßig

Pulmonale Infektionen

Materialgewinnung: BAL-Bronchoskopie (>10⁴ CFU) (Wird als Standardeintrag bei der Tageserfassung verwendet)

Kultur intravasaler Katheter

☒ Semiquantitativ nach MAKI (>15 CFU)

☐ Quantitativ nach Brun-Buisson (>10³ CFU)

In der Stationskonfiguration (unter "System/Stationskonfiguration") wurden auswerterelevante Zusatzinformationen der Station zur Art der Infektionserhebung integriert.

Stationsaufnahme:

Überwachung nosokomialer Infektionen

Hospitalisierung vor Aufn.: Unter 48 h

Chirug. Eingriff innerhalb eines Monats vor Aufn.: Koronarchirurgie

Antibiotika bei Aufn.: Als Therapie

ZVK bei Aufn.: Am Aufnahmetag gelegt

☒ Kardiologische Überwachung (CCU)

Diese Abbildung zeigt die zusätzlichen Parameter, die bei Aufnahme des Patienten für die Dokumentation der Infektionen benötigt werden. Diese Teil des Aufnahmeschirms wird nur angezeigt, wenn im Optionenschirm die Dokumentation der Infektionen aktiviert ist.

Das Feld "ZVK b. A." wird auch automatisch gefüllt, wenn im Katheterschirm ein ZVK vor dem oder zum Zeitpunkt der Aufnahme dokumentiert wird.

Die Dauer der Hospitalisierung kann derzeit leider nicht automatisch übernommen werden (sofern der Zeitpunkt der Spitalsaufnahme eingetragen wurde), da bei der Spitalsaufnahme der Zeitpunkt fehlt und so die 48h nicht berechnet werden können.

Infektionserfassung pro Pflage-tag

Geräte/Katheter Einsatz		
<input type="checkbox"/> ZVK	<input type="checkbox"/> Beatmung nicht invasiv	<input type="checkbox"/> Suprapubischer Harnkatheter
<input type="checkbox"/> ZVK Neu/Wechsel	<input type="checkbox"/> Beatmung invasiv	<input type="checkbox"/> Transurethraler Harnkatheter
<input type="checkbox"/> Pulmonalkath.	<input type="checkbox"/> Reintubation	<input type="checkbox"/> Magen/Duodenalsonde

Antibiotikatherapie	
<input type="checkbox"/> Systemische Infektionszeichen	Therapie Nein

Infektionen		
	Kultur durchgeführt/Infektionsverdacht	Erfassungsstatus
ZVK	<input type="checkbox"/> Keime > <input type="text"/> <input type="text"/> Beurteilung 	●
Lungen	<input checked="" type="checkbox"/> Keime > BGNVAR9 andere Gram- nicht Enterobakterie > <input type="text"/> Beurteilung Kolonisation der Luftwege Materialgewinnung BAL-Bronchoskopie (>10⁴ CFU)	●
Harnweg	<input type="checkbox"/> Keime > <input type="text"/> <input type="text"/> Beurteilung 	●
Blutkulturen	<input type="checkbox"/> Keime > <input type="text"/> <input type="text"/> Beurteilung 	●
Wunden	<input type="checkbox"/> Keime > <input type="text"/> <input type="text"/> Beurteilung 	●


Die tägliche Dokumentation der Infektionen teilt sich auf in die Dokumentation der eingesetzten Geräte bzw. Katheter und der tatsächlichen Dokumentation der Infektionen.

Die drei Katheter unter "Geräte/Katheter Einsatz" entsprechen den Feldern im TISS-28 und wirken auch vice-versa. Die Harnkatheter besitzen kein Äquivalent im TISS-28, können aber auch im Drainagenschirm eingepflegt werden. In diesem Fall werden die Werte aus dem Drainagenschirm übernommen. Die Beatmung wird ebenfalls aus dem TISS-28 Schirm übernommen (aus dem Feld "Atemwegszugang"), der hier eingetragene Wert kann allerdings nicht in den TISS-28 Schirm übernommen werden.


Das Feld "Dokumentation abgeschlossen" ist manuell nach abgeschlossener Dokumentation zu setzen. Diese Feld dient zur Überprüfung der Dokumentationstätigkeit und kann im entsprechenden Bericht (Infektionen, fehlende Werte) überprüft werden. Bei Änderungen in diesem Bildschirm wird vor dem Speichern nachgefragt, ob die Dokumentation für diesen Tag und diesen Patienten bereits abgeschlossen ist.

Der Button "Vortagswerte übernehmen" bezieht sich in diesem Schirm lediglich auf die Übernahme der Geräte bzw. Katheter.

Im unteren Bereich können die Keime (maximal 2 pro Bereich und Tag) entweder aus einer Liste gewählt werden, oder direkt in den beiden Eingabefeldern mit ihrer Kennung eingetragen werden. Zusätzlich besteht noch die Möglichkeit der Schnellauswahl aus den 10 in der Station am häufigsten dokumentierten Keime.

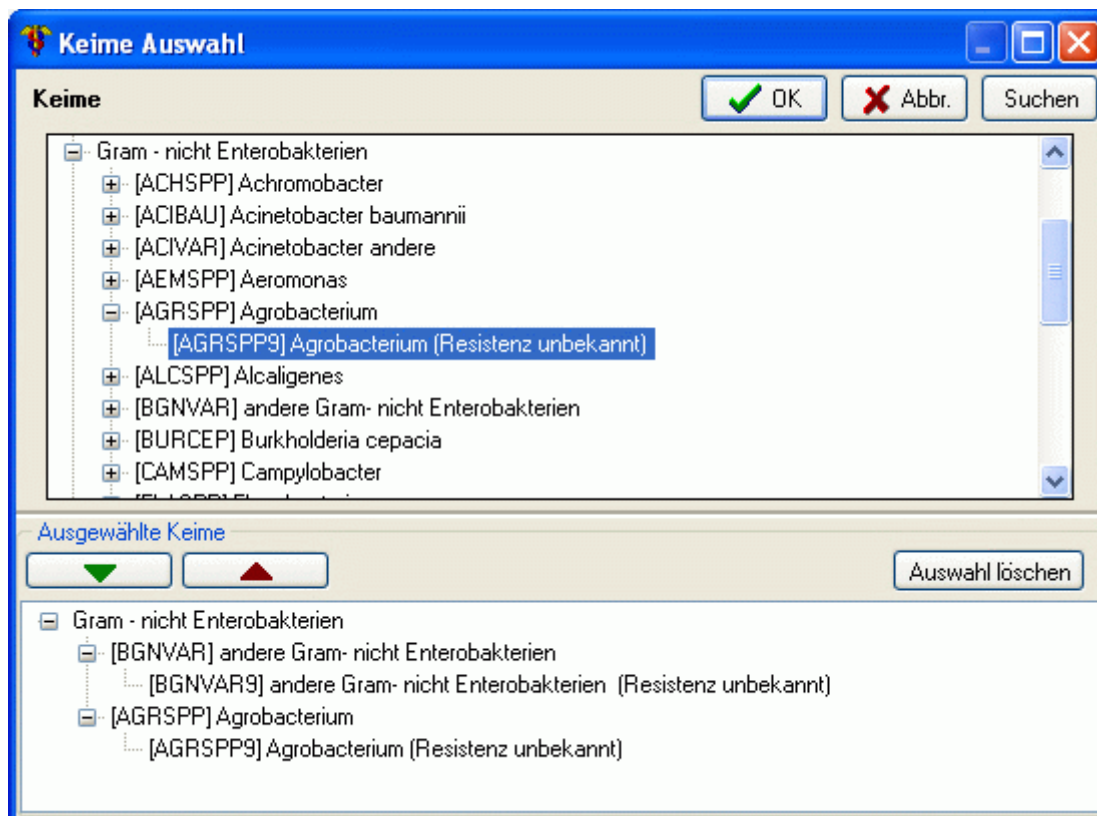

Die Auswahl der Keime aus der Keimliste erfolgt aus einer hierarchischen Liste (ähnlich ICD10). Pro Bereich dürfen pro Tag nur maximal 2 Keime gewählt werden. Die Auswahl kann unspezifisch (ohne Angabe der Resistenz) oder spezifisch erfolgen. Wird ein Keim mit einer bestimmten Resistenz gewählt, kann dieser Keim kein 2. mal ausgewählt werden.

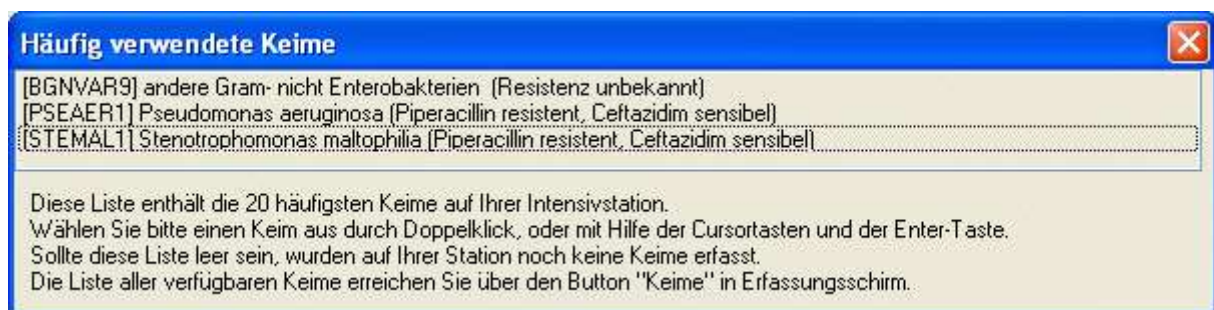

Die Auswahl der Keime aus der Schnellauswahl erfolgt durch Doppelklick auf einen der bereits früher verwendeten Keime. Diese Schnellauswahl ist über den Button links neben dem entsprechenden Keimfeld (durch einen Pfeil nach rechts gekennzeichnet) erreichbar.

[Weiter zum Medizinischen Begleittext](#)

Infektionen, Begleittext von Prof. M. Hiesmayr und H. Burgmann (AKH Wien)

Überwachung nosokomialer Infektionen: Zusammenfassung und Definitionen

Prof. M. Hiesmayr und H. Burgmann

Das neue Modul soll Ihnen erlauben alle Infektionen, die bei Ihren Patienten auftreten zu dokumentieren. Ein besonderes Augenmerk wird jenen Infektionen zu widmen sein, welche nach einem Aufenthalt von mindestens 48 Stunden auftreten, die als nosokomiale Infektionen bezeichnet werden. Die Dokumentation nosokomialer Infektionen kann zur Qualitätsbeurteilung innerhalb der

Station über die Zeit und zwischen Stationen bei Teilnahme an dem Projekt Intensiv 2000 angewandt werden. Die Beurteilung ergibt sich aus dem Vergleich Risikoexposition und Häufigkeit der Infektionen. Eine Voraussetzung der Vergleichbarkeit ist die Verwendung definierter Kulturmethoden insbesondere die Verwendung von quantitativen oder semi-quantitativen Kulturmethoden für gewisse Materialien, wie Katheter und Lavageflüssigkeiten.

Voraussetzungen für eine korrekte Dokumentation sind die Definition der angewandten mikrobiologischen Methoden in der Stationskonfiguration, die einmalige Bewertung des Patienten bei der Aufnahme und die tägliche Dokumentation von Risikoexposition und aufgetretenen Infektionen. Wenn Sie auch die Antibiotikaentscheidungen dokumentieren, können Sie auch ihre typische Vorgangsweise beurteilen.

Drei Punkte sollten konsequent eingehalten werden:

1. **tägliche Dokumentation der Risikoexposition**
2. **Dokumentation der Abnahme von Kulturen am Tag der Abnahme sowie die gleichzeitige klinische Bewertung im Feld Beurteilung**
3. **Dokumentation der nachgewiesenen Keime und wenn möglich die Indikatorresistenzen am Tag der Kulturabnahme**

Wann sollen Kulturen abgenommen werden?

-jeder Katheter, ob arteriell oder zentralvenös, der nach einem Aufenthalt von mindestens 48 Stunden entfernt wird.

-alle anderen Kulturen (Lunge, Harn und Blutkulturen) werden üblicherweise nur bei Infektionsverdacht durchgeführt.

-Kulturen aus dem Bereich der Operationswunden wurden in die Erfassung aufgenommen, da ihnen eine große Bedeutung im operativen Bereich zukommt und sie eine deutliche Verlängerung der Aufenthaltsdauer und der Morbidität bewirken können.

Beurteilung der Infektionen und Kulturen:

Es erscheint uns auch besonders wichtig und hilfreich für Ihre Auswertung, bei jeder abgenommenen Kultur eine Beurteilung vorzunehmen. Damit ist es möglich die Beziehung zwischen den Kulturergebnissen -auch den negativen- und den lokalen oder systemischen Infektionszeichen herzustellen.

Definitionen bei der Dokumentation der einzelnen nosokomialen Infektionen:

Lunge: Nosokomiale Lungeninfektion:

Sicher oder wahrscheinlich bei gleichzeitigem Vorliegen von:

1. Lungenröntgen oder CT Scan mit neuer Verschattung, welche 48 Stunden nach Aufnahme auftritt
2. Positive Kultur nach einer semiquantitativen Methode:
BAL>104 CFU/ml
Bürste Wimberley>103 CFU/ml
Combicath>103 CFU/ml
Mini_BAL>103 CFU/ml

Oder

Pleuraler oder Lungenabszess mit positiver Kultur

Positive Kultur aus der Pleuradrainage und Keim identisch mit Trachealsekret

Positive Blutkultur, wenn kein anderer Herd vorliegt und Keim identisch mit Trachealsekret

Sputum falls Legionellen, Aspergillus, Mykobakterien

Positive Legionellen Serologie oder Antigene im Harn

Definition multipler Episoden:

Falls nach einer Periode der Verbesserung die Kriterien erneut erfüllt sind mit einem anderen als dem vorherigen Keim. Ein Intervall von 3 Tagen zwischen den Untersuchungen erscheint vernünftig.

Nicht als neue Episode zu werten sind folgende Situationen:

- falls zwischenzeitlich keine klinische Besserung eintritt, auch wenn neue Keime nachgewiesen werden (Superinfektion)
- Ausweitung der Symptome an andere Orte mit gleichem Keim (Extension)
- Klinische Besserung aber am selben Ort den selben Keim (Rückfall)
- Klinische Besserung und identischer Keim mit anderem Antibiogramm.

Zentralvenöse und arterielle Katheterinfektion:

Zwingend ist eine semiquantitative oder quantitative Kultur des Katheters

- semiquantitativ nach MAKI>15 CFU (Standardmethode)
- quantitativ nach Brun-Buisson>103 CFU/ml

Die Verwendung eines Transportmediums schließt eine semiquantitative Kultur aus, daher sollten Katheter in sterilen Nativröhrchen mit 1 ml NaCl 0.9% -um eine Austrocknung zu verhindern- zur mikrobiologischen Analyse geschickt werden.

Katheter müssen mindestens 48 Stunden nach Aufnahme gelegen sein.

Technik bei der Entfernung: einfacher Alkohol oder antiseptische Seife, Spülen, Trocknen lassen.

Keine Desinfektionsmittel, da Keimwachstum behindert werden kann.

Falls ein Patient einen Katheter am letzten Tag seines Aufenthaltes auch noch dokumentiert hat und keine Kultur an diesem Tag abgenommen wurde, wird angenommen, daß der Patient die Station mit liegendem Katheter verlassen hat.

Harnwegsinfekte:

- Harnkatheter in den letzten 7 Tagen und Harnkultur > 105 Keime/ml, jedoch maximal 2 Keime isoliert
- Bei fehlender Katheterisierung oder fehlenden klinischen Symptomen, 2 konsekutive Kulturen mit >105 Keimen/ml, wiederum mit maximal 2 Keimen.
- Fieber > 38°C, Pollakisurie, Dysurie, Suprapubischer Schmerz
und
Harnkultur mit >105 Keimen/ml
oder Harnkultur >103 Keime/ml und gleichzeitig Leukozyturie >104/ml

Bakterämie:

- eine positive Blutkultur mit bekannt pathogenen Keimen
oder
- zwei Blutkulturen innerhalb von 48 Stunden mit folgenden Keimen
 - Staph koag neg
 - Acinetobacter sp
 - Corynebacterium sp
 - Bacillus sp
 - Micrococcus sp
 - Propionibacterium sp
 - Bazillen gram neg und aerobier: Alcaligenes, Stenotrophomonas
 - Pseudomonas außer aeruginosa
 - Oder andere Hautkeime.

Bei positivem Keimnachweis in der Blutkultur kann auch eine Zuordnung zu einem möglichen Infektionsursprung erfolgen.

Zurück zur [Infektionserfassung](#).

ASDI Benchmarking Export

Der Export für das ASDI Benchmarking Projekt erstellt Exportdateien zur wissenschaftlichen Auswertung der Daten.

Datumsgrenzen

Das Zeitintervall kann entweder direkt in die Datumsfelder eingegeben oder über die Zeit-Shortcuts ausgewählt werden.

Datei

Der Dateiname wird automatisch beim Öffnen dieses Dialoges erstellt. Er setzt sich zusammen aus: I, Stations ID und dem Tagesdatum im Format JJJJMMTT. Dieser Dateiname ist nur ein Vorschlag. Sie können auch jeden anderen Dateinamen verwenden.

Pfad

Geben Sie den Pfad an wohin *ICdoc* die Exportdatei speichern soll. Der Browser hilft Ihnen dabei.

Export

Der Button **Export** startet den Export für das ASDI Benchmarking Projekt.

Anmerkungen

Der Export basiert auf dem Standard Datenbank-Export. Der Unterschied besteht in der automatischen Auswahl von:

- Nicht Incl. Station
- Anonym
- Komprimierte Ausgabe (es wird automatisch eine *.ZIP - Datei erstellt)
- Passwortgeschützte Ausgabe

Schnittstellen zwischen Krankenhaussystemen und ICdoc

Folgende manuelle Schnittstellen zu Krankenhaussystemen (KIS) sind in ICdoc integriert:

◆ [KAV-KIS](#)

Alle anderen Schnittstellen sind als automatisch arbeitende Hintergrundprozesse implementiert und besitzen daher keine spezifische Oberfläche in ICdoc.

Schnittstelle zwischen KAV-KIS und ICdoc

Die Schnittstelle zwischen KAV-KIS und ICdoc wird in Zusammenarbeit mit dem EDV-Personal der Gemeinde Wien und Mitarbeitern der Firma büll informatik in den dafür vorgesehenen Stationen vor Ort installiert.

Nach erfolgter Installation erweiterte sich die Funktionalität von ICdoc um folgende Punkte:

Übernahme der demografischen Patientendaten bei Neuaufnahme

Der Neuaufnahmeschirm wird ergänzt um einen zusätzlichen Button **KIS-Übernahme**.

Geben Sie die KH-Aufnahmezahl im entsprechenden Eingabefeld ein und drücken Sie den Button **KIS-Übernahme**. Die demografischen Daten werden vom KIS übernommen und sofort angezeigt. Der Patiententyp wird automatisch berechnet.

Folgende Informationen müssen noch zusätzlich erfaßt werden: Aufnahmedatum und Zeitpunkt in der Station und das Bett, in das der Patient gelegt werden soll.

Nachträgliche Korrektur der demografischen Patientendaten im Aufnahmeschirm

Der Aufnahmeschirm wird in der unteren Leiste ergänzt um einen zusätzlichen Button **KIS-Übernahme**.

Mit diesem Button können demografische Patienteninformationen nachträglich mit den im KIS gespeicherten Patienteninformationen abgeglichen werden.

Übernahme der demografischen Patienteninformationen und der Entlassungsparameter aus dem Krankenhaus für Patienten in einem frei wählbaren Zeitraum

Das Menü Schnittstellen wird um den Eintrag **KAV-KIS** erweitert. Nach Auswahl dieser Funktion wird folgender Eingabeschirm angezeigt:

KIS-Schnittstelle

von 01.10.2006 bis 31.12.2006

Schnellauswahl

Monat -

Quartal 4/2006

Halbjahr -

Jahr -

Datenübernahme simulieren

KIS-Daten übernehmen Schließen

Die Auswahl des Zeitraums für die Datenübernahme erfolgt wie gewohnt entweder über direkte Eingabe der beiden Datumsgrenzen oder durch Auswahl eines vordefinierten Intervalls mit Hilfe der Auswahlbuttons in der Schnellauswahl.

Mit dem Button **Datenübernahme simulieren**, werden alle Aktivitäten in einem separaten Textfenster angezeigt, aber nicht in der Datenbank gespeichert. Diese Funktion ist für die Übernahme der Altdaten gedacht und im laufenden Betrieb nicht mehr notwendig.

Mit dem Button **KIS-Daten übernehmen** erfolgt ein Abgleich der in ICdoc gespeicherten demografischen Patientendaten mit den im KIS gespeicherten Patientendaten. Zusätzlich werden aus dem KIS die Entlassungsparameter (Spitalsentlassung und Entlassungszustand) für alle ausgewählten Patienten übernommen.

Katalogisierte Leistungen

Leistungen Auswahl

Leistungen

OK Abbr. Suchen Historie

AUSGEWÄHLTE OPERATIVE LEISTUNGEN

- I. SCHÄDEL, GEHIRN, WIRBELSÄULE, RÜCKENMARK, PERIPHERE NERVEN
- II. AUGEN, ORBITA
- III. OHREN, NASE, MUNDH., RACHEN, GESICHT, GESICHTSSCHÄDEL, HALS
 - ÄUSSERES OHR (OHRMUSCHEL UND ÄUSSERER GEHÖRGANG)
 - MITTELOHR (TROMMELFELL, PAUKENHÖHLE, MASTOID, OHRTRUMPEL)
 - [1651] Revision des Mittelohres und des Mastoids

Ausgewählte Leistungen

In die Auswahl Auswahl löschen

[1651] (0+1=1) Revision des Mittelohres und des Mastoids (HW=0)

Leistung [1651] Revision des Mittelohres und des Mastoids

	auto.	man.	sum.
Anzahl	0	1	1

Zulässiger Höchstwert 0

Dieser Schirm dient zur Auswahl der vom Patienten in Anspruch genommenen medizinischen Leistungen. Er wird geöffnet, wenn Sie im MEL Katalog-Schirm den Button "MELs modifizieren"

drücken. Im oberen Fenster befinden sich alle auswählbaren, katalogisierten Leistungen. Das untere Fenster beinhaltet die ausgewählten Leistungen.

Leistungen auswählen

Um eine Auswahl vorzunehmen, selektieren Sie eine Leistung im oberen Fenster und drücken Sie den Button mit dem roten, nach unten zeigenden Dreieck. Sie können auch durch Doppelklicken einen Eintrag auswählen.

In die Auswahl

Eine weitere Möglichkeit eine Leistung in die Auswahl zu übernehmen besteht darin, die Identifikationsnummer, die vor der Leistung steht, in das Editierfeld in der Mitte des Schirms einzugeben und den Button "In die Auswahl" zu drücken.

Anzahl der Leistungen

Bevor Sie diesen Schirm öffnen, können im MEL Katalog-Schirm die Leistungen automatisch aus den bisher eingegebenen selektiven Leistungen berechnet werden, indem Sie den Button "MELs übernehmen" drücken. Wenn Sie nun in diesem Schirm eine Leistung markieren, wird die Anzahl im unteren Fensterausschnitt angezeigt. Um die Anzahl zu erhöhen, editieren Sie das Feld "Anzahl man.". Die Gesamtanzahl ("Anzahl sum") wird durch Addition des Feldes "Anzahl auto." und "Anzahl man." berechnet. Durch das Entfernen der Leistung können Sie die automatische Berechnung wieder rückgängig machen.

Anmerkung: zeigt der zulässige Höchstwert 0, bedeutet dies, dass laut Katalog kein Limit eingetragen wurde.

Suchen

Dieser Button öffnet einen Dialog zum Suchen von Leistungen.

Historie

Dieser Button öffnet einen Dialog mit einer Liste der letzten 40 ausgewählten Leistungen. Damit können Sie rasch und einfach oft verwendete Leistungen auswählen.

Leistungen entfernen

Eine Auswahl kann folgendermaßen entfernt werden: Selektieren Sie die Leistung im unteren Fenster, die Sie aus der Auswahl löschen wollen und drücken Sie den Button mit dem grünen, nach oben zeigenden Dreieck.

Auswahl löschen

Diesen Button drücken Sie, wenn Sie die gesamte Auswahl löschen wollen.

OK

Der OK Button übernimmt die ausgewählten Leistungen in das Feld "katalogisierte Leistungen" im MEL Katalog-Schirm

Auswahlfenster der Bildschirmgröße anpassen

Das Auswahlfenster kann bei höherer Bildschirmauflösung (größer als 640x480) der eingesetzten Hardware angepaßt werden. Ziehen Sie dazu das rechte untere Eck des Fensters so lange nach außen, bis die von Ihnen gewünschte Größe erreicht ist.

An unteren Ende der oberen Auswahlliste befindet sich eine Trennlinie (horizontale Linie mit verstärkter Schattenzeichnung). Diese Linie kann mit der Maus angeklickt und nach oben oder unten verschoben werden.

Die Modifikationen am Erscheinungsbild des Auswahlfensters werden bei Verlassen des Fensters gespeichert. Bei mehrmaligem Aufruf dieses Auswahlfensters werden die Position und Größe beibehalten.

Neuaufnahme

Neuaufnahme

Patienten-Identifikation

Stationsaufnahme: 19.03.2007 17:27

Bett: Bett1 ☐ ...alle Betten

Familienname: Doe

Vorname: John

Patienten ID:

KH-Aufnahmezahl: 07000001

Geburtsdatum: 01.01.1970

Patiententypus: Erwachsener Pat. (>=16J)

Generierter Patiententypus: Erwachsener Pat. (>=16J)

Buttons: Externe Liste, KIS-Übernahme, Felder leeren, Eintragen, Abbrechen

Mit Hilfe dieses Bildschirmes wird ein neuer Patient aufgenommen.

Aufnahmezeitpunkt

Doppelklicken setzt das aktuelle Tagesdatum, oder geben Sie ein entsprechendes Datum ein.

Bett

Wählen Sie aus der Bettenliste ein Bett aus.

Achtung: Sie können Patienten nur auf leere Betten aufnehmen.

Familienname

Geben Sie den Familiennamen des Patienten ein.

Vorname

Geben Sie den Voramen des Patienten ein.

Patienten ID

Geben Sie die intern benutzte Identifikationsnummer ein (z.B. die Protokollbuchnummer).

KH-Aufnahmezahl

Geben Sie die Krankenhaus Identifikationsnummer ein.

Achtung: Patienten ID oder KH-Aufnahmezahl und Aufnahmezeitpunkt sind notwendig, um den Patienten eindeutig zu identifizieren und aufnehmen zu können.

Geburtsdatum

Geben Sie das Geburtsdatum des Patienten ein.

GebGew

Dieses Eingabefeld erscheint, wenn das sich aus Aufnahmezeitpunkt und Geburtsdatum errechnete Alter kleiner gleich 28 Tage ist. Geben Sie das Geburtsgewicht ein. Dieses Feld wird benötigt, um in Abhängigkeit des Geburtsgewichts bei Neugeborenen den Patiententypus festzulegen.

Generierter Patiententypus

Anzeige des sich aus Alter und Geburtsgewicht errechneten Patiententypus.

Patiententypus

Sie können den Patiententypus auch manuell ändern. Allerdings laut Verordnung nur in die Richtung des fortgeschrittenen Patientenalters. Alle weiteren Erfassungsspezifika, wie beispielsweise Score-

Erfassungsschirme, hängen von der in diesem Feld getroffenen Auswahl ab und nicht vom vorgeschlagenen, sprich Generierten Patiententypus.

Externe Liste

Öffnet das Fenster zur Übernahme aus der [Externen Patientenliste](#).

Felder leeren

Mit diesem Button können alle Eingabefelder im Neuaufnahmeschirm neu initialisiert werden. Dieser Vorgang erfolgt automatisch bei Neustart von *ICdoc* bzw. bei der Aufnahme eines Patienten. Drücken Sie jedoch Abbrechen, so bleiben die Einträge beim erneuten Starten dieses Schirmes erhalten.

Bestätigen Sie die Eingabe mittels des Eintragen Buttons oder brechen Sie mittels Abbrechen ab.

Optionen

[Standard](#)

[Module](#)

[LKF](#)

[Externe Liste](#)

[Eingabeschirme](#)

[Sprache](#)

Optionen (Standard)

Export

LKF Export X Schließen

☐ Aktuelles Monat inkludieren

Von 01.09.2014 Bis 30.09.2014

Monat Sep./2014

Quartal -

Halbjahr -

Jahr -

Auswahl Entlassungszeitpunkt IBS + KH Zeitpunkt

Datei I4118102.901

Pfad C:\Temp\ Pfad wählen

Modell LKF 2012 Export

Bereits exportierte Dateien im Pfad

I4118102.901

Export erfolgreich beendet.

Obligat/Fakultativ

Sie können bestimmen, ob Leereinträge bei obligaten Feldern farbig (blau) hinterlegt werden sollen. Als Obligat gelten alle Felder aus dem Datensatz **BMSG Intensiv**.

MDS-Erweiterung

Wählen Sie den für Sie gültigen Datensatz für 1998 aus.

ASDI Datensatz Intensivmedizin

ASDI Datensatz Neonatologie

Diese Funktion betrifft nur Patienten, die vor dem 31.12. 1998 erfaßt wurden.

Performance

Wenn die Datenbank auf einem externen Server installiert wurde und ICdoc auf dem lokalen Rechner, kann es zweckmäßig sein, die Diagnosen aus einer lokal verfügbaren Datei zu lesen. Welche Variante (aus der Datenbank lesen oder aus der lokalen Datei lesen) die schneller ist, muss für jede Installation ausgetestet werden.

Optionen (Module)

Optionen

Standard **Module** LKF Externe Liste Eingabeschirme Sprache

Freigabe der Module

Identifikation

ICdoc Stations ID: 1001

Rechnername: pc1a

Rechnerkennung: \$BF977463

Freigabeschlüssel: 78343011BE0D04B1AF1CF53C832653CC

	Pro	Module	Freigabe
	Ja	Pro Version	bis: 31.01.2015
	Ja	Betten/Zeit Übersicht	bis: 31.01.2015
	Ja	Berichte	bis: 31.01.2015
	Ja	Diagramme	bis: 31.01.2015
	Ja	LKF Export	bis: 31.01.2015
	Ja	Freier Export	bis: 31.01.2015

Information

Teilen Sie dem Österreichischen Zentrum für Dokumentation und Qualitätssicherung in der Intensivmedizin die Rechnerkennung mit. Tragen Sie den von ihr erhaltenen Freigabeschlüssel in das entsprechende Feld ein. Alle Module mit einem grünen Punkt sind nun freigegeben.

OK
 Abbrechen
 Übernehmen

Mit diesem Fenster können einzelne Module (wie z.B. Betten/Zeit Übersicht) oder Modulgruppen (wie z.B. Pro) freigeschalten werden.

ICdoc Stations-ID

Für jede Station wird von der ASDI eine 4-stellige Stations-ID vergeben. Diese Stations-ID muß bei Anforderung eines neuen Freigabeschlüssels bekanntgegeben werden. Diese Stations-ID muß nach der Erstinstallation im Eingabeschirm für die Stationskonfiguration gesetzt werden.

Rechnername

Der Rechnername ist nur bei Netzwerkinstallationen von Bedeutung.

Rechnerkennung

Für jeden Rechner wird eine hexadezimale Zahl ermittelt. Geben Sie diese bekannt, wenn ein neues Modul freigeschalten werden soll, oder wenn die Laufzeit des aktuellen Freigabeschlüssels verlängert werden soll.

Freigabeschlüssel

Tragen Sie hier Ihren Freigabeschlüssel ein. ICdoc überprüft diesen und zeigt den Status der Module in der darunter liegenden Liste an.

Optionen (LKF)

Optionen

Standard Module **LKF** Externe Liste Eingabeschirme Sprache

LKF Optionen

Auswahl Stationstyp

LKF Stationstyp: Allgemeine IBS

Prefix für KH-Aufnahmezahl:

Auswahl Automatische LKF Eingabepfung

LKF Prüfung: Schnittstelle

LKF Prüfung ab Stationsaufnahme: 01.10.2013

☒ OK ☒ Abbrechen

LKF Stationstyp

Folgende Stationstypen stehen zur Auswahl:

Allgemeine IBS

Pädiatrische IBS

Neonatologische IBS

In Abhängigkeit des gewählten Stationstyps versucht ICdoc für neu aufgenommene Patienten den für die Station üblichen Patiententyp auszuwählen. So werden in den Allgemeinen Intensivstationen (*Allgemeine IBS*) alle Patienten mit dem Patiententyp "**Erwachsener Pat. ($\geq 16J$)**" erfasst. Die entsprechenden Ersetzungsregeln sind der Beschreibung des Datensatzes **BMGF Intensiv** bzw. **LKF Intensiv** entnommen.

Die Auslieferung von ICdoc erfolgt ohne Auswahl eines speziellen Stationstyps. Das heißt, daß alle neu aufgenommenen Patienten vorerst mit dem berechneten Patiententyp gespeichert werden. Eine nachträgliche Änderung des Patiententyps im Rahmen der Verordnung für den **LKF Intensiv** ist im Aufnahmeschirm weiterhin möglich, muß aber für jeden einzelnen Patienten manuell eingestellt werden.

Prefix für KH-Aufnahmezahl

Im Normalfall besteht die KH-Aufnahmezahl aus der Jahreszahl und einer fortlaufenden Nummer. Soll dieser erfaßten Nummer zusätzlich noch eine immer gleich bleibende Kennung vorangestellt werden, ist diese Kennung im Feld *Prefix für KH-Aufnahmezahl* einzugeben. Diese Kennung wird im

Aufnahmeschirm angezeigt, lässt sich dort aber nicht mehr ändern. Die Kennung wird bei dem Export laut **LKF Intensiv** der KH-Aufnahmezahl vorangestellt.

Achtung:Die laufende Jahreszahl darf in keinem Fall in dieses Prefix eingetragen werden, da sonst die Eindeutigkeit über den Jahreswechsel hinaus nicht mehr gegeben ist!

Auswahl Automatische LKF Eingabeprüfung

Hier kann eingestellt werden, ob die automatische LKF-Eingabeprüfung aktiviert werden soll. Wenn diese aktiviert ist, werden die Eingaben automatisch nach den von der LKF vorgegebenen Regeln validiert.

Sollte in Ihrem Haus eine automatische LKF-Schnittstelle installiert sein, ist die Auswahl voreingestellt auf "Schnittstelle" und kann nicht geändert werden.

Externe Patientenliste

Die externe Patientenliste dient zur Übernahme von Aufnahmezeiten.

Optionen

Standard Module LKF Externe Liste Eingabeschirme Sprache

Externe Patientenliste

Datei für Zugang
E:\icdoc\Bin\extpatls.ini Browse

Datei für Abgang
E:\icdoc\Bin\extpatls.ini Browse

Zusätzliche Daten


☐ Score: TRISS
☐ MEL Katalog
☐ ICD9/ICD10 Katalog

Diese Einstellungen beziehen sich sowohl auf das Einlesen aus der externen Liste als auch auf das Speichern in die Liste.

OK Abbrechen Übernehmen

Wählen Sie im Optionensschirm (Menü Ansicht-Optionen) den Reiter Patientenliste. Die Daten für die Externe Patientenliste werden in einer Datei mit dem Namen expatls.ini gespeichert. Wählen Sie einen Pfad für die Datei der Patienten die Sie in Ihrer Station aufnehmen wollen und einen für die Datei in der entlassene Patienten gespeichert werden können. Sie können dabei auch die gleiche Datei verwenden. Wenn Sie einen Netzwerkpfad verwenden, versichern Sie sich, daß Sie ausreichende Rechte zum Lesen bzw. zum Schreiben besitzen.

Aufnahmedatenübernahme

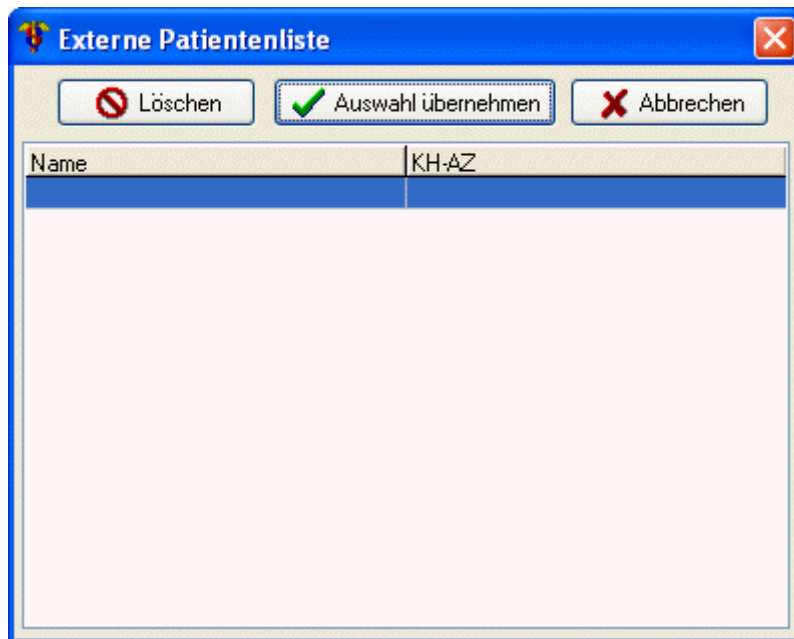

Wird im [Neuaufnahmeschirm](#) der Button Externe Liste gedrückt, dann erscheint das Fenster Externe Patientenliste. Markieren Sie auf den Patienten, dessen Daten Sie aus der Liste übernehmen wollen und drücken Sie dann auf Auswahl übernehmen. Mit Löschen wird der markierte Patient aus der Patientenliste gelöscht. Abbrechen schließt das Fenster ohne Übernahme.

Patient in Externe Patientenliste aufnehmen

Drücken Sie im Entlassungsschirm den Button ->Externe Liste.

Optionen (Eingabeschirme)

Optionen

Standard Module LKF Externe Liste **Eingabeschirme** Sprache

Eingabeschirme einblenden

Eingabeschirme Alle anderen Schirme sind immer eingeblendet.

Erwachsene Pat.

<input checked="" type="checkbox"/> Physiologie	<input checked="" type="checkbox"/> Drainagen	Score: TRISS
<input checked="" type="checkbox"/> Dekurs	<input checked="" type="checkbox"/> Katheter	<input type="checkbox"/> Nur bei Traumapat.
<input checked="" type="checkbox"/> MEL Intensiv	<input checked="" type="checkbox"/> Score: SAPS II	<input checked="" type="checkbox"/> Score: SOFA
<input checked="" type="checkbox"/> Ernährung	<input checked="" type="checkbox"/> Score: APACHE II	<input checked="" type="checkbox"/> MEL Katalog
<input checked="" type="checkbox"/> Infektion		<input checked="" type="checkbox"/> ICD9 Katalog
<input checked="" type="checkbox"/> Verbrennung		<input checked="" type="checkbox"/> ICD10 Katalog

Neonat. Pat.

☒ Dekurs

☒ Physiologie

☒ Scores NWS

☒ MEL Katalog

☒ ICD9 Katalog

☒ ICD10 Katalog

Pädiatrische Pat.

☒ Dekurs

☒ MEL Intensiv

☒ Ernährung

☒ Infektion

☒ Drainagen

☒ Katheter

☒ MEL Katalog

☒ ICD9 Katalog

☒ ICD10 Katalog

Standardkonfigurationen

Konfiguration: Maximal

- . LKF Daten und Zusatzdaten für Projekt Intensiv
- . Daten für die Patientendokumentation
- . Schirme für die MEL - Eingabe

OK
 Abbrechen
Übernehmen

Wählen Sie im Optionenshirm (Menü Ansicht/Optionen) den Reiter Eingabeschirme. Mit diesem Optionenshirm lässt sich konfigurieren, welche optionalen Bildschirme für die Erfassung der Patientendaten angezeigt werden sollen. Eingabeschirme, die für die Erfassung von Patientendaten laut Datensatz BMSG Intensiv vorgeschrieben sind, lassen sich nicht ausblenden und sind deshalb in der obigen Auswahl auch nicht angeführt.

Für den Scoreshirm TRISS lässt sich noch angeben, ob dieser Shirm nur bei Traumapatienten angezeigt werden soll. Die Entscheidung, ob es sich bei dem ausgewählten Patienten um einen Traumapatienten handelt, hängt von der Auswahl des Haupt-Aufnahmegrundes im Aufnahmeshirm, ab.

Im unteren Teil befindet sich noch eine Kurzauswahl mit einigen Standardkonfigurationen, wie sie üblicherweise in den Intensivstationen verwendet werden. Die Auslieferung von ICdoc erfolgt mit der Einstellung: *Maximal*, in der alle verfügbaren Eingabeschirme angezeigt werden.

Passwort ändern

Mit dieser Dialogbox können Sie das Passwort ändern. Der Standard User in ICdoc heißt **ICdoc**. Bitte geben Sie das alte und das neue Passwort ein und bestätigen Sie mit **OK** oder brechen Sie den Vorgang mit **Abbrechen** ab.

Sondermodule

- ◆ [Ernährung](#) mit freundlicher Unterstützung von [Fresenius Kabi](#) und [Begleittext](#) von Prof. Dr. Wilfred Druml (AKH Wien).
- ◆ [Infektionen](#) mit freundlicher Unterstützung von [Roche](#) und [Begleittext](#) von Prof. M. Hiesmayr und H. Burgmann (AKH Wien).

Stationskonfiguration

Dieser Schirm dient zur Eingabe der Stations-spezifischen Daten. Für eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Datenfelder gehen Sie folgendermaßen vor: Wählen Sie im Hauptmenü der Hilfe den Punkt *Der ASDI Minimale Datensatz* aus, oder Sie stellen den Cursor in das fragliche Feld und drücken die Taste F1.

ACHTUNG! Nicht angezeigt ist hier die **Bettenkonfiguration**. Bevor Sie mit *ICdoc* arbeiten können, müssen Sie dem Programm die Anzahl der Betten bekannt geben. Drücken Sie dazu auf den **"Bett hinzufügen"** - Knopf um ein neues Bett zu generieren und geben Sie den Namen des Bettes ein. Bitte immer nur ein Bett auf einmal konfigurieren!
Der Name des Bettes (standardmäßig als "Bett n" bezeichnet) kann geändert werden.
ICdoc stellt zwei Arten von Betten zur Verfügung:

Standard

Diese Betten werden in der Benutzeroberfläche immer angezeigt.

Reserve

Diese Betten werden normalerweise ausgeblendet und nur bei Auswahl der Option "alle Betten anzeigen" sichtbar gemacht.

Schließen

Schließt den Schirm und speichert alle Einträge.

Datum

Hier können Sie innerhalb eines Bettes auf jedes beliebige Datum springen.

Speichern

Speichert die Änderungen, die seit Aufrufen des Schirmes (bzw. nach dem letzten *Speichern*) durchgeführt wurden.

Zurücksetzen

Macht die Änderungen rückgängig, die seit Aufrufen des Schirmes (bzw. nach dem letzten *Speichern*) durchgeführt wurden.

Suche Diagnosen

Diagnosensuche ICD10

Suchmuster:

Suchsteuerung: ☒ Exaktes Muster ☐ Teilbäume

Suchfortschritt:

[A39.5] Herzkrankheit durch Meningokokken
[B57.1] Akute Chagas-Krankheit ohne Herzbeteiligung, Akute Chagas-Krankheit o.n.A.
[C38] Bösartige Neubildung des Herzens, des Mediastinums und der Pleura
[C38.0] Bösartige Neubildung - Herz, Perikard
[C38.8] Bösartige Neubildung - Herz, Mediastinum und Pleura, mehrere Teilbereiche überlappend
[D15.1] Gutartige Neubildung - Herz
[D48.7] Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens - Sonstige näher bezeichnete Lokalisation
[E05.9] Hyperthyreose, nicht näher bezeichnet, Hyperthyreose o.n.A., Thyreotoxische Herzkrankheit
[F45.3] Somatoforme autonome Funktionsstörung, Da-Costa-Syndrom, Herzneurose, Magenneurose
[I00] Rheumatisches Fieber ohne Angabe einer Herzbeteiligung, Akute oder subakute Arthritis bei Rheumatisches Fieber
[I01] Rheumatisches Fieber mit Herzbeteiligung
[I01.8] Sonstige akute rheumatische Herzkrankheit, Akute rheumatische Pankarditis
[I01.9] Akute rheumatische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet, Jeder Zustand unter I00 mit nicht näher bezeichnete Herzbeteiligung
[I02.0] Rheumatische Chorea mit Herzbeteiligung, Chorea o.n.A. mit Herzbeteiligung, Rheumatische Chorea
[I02.9] Rheumatische Chorea ohne Herzbeteiligung, Rheumatische Chorea o.n.A.
[I08] Krankheiten mehrerer Herzklappen
[I08.8] Sonstige Krankheiten mehrerer Herzklappen
[I08.9] Krankheit mehrerer Herzklappen, nicht näher bezeichnet
[I09] Sonstige rheumatische Herzkrankheiten

Dieser Dialog dient zum Suchen von Diagnosen.

Suchmuster

Geben Sie den Text ein, der in den Diagnosen, die Sie suchen, enthalten ist.

Suchsteuerung

Wollen Sie, daß nur die Diagnosen angezeigt werden, die das Suchmuster enthalten, dann wählen Sie **Exaktes Muster**. Soll das Suchergebnis auch alle übergeordneten Diagnosen beinhalten, dann markieren Sie **Teilbäume**.

Suchen

Startet die Suche.

OK

Übernimmt die selektierte Diagnose in die Diagnosenauswahl.

Suche Leistungen

Leistungsuche

Suchmuster

Suchfortschritt

- [2301] Operation bei Herztrauma ohne Herzlungenmaschine
- [2306] Operation bei Herztrauma mit Herzlungenmaschine
- [2311] Operation angeborener Herzfehler ohne Herzlungenmaschine
- [2316] Op. angeb. Herzfehler mit HLM (isolierter ASD, isolierter VSD)
- [2321] Op. angeborener komplexer Herzfehler mit Herzlungenmaschine
- [2336] Operation am Perikard mit Herzlungenmaschine
- [2366] Implantation eines permanenten Herzschrittmachers
- [2367] Aggregatwechsel eines permanenten Herzschrittmachers
- [2374] Loop-Recorder-Impl. zur diagn. Langzeit-Herzrhythmusüberw.
- [2377] Extirpation eines intracavitären Herztumors (Myxom, Sarkom)
- [2421] Herzklappenoperation ohne Herzlungenmaschine
- [2426] Herzklappenop. m. Herzlungenmasch. (Valvuloplastik jed. Art)
- [2461] Op. am Herzen od. an grossen Gefässen in tiefer Hypothermie
- [2499] sonstige Operation - Herz und herznahe Aorta
- [4761] Implantation des Herzens
- [4771] Implantation von Herz und Lunge
- [6506] Rechtsherzkatheter (exkl. Swan-Ganz-Katheter)

Dieser Dialog dient zum Suchen von Leistungen.

Suchmuster

Geben Sie den Text ein, der in den Leistungen, die Sie suchen, enthalten sein soll.

Suchen




Startet die Suche.


OK


Übernimmt die selektierte Leistung in die Leistungsauswahl.


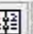
Suche Patienten

Patientenkartei: Patientensuche

 Abbrechen


140  Suchen

☒ In Station 31.10.2012  - 31.10.2014 

Suchen

☒ Familienname & Vorname ☐ Stationsaufnahme ☐ Patienten ID (Station) ☒ Entlassungszustand
☒ KH-Aufnahmezahl ☐ Entlassungszeitpunkt ☐ Patienten ID (KIS) ☐ Entlassungszustand Spital

Name	Sex	Geb.Dat.	KH-AZ	Aufn.	Entl.	Entlassungszust
Doe10003 Jane	w	25.08.1944	14010205	16.02.2014	21.02.2014	Lebend
Doe10004 John	m	11.04.1922	14014808	17.02.2014	20.02.2014	Lebend
Doe10013 John	m	09.05.1947	14016680	21.02.2014	26.02.2014	Lebend

 Auswahl übernehmen

Mittels dieser Dialogbox können Sie Patienten suchen.

Die Suche erfolgt abhängig davon, welche Felder Sie für die Suche ausgewählt haben.

Der Zeitraum für die Suche läßt sich ebenfalls einschränken. Standardmäßig ist die Suche auf die letzten beiden Jahre begrenzt.

Drücken Sie den "Suchen"-Button, um die Suche zu Starten. Das Ergebnisse wird in der Liste dargestellt.

Auswahl übernehmen

Mit Auswahl übernehmen wird ein markierter Patient zur Datenbearbeitung, Berichtserstellung oder Diagrammerstellung übernommen.

Rechte Maustaste

Doe2 John
Aufnahme
Physiologie
Dekurs
MEL Intensiv
Ernährung
Infektion Übersicht
Infektion
Drainagen
Katheter
Scores Übersicht
Score: TRISS
Score: SAPS II
Score: SAPS 3
Score: APACHE II
Score: LOD
Score: TISS-28
Entlassung
ICD10 Katalog
MEL Katalog
Leistung kum.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Patienten, dann erscheint ein Menü. Wenn die Patientensuche vom *ICdoc Manager* gestartet wurde, können Sie auswählen welcher Schirm geöffnet werden soll. Ansonsten können Sie mit diesem Menü den Patienten übernehmen.

Sortieren

Wollen Sie die Suchergebnisse nach einem Sortierkriterium (z.B. Aufnahmedatum) sortieren, dann klicken Sie auf die Überschrift der jeweiligen Spalte (z.B. Aufn.) der Ergebnisliste. Um die Sortierreihenfolge umzukehren, klicken Sie wieder auf die Überschrift der Spalte.

Spaltenbreite

Bewegen Sie den Mauscursor auf den rechten Rand des Feldes der Überschrift einer Spalte, drücken die linke Maustaste und verschieben den Rand bis die Spalte die gewünschte Breite besitzt. Lassen Sie die linke Maustaste wieder los.

Vollständiger Export

Der vollständige Export dient dem Export sämtlicher Daten der Datenbank.

Datumsgrenzen

Das Zeitintervall wird automatisch gewählt. Die Untergrenze ist das Aufnahmedatum des (zeitmäßig) ersten Patienten und die Obergrenze ist das Tagesdatum.

Datei

Der Dateiname wird automatisch beim Öffnen dieses Dialoges erstellt. Er setzt sich zusammen aus: V, Stations ID und dem Tagesdatum im Format JJJJMMTT. Dieser Dateiname ist nur ein Vorschlag. Sie können auch jeden anderen Dateinamen verwenden.

Pfad

Geben Sie den Pfad an wohin *ICdoc* die Exportdatei speichern soll. Der Browser hilft Ihnen dabei.

Export

Der Button **Export** startet den vollständigen Export.

Anmerkungen

Der vollständige Export basiert auf dem Standard Datenbank-Export. Der Unterschied besteht in der automatischen Auswahl von:

- Datumsgrenzen
- Incl. Station
- Nicht Anonym
- Komprimierte Ausgabe (es wird automatisch eine *.ZIP - Datei erstellt)
- Keine passwortgeschützte Ausgabe


Datensicherung

Die Datensicherung geschieht ausschließlich über die von Oracle zur Verfügung gestellten Sicherungsmechanismen. Weitere Informationen zum Thema Datenbanksicherung entnehmen Sie bitte der Oracle-spezifischen Dokumentation.

Selektionskriterium (Interpretation von Datumsgrenzen)

Folgende Interpretationen von Datumsgrenzen bei der Auswahl von Berichten und Diagnosen, sowie im Export-Wizard sind in *ICdoc* möglich.

Fall 1/11

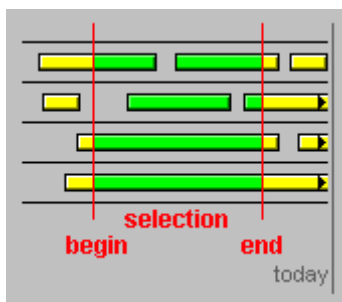

Die Patienten wurden im angegebenen Zeitraum:

<aufgenommen>: Unerheblich

<betreut>: Ja


<entlassen>: Unerheblich

Inkludiert Patienten, die sich heute noch in der Station befinden: Ja

Berücksichtigt werden folgende Pflgetage: Zeitraum


Daraus folgt: Auswertung kumulative Einträge ist nicht möglich.

Fall 2/11

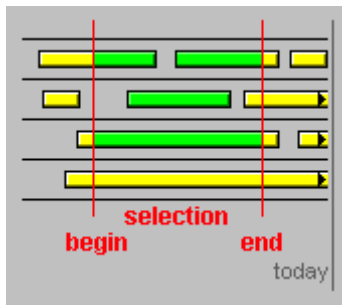


Die Patienten wurden im angegebenen Zeitraum:
 <aufgenommen>: Unerheblich
 <betreut>: Ja
 <entlassen>: Unerheblich
 Inkludiert Patienten, die sich heute noch in der Station befinden: Nein
 Berücksichtigt werden folgende Pflegetage: Zeitraum
 Daraus folgt: Auswertung kumulative Einträge ist nicht möglich.

Fall 3/11

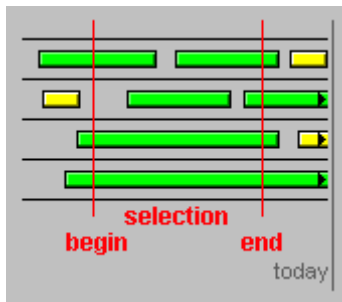


Die Patienten wurden im angegebenen Zeitraum:
 <aufgenommen>: Unerheblich
 <betreut>: Ja
 <entlassen>: Unerheblich
 Inkludiert Patienten, die sich heute noch in der Station befinden: Ja
 Berücksichtigt werden folgende Pflegetage: Alle
 Daraus folgt: Auswertung kumulative Einträge ist nicht möglich.

Fall 4/11

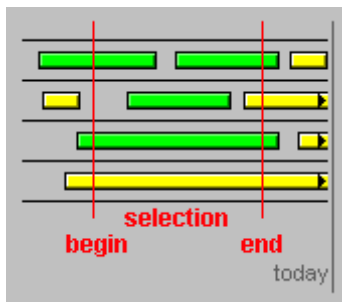


Die Patienten wurden im angegebenen Zeitraum:
 <aufgenommen>: Unerheblich
 <betreut>: Ja
 <entlassen>: Unerheblich
 Inkludiert Patienten, die sich heute noch in der Station befinden: Nein
 Berücksichtigt werden folgende Pflegetage: Alle
 Daraus folgt: Auswertung kumulative Einträge ist möglich.

Fall 5/11

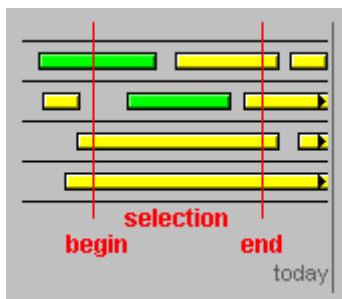


Die Patienten wurden im angegebenen Zeitraum:
 <aufgenommen>: Unerheblich
 <betreut>: Ja
 <entlassen>: Ja
 Inkludiert Patienten, die sich heute noch in der Station befinden: Nein
 Berücksichtigt werden folgende Pflegetage: Alle
 Daraus folgt: Auswertung kumulative Einträge ist möglich.

Fall 6/11

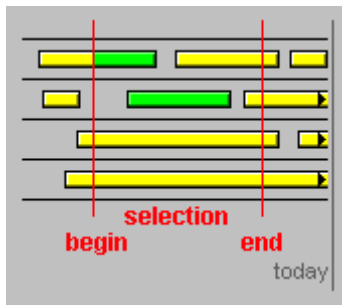


Die Patienten wurden im angegebenen Zeitraum:
 <aufgenommen>: Unerheblich
 <betreut>: Ja
 <entlassen>: Ja
 Inkludiert Patienten, die sich heute noch in der Station befinden: Unerheblich
 Berücksichtigt werden folgende Pflegetage: Zeitraum
 Daraus folgt: Auswertung kumulative Einträge ist nicht möglich.

Fall 7/11

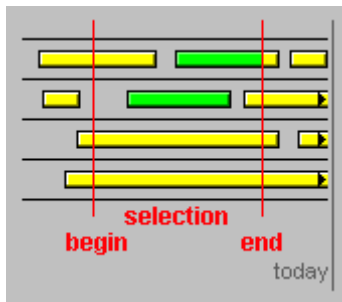


Die Patienten wurden im angegebenen Zeitraum:
 <aufgenommen>: Ja
 <betreut>: Ja
 <entlassen>: Unerheblich
 Inkludiert Patienten, die sich heute noch in der Station befinden: Nein
 Berücksichtigt werden folgende Pflegetage: Zeitraum
 Daraus folgt: Auswertung kumulative Einträge ist nicht möglich.

Fall 8/11

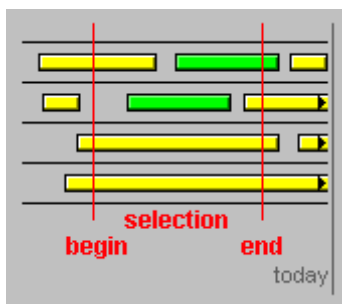


Die Patienten wurden im angegebenen Zeitraum:
 <aufgenommen>: Ja
 <betreut>: Ja
 <entlassen>: Unerheblich
 Inkludiert Patienten, die sich heute noch in der Station befinden: Nein
 Berücksichtigt werden folgende Pflegetage: Alle
 Daraus folgt: Auswertung kumulative Einträge ist möglich.

Fall 9/11

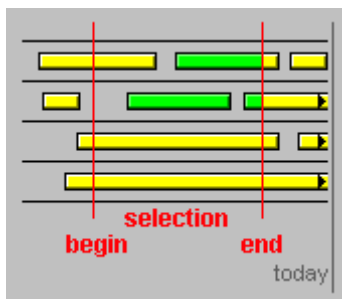


Die Patienten wurden im angegebenen Zeitraum:
 <aufgenommen>: Ja
 <betreut>: Ja
 <entlassen>: Unerheblich
 Inkludiert Patienten, die sich heute noch in der Station befinden: Ja
 Berücksichtigt werden folgende Pflegetage: Zeitraum
 Daraus folgt: Auswertung kumulative Einträge ist nicht möglich.

Fall 10/11

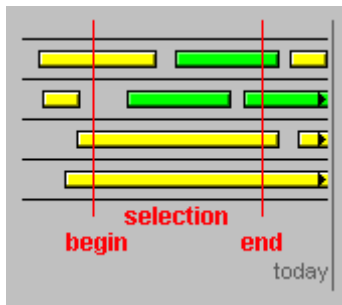

Die Patienten wurden im angegebenen Zeitraum:
 <aufgenommen>: Ja
 <betreut>: Ja
 <entlassen>: Nein
 Inkludiert Patienten, die sich heute noch in der Station befinden: Ja
 Berücksichtigt werden folgende Pflgetage: Alle
 Daraus folgt: Auswertung kumulative Einträge ist nicht möglich.

Fall 11/11

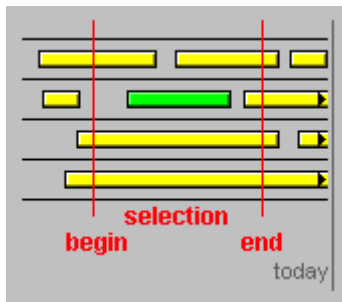

Die Patienten wurden im angegebenen Zeitraum:
 <aufgenommen>: Ja
 <betreut>: Ja
 <entlassen>: Ja
 Inkludiert Patienten, die sich heute noch in der Station befinden: Unerheblich
 Berücksichtigt werden folgende Pflgetage: Unerheblich
 Daraus folgt: Auswertung kumulative Einträge ist möglich.

LKF Fehlerliste

Mit Aktivierung des LKF-Zusatzmoduls zum Abgleich der Patientendaten laut Vorschrift des Ministeriums mit den Verlegungsdaten aus dem Krankenhausinformationssystem (KIS) erscheint im ICdoc Manager (Hauptschirm) ein neuer Button in der Ikonenleiste (in Form eines Bundesadler).


Dieser Bundesadler kennt zwei Zustände:

Still: In diesem Fall gibt es in ICdoc keine anstehenden Fehler aus der Patientenübertragung.

Blinkend: Das LKF-Zusatzmodul hat die abgeschlossenen Patientenaufenthalte überprüft und Fehler festgestellt. In diesem Fall klicken Sie bitten den Bundesadler an, um die LKF-Fehlerliste anzuzeigen.


Die LKF-Fehlerliste können Sie auch über das Menü, mit dem Menüpunkt: "Schnittstellen/LKF", auswählen.

ICdoc Manager

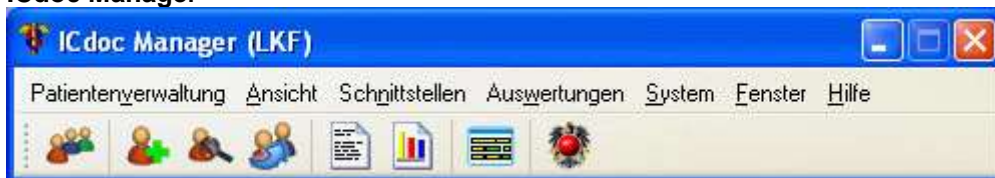

Mit Aktivierung der LKF-Fehlerliste erscheint folgender Bildschirm. Sie können die Position und Größe des Schirms ihren Bedürfnissen anpassen. Position und Größe werden für jeden Benutzer separat gespeichert und bleiben auch bei Neustart des Programms erhalten.

LKF Fehlerliste

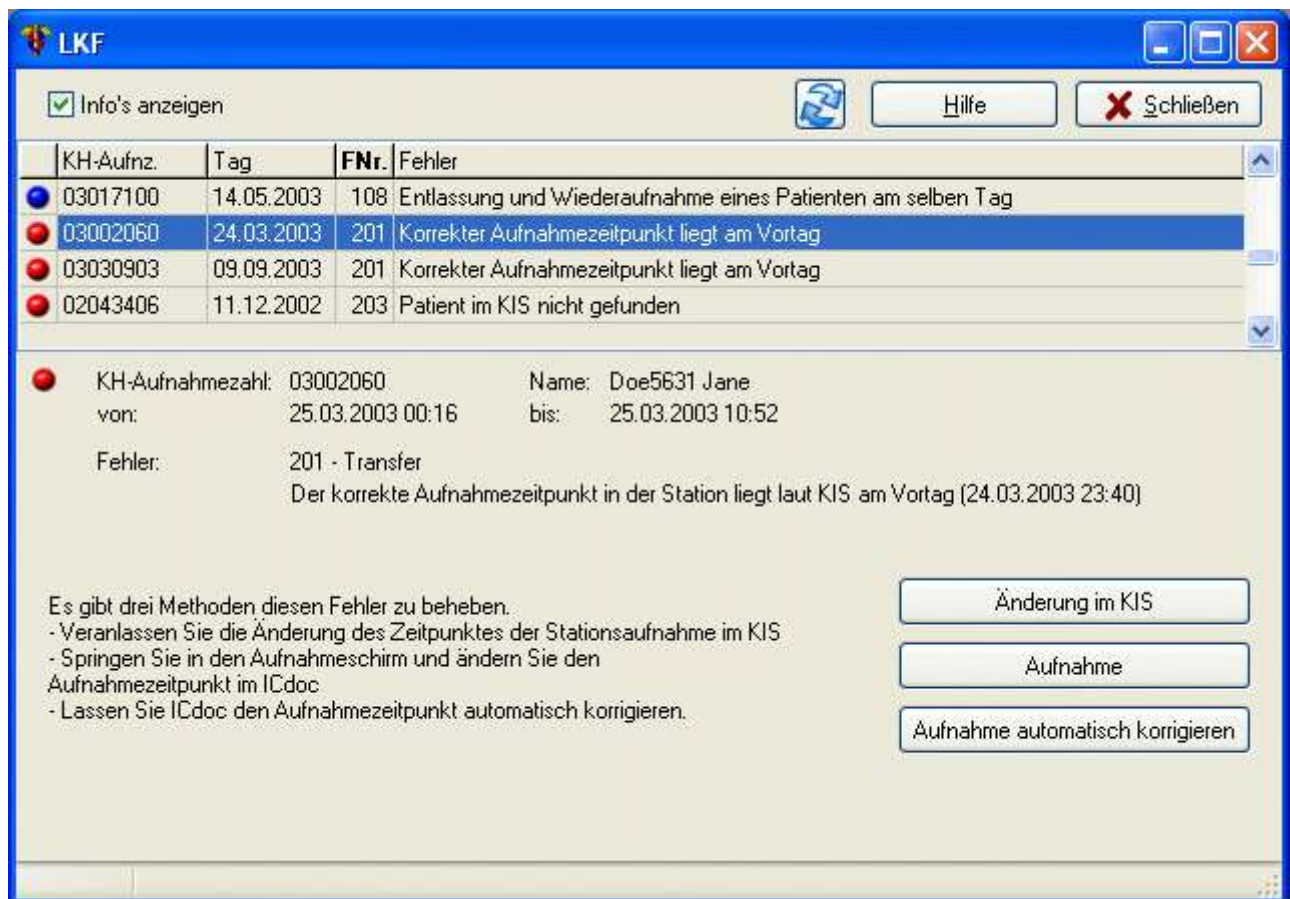

Die LKF Fehlerliste gliedert sich in drei Teile:

Kopfleiste:

Die Checkbox "Infos anzeigen" dient zum Ein- und Ausblenden von Informationen in der Liste (Blauer Ball). Dies betrifft alle Informationen, die nicht separat als bereits gelesen markiert wurden.

Der Button mit den beiden blauen Pfeilen dient wie bereits in der Bettenliste zum neu Einlesen der Listeninformation aus der Datenbank. Behandelte Fehler werden zwar als bearbeitet markiert, die Anpassung der Liste an den neuen Zustand erfolgt allerdings erst nach Aktivierung dieses Buttons beziehungsweise nach dem Wiederöffnen dieses Schirms (LKF-Fehlerliste).

Der Button "Hilfe" führt Sie direkt zu dieser Hilfeseite.

Der Button "Schließen" beendet die Anzeige dieses Schirms. Der Status der angezeigten Fehler bleibt dadurch unverändert.

Fehlerliste:

Die Liste zeigt alle nicht behandelten und vom LKF-Modul zurückgelieferten Fehler.

Die Reihenfolge, nach der die Liste sortiert ist, lässt sich durch Klick auf eine der Überschriften Ihren Bedürfnissen anpassen.

Folgende Parameter werden in der Liste angezeigt:

Status: Wir unterscheiden für die angezeigten Fehler drei Kategorien:

Info (Blauer Ball) In diese Kategorie fallen alle Mitteilungen über automatisch vom LKF-Modul durchgeführten Änderungen und Zustände in der Patientendokumentation, die von der Norm abweichen, vom LKF-Modul aber ohne Beanstandung akzeptiert werden.

Warnung (Gelber Ball) In diese Kategorie fallen alle vom LKF-Modul zurückgelieferten Warnungen. Diese Warnungen führen zwar zu keinen Daten- und damit Punkteverlusten für die Abrechnung, müssen aber auf jeden Fall kontrolliert werden. Gegebenfalls sind die dazu führenden Einträge zu korrigieren.

Fehler (Roter Ball) In diese Kategorie fallen alle vom LKF-Modul zurückgelieferten Fehler. Diese Fehler müssen unbedingt korrigiert werden, damit die Patientendokumentation den Vorgaben des Ministeriums entspricht. Bei weiterbestehenden Fehlern führt dies zu Punkteverlusten in der Abrechnung!

KH-Aufnz.: KH-Aufnahmezahl des angeführten Patienten.

Tag: Datum des beanstandeten Datensatzes (Aufnahme, Entlassung oder Datum der TISS-28 Dokumentation).

Fnr.: Fehlernummer. Jedem Fehler (auch Info und Warnung) wurde eine eindeutige Fehlernummer zugewiesen. Diese Fehlernummer soll die Kommunikation zwischen der Anwenderbetreuung und dem Stationspersonal bei Rückfragen erleichtern. Zusätzlich zu dieser Fehlernummer gibt es Fehler mit bestimmten Codes am Anfang des Fehlertextes in eckigen Klammern. Diese Fehlercodes stammen aus dem LKF-Subsystem des Ministeriums und sind bei Anfragen ebenfalls hilfreich.

Fehler: Kurzbeschreibung zum angezeigten Fehler. Zu jedem Fehler existiert auch eine längere Version, die erst bei Auswahl einer Fehlerzeile im unteren Abschnitt des Schirms (Verfahrensanweisung) angezeigt wird.

Verfahrensanweisung:

Im dritten Abschnitt dieses Schirms werden Detailinformationen zur ausgewählten Fehlermeldung angezeigt.

Mit diesen Detailinformationen lässt sich der Patient mit seinem genauen Aufenthalt bestimmen. Ebenso werden in der längeren Version der Fehlermeldung noch zusätzliche Werte zur genaueren Fehlerdiagnose angezeigt.

Bei Fehlertexten, die mit einem Fehlercode (in eckigen Klammern) beginnen, handelt es sich um Fehler, die direkt aus dem Prüfmodul des Ministeriums stammen. Bei Anfragen im Ministerium zu einem dieser Fehler ist dieser Fehlercode unbedingt anzuführen!

Je nachdem, um welche Art es sich bei dem ausgewählten Fehler handelt, ändert sich der Bildschirmaufbau unterhalb der angezeigten Fehlermeldung. Hier werden alle Hinweise angeführt, die Ihnen bei der Korrektur der angezeigten Fehler helfen sollen. Bei einigen Fehlern besteht auch die Möglichkeit, die Fehler automatisch korrigieren zu lassen. Bitte beachten Sie, dass die Kontrolle der Patientendaten durch das Erfassungspersonal auf der Station auch bei automatischen und teilautomatischen Änderungen durchgeführt werden muss!

Die im letzten Teil eingeblendeten Buttons zum Auslösen der beschriebenen Funktion können ebenfalls je nach Art des ausgewählten Fehlers variieren.

Die angezeigten Fehler in der Liste bleiben so lange angezeigt, bis im betroffenen Eingabeschirm (Aufnahme, Entlassung, SAPS-II, TRISS, TISS-28 oder Entlassung) eine Änderung durchgeführt wurde.

Nachdem die Änderung durchgeführt wurde, kann die Liste mit dem Refresh-Button (Button mit den beiden blauen Pfeilen am oberen Bildschirmrand) auf den aktuellen Stand gebracht werden. Beachten Sie bitte, dass mit einer Änderung in einer der Eingabeschirme alle davon betroffenen Fehlermeldungen aus der Fehlertabelle gelöscht werden. Sollten Sie die Fehler durch Ihre Änderung in der Karteikarte nicht tatsächlich beseitigt haben, erscheint der Fehler nach der Neuübertragung an das LKF-Modul wieder. Änderungen werden täglich einmal an das LKF-Modul geliefert. Die erstmalige Übertragung der Patientendaten erfolgt innerhalb von 24 Stunden nach der Entlassung aus der Station (Eintrag eines Zeitpunkts für die Stationsentlassung im Entlassungs-Schirm).

Information


Hotline

Hotline und Support


Ihre ICdoc Stations-ID _____

ICdoc Stations-ID: **1000**

Technische Hotline _____

 Telefon: +43 - (0)664 - 376 29 81
 E-Mail: icdoc@buell-informatik.at
<http://www.icdoc.at>

Medizinische Hotline _____

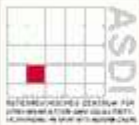 Telefon: +43 - (0)1 - 952 28 42
 Fax: +43 - (0)1 - 952 28 43
 E-Mail: office@asdi.ac.at
<http://www.asdi.ac.at>

OK

ICdoc 5 Pro/Lite

(c)1996-2002 Österreichisches Zentrum für Dokumentation und Qualitätssicherung in der Intensivmedizin (ASDI).

Technische Hilfe

Die vorliegende Version wurde in mehreren Stationen ausgiebig getestet. Trotzdem werden wir Ihre Mithilfe benötigen, um das System laufend zu verbessern. Für die rasche und unbürokratische Kontaktaufnahme stellt Ihnen die Firma Firma Büll Informatik GesmbH sowohl eine Telefonnummer als auch eine Email Adresse zur Verfügung. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Technischen Hotline ist ein abgeschlossener Wartungsvertrag mit der Firma Firma Büll Informatik GesmbH *gesmbh*.

Medizinische Fragen

Für Fragen medizinischen Inhalts steht für Mitglieder des Vereins das Sekretariat zur Verfügung. Bitte faxen Sie uns die Anfrage oder senden sie via Postweg oder als Email. Bitte beachten Sie, daß technische Fragen ausschließlich an die Technische Hotline der Firma Firma Büll Informatik GesmbH gerichtet werden können.

Technische Voraussetzungen für Oracle V7

Hardware:

- IBM kompatibler PC mit mindestens i486 CPU (besser: Pentium), mindestens 32 MB Ram und VGA Grafikkarte mindestens 800 x 600 Punkten Auflösung
- 200 MB freie Festplattenkapazität (besser 1GB für online-Sicherungen)
- CD-ROM Laufwerk zur Installation von *ICdoc*.

- Gerät zur Datenarchivierung (ZIP, JAZ o.ä. Laufwerke)

Software:

- Betriebssystem:
Microsoft Windows NT 3.51 oder
Microsoft Windows NT 4.0

Technische Voraussetzungen für Oracle V8

Hardware:

- PC Pentium mit mindestens 600 Mhz, mindestens 192 MB Ram und VGA Grafikkarte mit mindestens 800 x 600 Punkten Auflösung
- 800 MB freie Festplattenkapazität (besser 2GB für online-Sicherungen)
- CD-ROM Laufwerk zur Installation von *ICdoc*.
- Gerät zur Datenarchivierung (extern verfügbares Netzwerk-Lafuwerk, ZIP, JAZ o.ä. Laufwerke)

Software:

- Betriebssystem:
Microsoft Windows NT 4.0 oder
Microsoft Windows 2000 Professional

Sponsoren



[Fresenius Kabi](#) Sondermodul: [Ernährung](#) mit [Begleittext](#) von Prof. Dr. Wilfred Druml (AKH Wien).



[Roche](#) Sondermodul: [Infektionen](#) mit [Begleittext](#) von Prof. M. Hiesmayr und H. Burgmann (AKH Wien).

Fresenius Kabi

Ihr kompetenter Partner für klinische Ernährung



Hafnerstraße 36, 8055 Graz
Tel: 0316/249

Sondermodul: [Ernährung](#)

Enterale Ernährung
Ingrid Gratzer DW 465
ingrid.gratzer@fresenius-kabi.com

Parenterale Ernährung
Andrea Pommer DW 460
andrea.pommer@fresenius-kabi.com

www.fresenius-kabi.at

Roche

Ihr kompetenter Partner im Management von Infektionskrankheiten



Roche Austria GmbH
und
Roche Diagnostics Wien GmbH
Engelhorngasse 3
A - 1211 Wien
Tel.: +43-1-27739

Sondermodul: [Infektionen](#)

Produktmanagement
Mag. Martin Munte DW 353
martin.munte@roche.com

www.roche.at



www.antibiotika.at

www.influenza.at

Hinweis betreffend die prognostizierte Spitalmortalität

Scoresysteme zur Berechnung des Schweregrades der Erkrankung beschreiben den mathematischen Zusammenhang zwischen den unabhängigen Variablen (Patienteneigenschaften) und der abhängigen Variable (Krankenhausmortalität) in Form einer mathematischen Gleichung. Das Ergebnis der Gleichung liefert eine Sterbewahrscheinlichkeit zwischen 0% und 100%. Da die Kategorie "Vitalstatus bei Entlassung aus dem Krankenhaus" jedoch ein Ereignis mit lediglich zwei Ausprägungen darstellt (Überleben/Nichtüberleben), ist festzuhalten, daß diese Scores für individuelle Vorhersagen einzelner Patienten nicht geeignet sind. Selbst wenn man davon ausgehen könnte, daß diese Systeme fehlerfreie Vorraussagen liefern (was nicht der Fall ist!) würde eine (extrem hohe)

Mortalitätswahrscheinlichkeit von 90% noch immer bedeuten, daß 10 von 100 dieser Patienten daß Krankenhaus lebend verlassen würden.

Die so berechneten Sterbewahrscheinlichkeiten dienen also lediglich der Klassifizierung von Patientengruppen, keinesfalls aber sind sie für die individuelle Prognosestellung geeignet!

Literatur:

Metnitz PhGH, Vesely H, Valentin A, Lang T, Le Gall JR. Ratios of observed to expected mortality are affected by differences in case mix and quality of care. Intensive Care Med 2000; 26:146-1472.

Predicting outcome in ICU patients. 2nd European Consensus Conference in Intensive Care Medicine. Intensive-Care-Med. 1994; 20(5): 390-7